

# ZOLL® AED Plus® Felhasználói kézikönyv - betétlap



**Fontos:** Ez az ábra azt jelenti, hogy az AED Plus egység mind felnőttek, mind gyermekek kezelésére alkalmas. Ha az AED Plus egység nem rendelkezik ezzel az ábrával, akkor gyermekgyógyászati célokra nem használható, és *nem működik* a Pedi-padz® II gyermekgyógyászati elektródákkal. Lépjen kapcsolatba a ZOLL Orvosi Részvénytársasággal (ZOLL Medical Corporation), ha az AED Plus egységet ZOLL Pedi-padz II gyermekgyógyászati elektródákkal kívánja használni, vagy egy engedélyezett ZOLL forgalmazótól kérjen tájékoztatást a ZOLL AED Plus gyermekgyógyászati kiegészítő készletről (Pediatric Upgrade Kit).

Amikor a felnőttek és gyermekek kezelésére egyaránt alkalmas AED Plus egység kábeleit felnőttek számára készült elektródákkal köti össze, az AED Plus egység automatikusan felnőtteknek megfelelő beállításra kapcsol a szívritmus-érzékelés és automatikus sokenergia kiválasztása szempontjából (120 joule, 150 joule, 200 joule). Ezután az egység a **FELNŐTT ELEKTRODÁK** hangjelzést hallatja, és megjeleníti az ennek megfelelő üzenetet. Amikor a kábeleket ZOLL Pedi-padz II gyermekgyógyászati elektródákkal köti össze, az AED Plus egység automatikusan gyermekgyógyászati beállításra kapcsol a szívritmus-érzékelés és automatikus sokenergia kiválasztása szempontjából (50 joule, 70 joule, 85 joule), a **GYERMEK ELEKTRODÁK** hangjelzést hallatja, és megjeleníti az ennek megfelelő üzenetet.

## A Pedi-padz II (csecsemő/gyermek) elektródák felhelyezése


A Pedi-padz II elektródák felhelyezése előtt készítse elő a beteget.

### A beteg előkészítése:

1. A beteg mellkasáról távolítsa el a ruhát.
2. Győződjön meg arról, hogy a beteg mellkasa teljesen száraz.

### A Pedi-padz II elektródák felhelyezése:

1. Nyissa fel az elektródákat tartalmazó csomagot, és bontsa ki a belső csomagolást, hogy hozzáférjen az elektródákhoz. Helyezze az elektródákat a beteg testére a csomagoláson látható ábra szerint.
2. A kerek elektródát vegye le a védőhátlapról, és helyezze a beteg mellkasára (a csomagoláson látható ábra szerint).
3. Helyezze a kezét az elektróda szélére, és a másik kezével óvatosan görgetve simítsa rá az elektródát a beteg mellkasára úgy, hogy közben kinyomja a levegőt az elektróda alól.
4. Fordítsa a beteget a hasára. A négyzet alakú elektródát vegye le a védőhátlapról, és helyezze a beteg hátára a két lapockacsont közé (a csomagoláson látható ábra szerint).
5. Helyezze a kezét az elektróda szélére, és a másik kezével óvatosan görgetve simítsa rá az elektródát a beteg bőrére, kinyomva a levegőt az elektróda alól.
6. Fordítsa a beteget a hátára, és kövesse a ZOLL AED Plus utasításait.

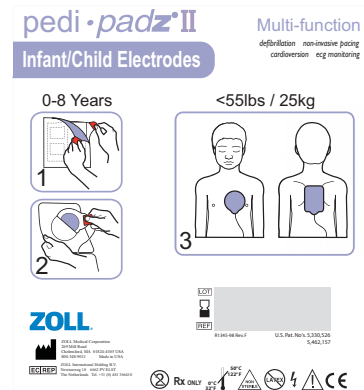

**MEGJEGYZÉS** A Pedi-padz II (csecsemő/gyermek) elektródákat a ZOLL pacemaker termékekkel együtt is használhatja maximum egy óra időtartamú tempóra (lásd az *M Series Operator's Guide* (*M sorozat használati utasítása*) kiadvány tempóra vonatkozó részét).

## Használati javallat

Akkor használja a ZOLL AED Plus terméket, ha az áldozatnak, akinek feltehetően megállt a szíve, NINCS VÉRKERINGÉSE, amire a következő jelek mutatnak:

- eszméletvesztés, és
- a beteg nem lélegzik, és
- nincs pulzus vagy más vérkeringésre utaló jel.

Ha az áldozat még nincs 8 éves, és a testsúlya kevesebb, mint 25 kg (55 font), a ZOLL AED Plus-t kell használni a ZOLL AED Plus gyermekgyógyászati elektródákkal. A terápiát nem szabad késleltetni a beteg pontos korának vagy testsúlyának megállapítása miatt.