

**ZOLL AED 3™**

Guida rapida



**ZOLL®**

## Benvenuti

Grazie per aver scelto ZOLL AED 3™ come defibrillatore esterno automatico, attualmente il DAE più avanzato del mondo. Seguite queste semplici istruzioni per impostare AED 3 in pochi minuti. Una volta completata l'impostazione, annotate il vostro numero seriale e accedete a [www.zollaed3.com](http://www.zollaed3.com) per registrare AED 3 per una garanzia estesa.

In caso di domande o quesiti, contattate ZOLL al numero +1-978-421-9655 o inviateci una e-mail all'indirizzo [tservice\\_master@zoll.com](mailto:tservice_master@zoll.com), oppure contattate il distributore autorizzato da cui avete acquistato AED 3.

# Contenuto

## Cartella della documentazione:

- Guida rapida
- Certificato di attivazione PlusTrac™
- Guida/poster di riferimento per il soccorso per ZOLL AED 3
- Manuale dell'operatore ZOLL AED 3

## Nella scatola:

- ZOLL AED 3
- Cartella della documentazione
- CPR Uni-padz™
- Batteria ZOLL AED 3

# Registrazione completa del DAE

Registrarsi in: [www.zollaed3.com](http://www.zollaed3.com) a:


- Registratevi per ricevere gratuitamente la garanzia estesa per 2 anni
- Impostate il vostro account PlusTrac facendo uso del Certificato di attivazione PlusTrac,\* che vi qualifica per l'uso gratuito di PlusTrac per il primo anno
  - Tenete traccia della prontezza di AED 3
  - Tenete traccia dell'addestramento degli operatori
  - Gestite il vostro programma online per DAE
  - Ricevete e-minder e notifiche di avvertimenti
  - Consentite al vostro AED 3 di riportare regolarmente i risultati di autotest a PlusTrac tramite la vostra rete locale Wi-Fi
- Ricevete informazioni sull'impostazione del vostro account ZOLL online per il carico e la gestione di dati di eventi clinici in ZOLL Case Review™

\*certificato di attivazione compreso nella cartella della documentazione


# Impostazione del vostro ZOLL AED 3




Rimuovere tutto il contenuto dal contenitore di spedizione.

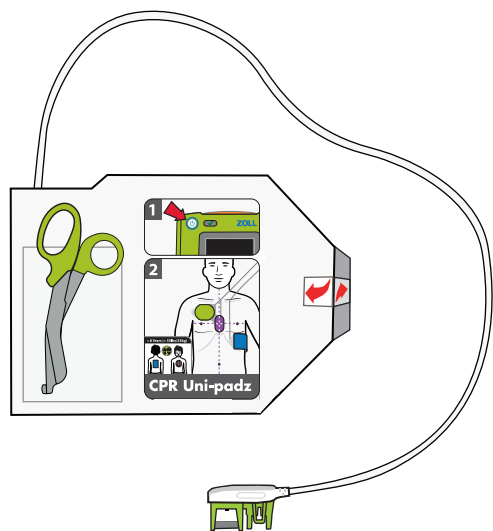


Rimuovere il CPR Uni-padz dalla sua confezione protettiva.

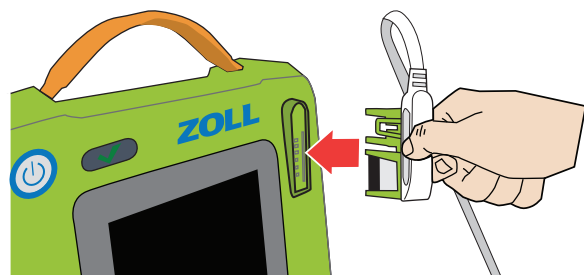


Collegare il connettore del cavo CPR Uni-padz alla porta dell'elettrodo AED 3.

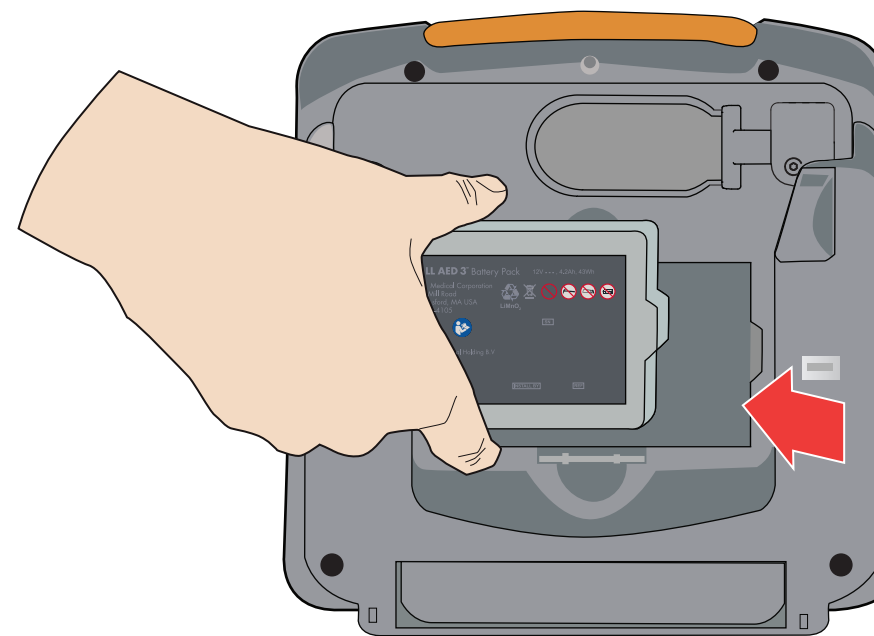

Rimuovere il gruppo batteria di AED 3 dalla confezione di spedizione. Tenere la batteria dalle linguette laterali, con l'etichetta rivolta verso l'esterno. Tenere il nuovo gruppo batteria dalle linguette e inserirlo nel DAE finché non scatta in posizione, allineando la tacca nell'estremità della batteria alla tacca corrispondente nel vano batteria fino a bloccarla in posizione.

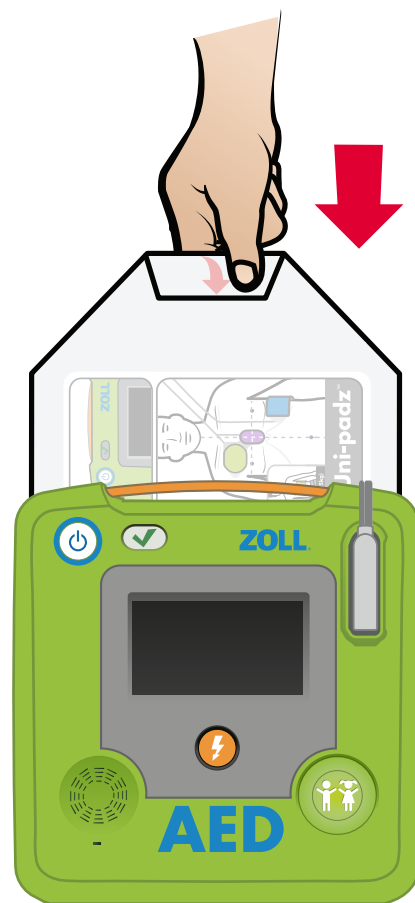

Il ZOLL AED 3 eseguirà un auto-test in automatico. Mentre l'auto-test è in esecuzione, inserire il CPR Uni-padz nel retro del DAE in modo che l'etichetta sulla confezione sia rivolta verso di sé.

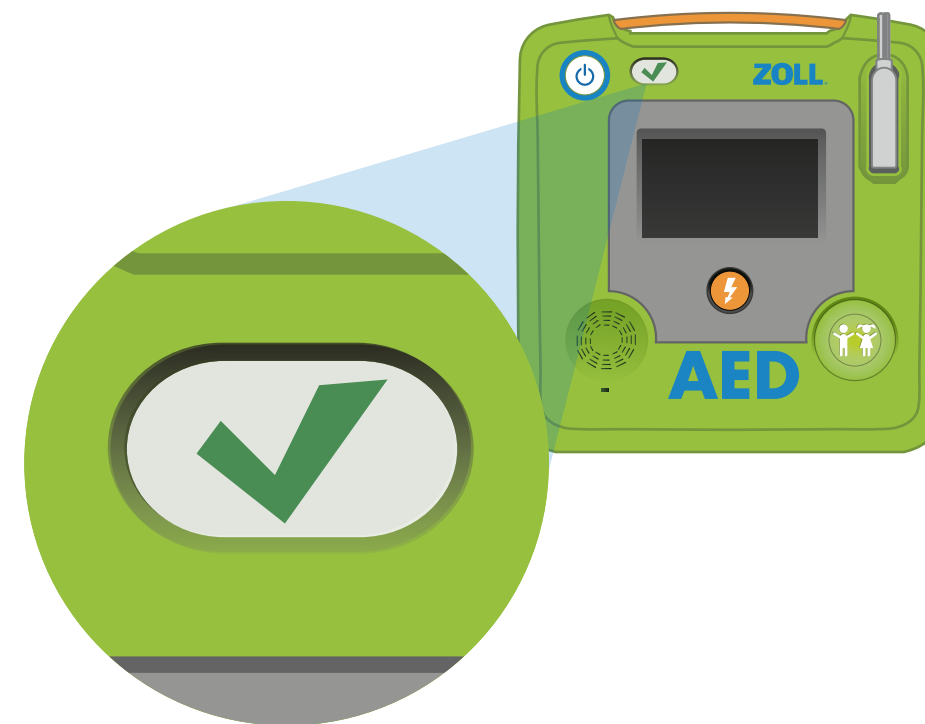

Dopo l'esecuzione dell'auto-test di AED 3, verificare che sia stato superato ascoltando il messaggio udibile "Unit OK" o guardando il simbolo di spunta verde nella finestra di indicazione dello stato. Ora AED 3 è pronto per l'uso. In caso di domande, fare riferimento al manuale utente incluso nella cartella sanitaria.

**Domande:**

Contattare il servizio tecnico ZOLL o il rappresentante locale autorizzato ZOLL

**Servizio di assistenza tecnica ZOLL:**

Telefono: +1-978-421-9655

E-mail: [tservice\\_master@zoll.com](mailto:tservice_master@zoll.com)