

DURCHFÜHREN EINER REANIMATION

1



Reagiert der Patient?

2




Rufen Sie den Rettungsdienst!

3



AED holen.

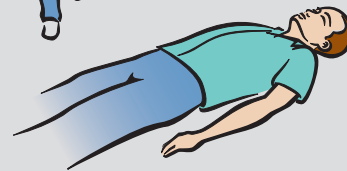

4




AED am Boden abstellen.
Abdeckung öffnen.

5



Kleidung entfernen.
Brust freilegen.

6

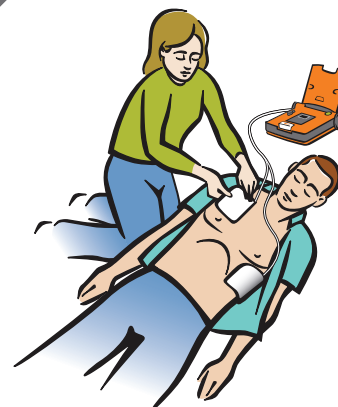

Elektroden anbringen.

7




Berühren Sie den Patienten
nicht während der Analyse.

8




Bei Anweisung die rot
blinkende Taste drücken.

9

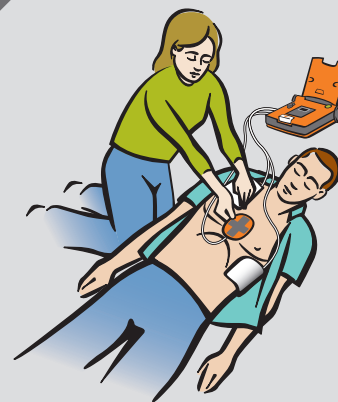

HLW-Gerät anbringen,
wenn vorhanden.

10

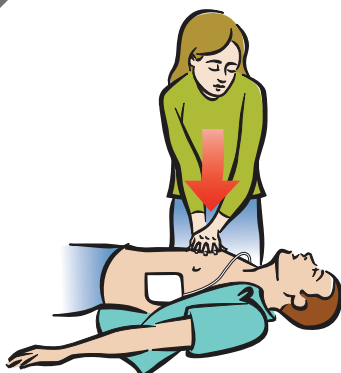

Anweisungen des
AED befolgen.
Kompressionen durchführen.

11



Bei Anweisung
Atemspenden geben.

Halbautomatischer AED



Cardiac Science und das Shielded Heart-Logo sind Marken
der Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019 Alle Rechte vorbehalten.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany



70-01972-83 A



DÉROULEMENT D'UNE INTERVENTION

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les services d'urgence !

3



Munissez-vous d'un DAE.

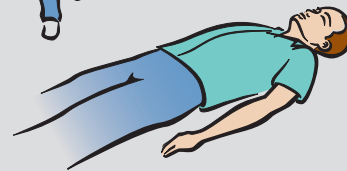

4




Posez le DAE sur le sol. Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements. Dénudez le thorax.

6

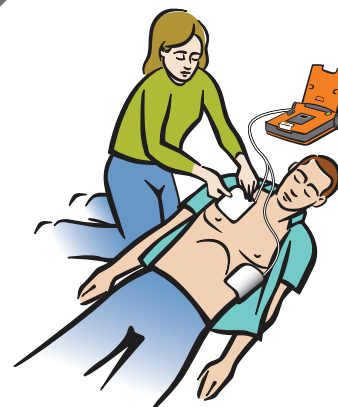

Placez les électrodes.

7




Ne touchez pas le patient.

8




Si le système vous y invite, appuyez sur le bouton rouge clignotant.

9

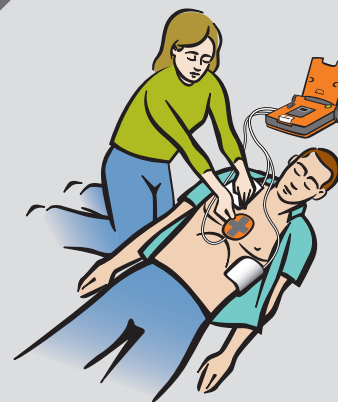

Si un appareil de RCP est disponible, positionnez-le.

10

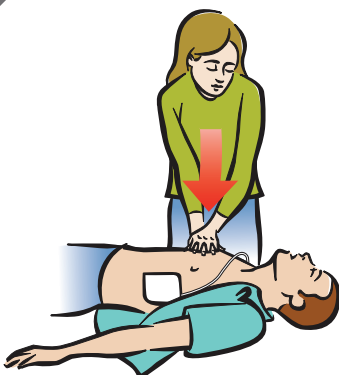

Suivez les invites du DAE. Administrez les compressions.

11



Si le système vous y invite, administrez les insufflations.

DAE semi-automatisé



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation. Copyright © 2019. Tous droits réservés.

500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531, États-Unis
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hanovre
Allemagne



70-01972-83 A

