

# ESECUZIONE DI UN INTERVENTO

1



Il paziente reagisce?

2



Chiamare il servizio di emergenza.

3



Recuperare il DAE.

4



Appoggiare il DAE a terra. Aprire il coperchio.

5




Rimuovere gli indumenti. Esporre il torace.

6



Applicare gli elettrodi.

7

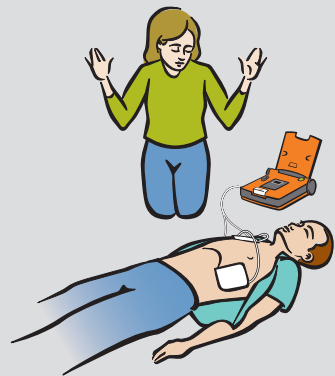

Non toccare il paziente.

8




Se richiesto, premere il pulsante rosso lampeggiante.

9



Se presente, posizionare il dispositivo per RCP.

10

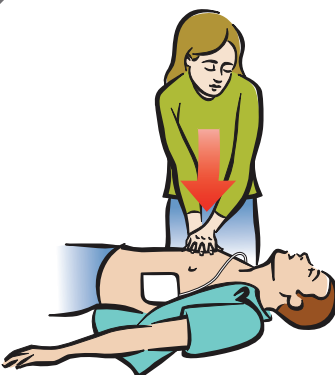

Seguire i messaggi del DAE. Eseguire le compressioni.

11



Se richiesto, dare i respiri.

## DAE semiautomatico



Cardiac Science e il logo Shielded Heart sono marchi di Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2019 Tutti i diritti riservati.  
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 USA  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germania



70-01972-10 A

