

EEN REDDINGSACTIE UITVOEREN

1



Reageert de patiënt?

2



Bel het noodnummer!

3



Haal AED.

4




Plaats AED op de grond.
Open deksel.

5



Verwijder kleding.
Ontbloot borst.

6

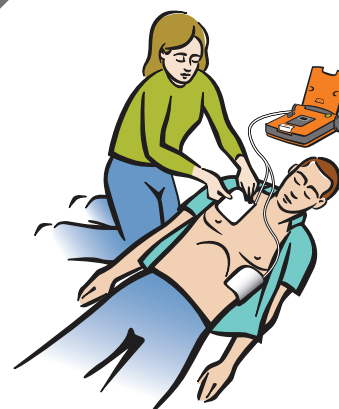

Bevestig pads.

7




Raak de patiënt niet aan!

8




Als opgedragen,
druk op rode knipperende knop.

9

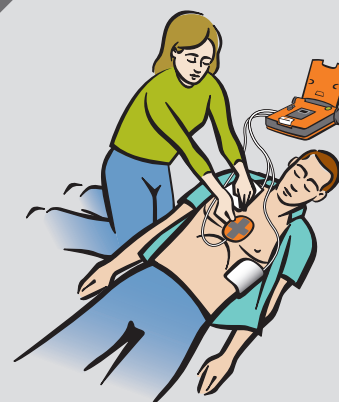

Indien aanwezig,
plaats reanimatieapparaat.

10

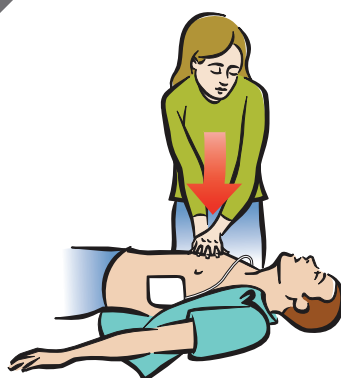

Volg instructies van AED.
Geef compressies.

11



Als opgedragen,
geef beademingen.

Semi-automatische AED



Cardiac Science en het Shielded Heart-logo zijn handelsmerken van Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019, Alle rechten voorbehouden.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 VS
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Duitsland



70-01972-82 A



DÉROULEMENT D'UNE INTERVENTION

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les services d'urgence !

3



Munissez-vous d'un DAE.

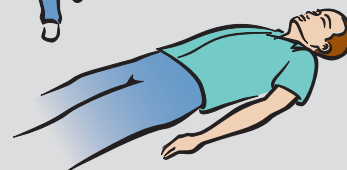

4




Posez le DAE sur le sol. Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements. Dénudez le thorax.

6

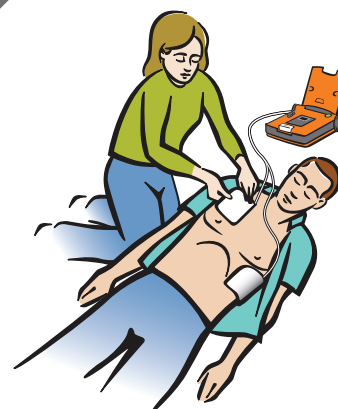

Placez les électrodes.

7




Ne touchez pas le patient.

8




Si le système vous y invite, appuyez sur le bouton rouge clignotant.

9

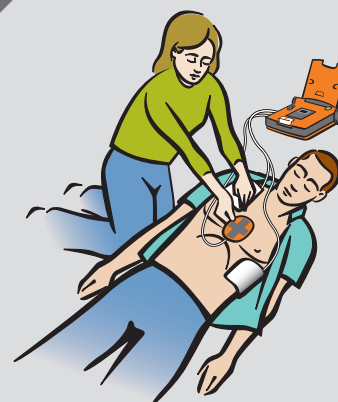

Si un appareil de RCP est disponible, positionnez-le.

10

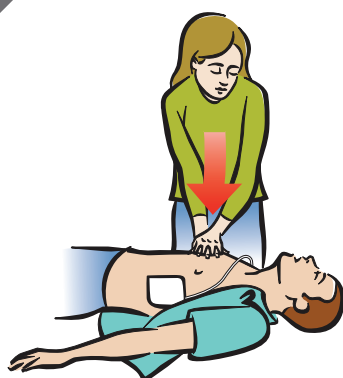

Suivez les invites du DAE. Administrez les compressions.

11



Si le système vous y invite, administrez les insufflations.

DAE semi-automatisé



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation. Copyright © 2019. Tous droits réservés.

500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531, États-Unis
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hanovre
Allemagne



70-01972-82 A

