

DÉROULEMENT D'UN SAUVETAGE

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les secours !

3



Allez chercher
le DAE.

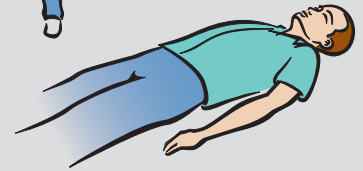

4



Placez le DAE par terre.
Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements.
Dénudez la poitrine.

6



Attachez les électrodes.

7



Ne touchez pas le patient.

8




Si vous y êtes invité, appuyez sur
le bouton clignotant rouge.

9



Le cas échéant, mettez
en place l'appareil de RCP.

10

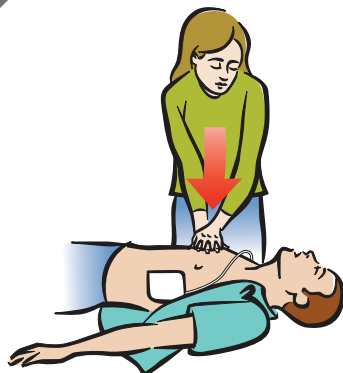

Suivez les invites du DAE.
Administrez les compressions.

11



Si vous y êtes invité,
administrez des insufflations.

DAE semi-automatique



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont
des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019 Tous droits réservés.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 États-Unis
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Allemagne



70-01972-20 A

