

DÉROULEMENT D'UN SAUVETAGE

1



Le patient réagit-il ?

2



Appelez les secours !

3



Allez chercher le DAE.



4



Placez le DAE par terre. Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements. Dénudez la poitrine.

6



Attachez les électrodes.

7



Ne touchez pas le patient.

8




Si nécessaire, le DAE délivrera automatiquement le choc.

9



Le cas échéant, mettez en place l'appareil de RCP.

10

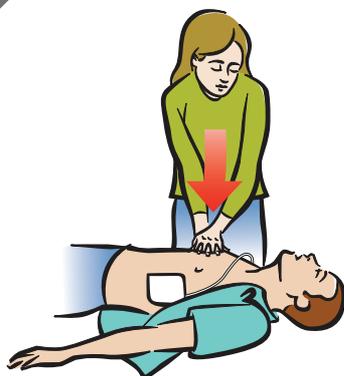

Suivez les invites du DAE. Administrez les compressions.

11



Si vous y êtes invité, administrez des insufflations.

DAE automatique



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.
Copyright © 2019 Tous droits réservés.
500 Burdick Parkway, Deerfield, Wisconsin 53531 États-Unis
www.cardiacscience.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Allemagne



70-02001-20 A

