

ZOLL AED 3™

Pikaopas



ZOLL®

Tervetuloa

Kiitos, että valintasi puoliautomaattiseksi ulkoiseksi defibrillaattoriksesi on ZOLL AED 3™, tämän hetken edistyksellisin defibrillaattori. Ota AED 3 -defibrillaattori käyttöön muutamassa minuutissa noudattamalla näitä helppoja ohjeita. Kun valmistelu on tehty, kirjaa sarjanumerosi muistiin ja rekisteröi AED 3 -defibrillaattorisi jatkettua takuuta varten kirjautumalla osoitteeseen www.zollaed3.com.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys ZOLliin soittamalla numeroon +1 987 421 9655, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tservice_master@zoll.com tai ottamalla yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään, jolta hankit AED 3 -defibrillaattorisi.

Sisällys

Opaskansio:

- Pikaopas
- PlusTrac™ -aktivointitodistus
- ZOLL AED 3 -pelastusviiteopas/-juliste
- ZOLL AED 3 -käyttöopas

Laatikossa:

- ZOLL AED 3
- Opaskansio
- CPR Uni-padz™
- ZOLL AED 3 -akku

Defibrillaattorin rekisteröinnin viimeisteleminen

Kirjaudu osoitteeseen www.zollaed3.com, jotta voit:


- rekisteröityä maksutonta kahden vuoden jatkettua takuuta varten
- määrittää PlusTrac-tilisi asetukset käyttämällä PlusTrac-aktivointitodistusta*, joka oikeuttaa sinut käyttämään PlusTrac-ohjelmaa ensimmäisen vuoden ajan maksutta
 - seurata AED 3 -defibrillaattorisi valmiutta
 - seurata ensivastehenkilöiden koulutusta
 - hallita defibrillaattorin ohjelmaa verkossa
 - vastaanottaa sähköisiä muistutuksia ja hälytysilmoituksia
 - ottaa käyttöön AED 3 -defibrillaattorin itsetestien tulosten säännöllisen raportoinnin PlusTraciin paikallisen Wi-Fi-verkkosi kautta
- vastaanottaa tietoja ZOLL Online tilisi määrittämisestä, jotta voit siirtää ja hallita klinisiä tapahtumatietoja ZOLL Case Review™ -ohjelmistolla

*aktivointitodistus opaskansiossa


ZOLL AED 3 -defibrillaattorin käyttöönotto




Tyhjennä kuljetuslaatikko kokonaan.

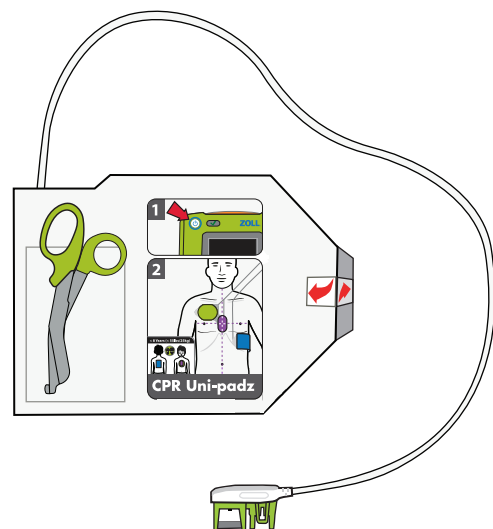


Ota CPR Uni-padz -elektrodit suoja-pakkauksestaan.

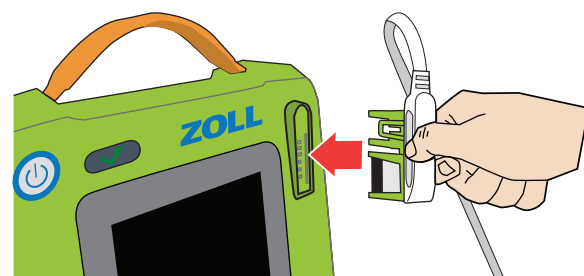


Liitä CPR Uni-padz -kaapelin liitin AED 3:n elektrodiliitintään.

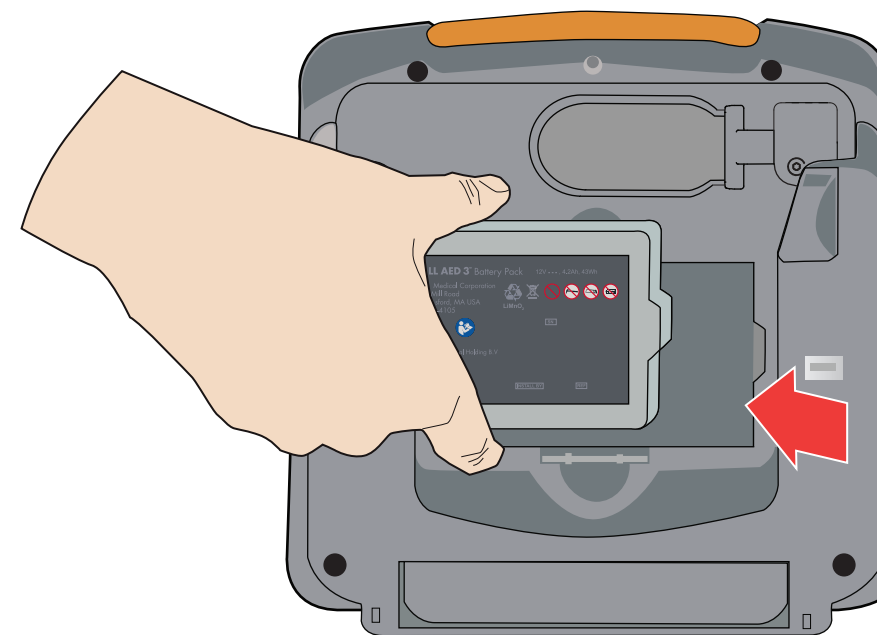

Ota AED 3 akku kuljetuslaatikosta. Pidä akkua kiinni sivujen liuskoista siten, että sen tarra osoittaa ulospäin. Työnnä akkua defibrillaattorin takaosaan, kunnes se naksahtaa paikalleen ja akun päässä oleva lovi on akkusyvennyksen vastaavan uran kohdalla.

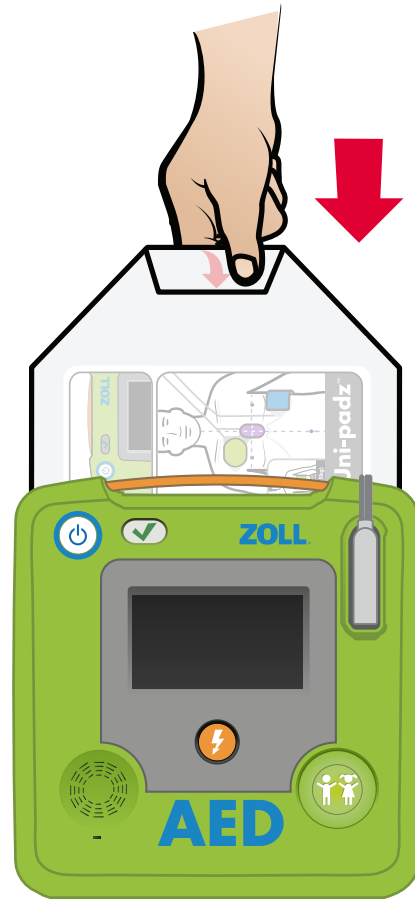

ZOLL AED 3 -defibrillaattori tekee automaattisen itsetestin. Itsetestin ollessa käynnissä aseta CPR Uni-padz -elektrodit defibrillaattorin takaosaan pakkauksen tarra itseesi päin.

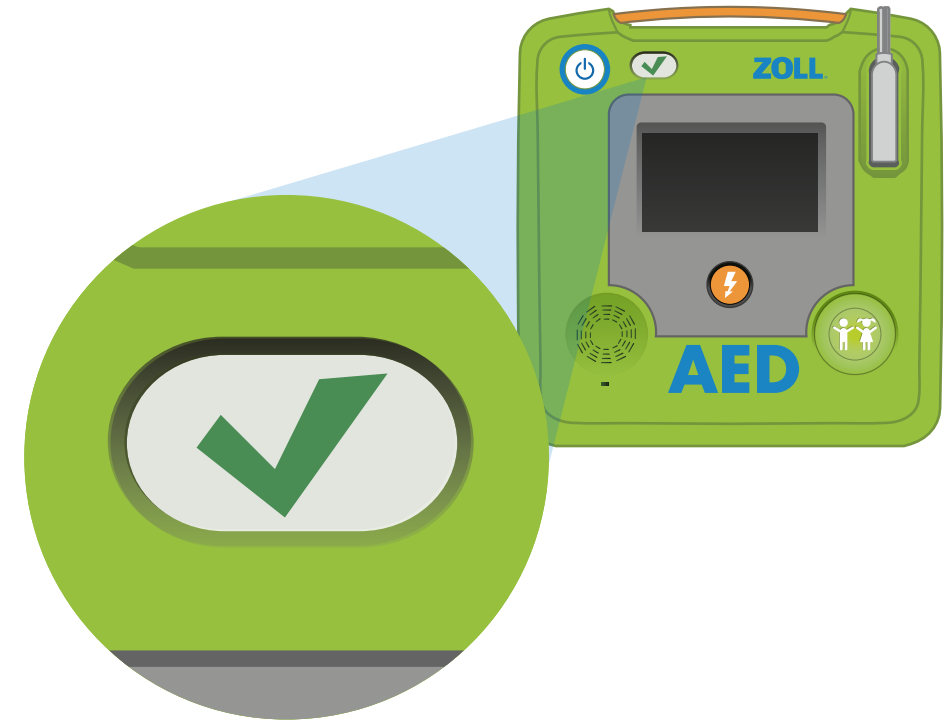

Vahvista AED 3 -defibrillaattorin itsetestin jälkeen, että laite läpäisi sen, kuuntelemalla, antaako laite äänikehotteen Yksikkö kunnossa, tai näkykö tilailmaisinikkunassa vihreää valintamerkkiä. AED 3 -defibrillaattorisi on nyt valmis käytettäväksi. Jos sinulla on kysyttävää, katso opaskansiossa oleva käyttöopas.

Kysymyksiä:

Ota yhteys ZOLLin tekniseen tukipalveluun
tai paikalliseen valtuutettuun ZOLL-edustajaasi.

ZOLLin tekninen tukipalvelu:

Puhelin: +1-978-421-9655

Sähköposti: tservice_master@zoll.com