

ZOLL AED 3™

Guia de Início Rápido



ZOLL®

Bem-vindo

Obrigado por selecionar o ZOLL AED 3™ como seu desfibrilador externo automatizado, o mais avançado DEA do mundo na atualidade. Siga estas instruções simples para configurar seu AED 3 em apenas alguns minutos. Uma vez concluída a configuração, anote seu número de série e faça login em www.zollaed3.com para registrar seu AED 3 para a garantia estendida.

Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contato com a ZOLL em +1-978-421-9655, envie um email para tservice_master@zoll.com ou entre em contato com o distribuidor autorizado junto ao qual você adquiriu seu AED 3.

Conteúdo

Pasta de documentação:

- Guia de Início Rápido
- Certificado de Ativação PlusTrac™
- Guia/Pôster de Referência de Resgate do ZOLL AED 3
- Manual do Operador do ZOLL AED 3

Na embalagem:

- ZOLL AED 3
- Pasta de documentação
- CPR Uni-padz™
- Bateria do ZOLL AED 3

Conclua o registro do DEA

Faça login em: www.zollaed3.com para:


- Registrar-se para sua garantia estendida grátis de 2 anos
- Configure sua conta PlusTrac usando seu Certificado de Ativação PlusTrac*. Com ele você tem direito ao primeiro ano de PlusTrac sem nenhum custo adicional
 - Acompanhe o estado de prontidão do seu AED 3
 - Acompanhe o treinamento dos seus respondedores
 - Gerencie seu programa de AED online
 - Receba lembretes eletrônicos e notificações de alertas
 - Permita que seu AED 3 comunique periodicamente os resultados de autotestes para a PlusTrac via sua rede local Wi-Fi
- Receba informações sobre como configurar sua conta online ZOLL para o upload e o gerenciamento de dados de eventos clínicos no ZOLL Case Review™

*Certificado de ativação incluído na pasta de documentação


Configuração do ZOLL AED 3




Remova todo o conteúdo da embalagem.

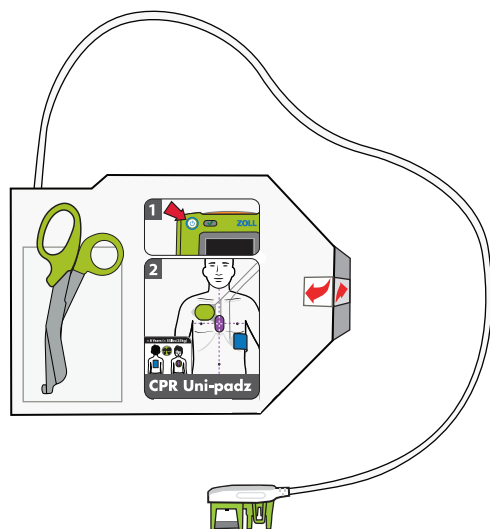


Remova o CPR Uni-padz da caixa protetora.

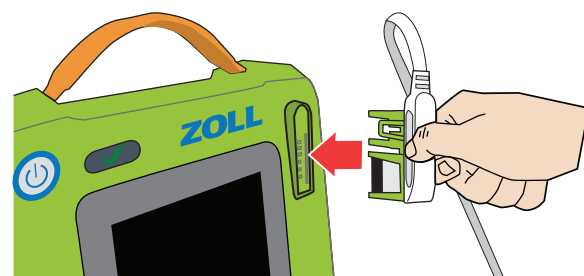


Ligue o conector do cabo CPR Uni-padz à porta de eletrodos do AED 3.

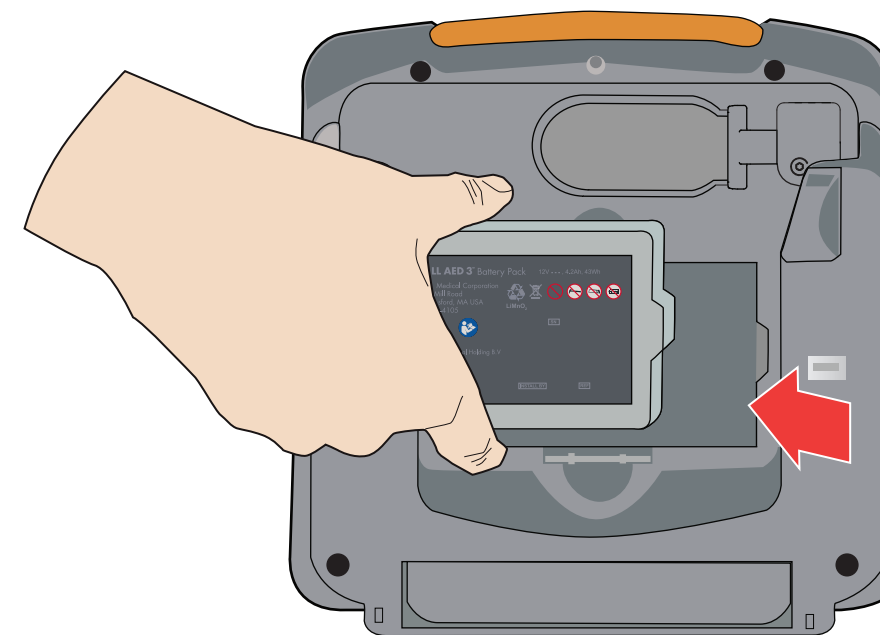

Remova a bateria AED 3 do contêiner de envio. Segure a bateria pelas abas laterais, com a etiqueta voltada para fora. Insira a bateria na parte traseira do DEA até que ela clique no lugar ao alinhar o entalhe na extremidade da bateria com a forma correspondente no compartimento da bateria.

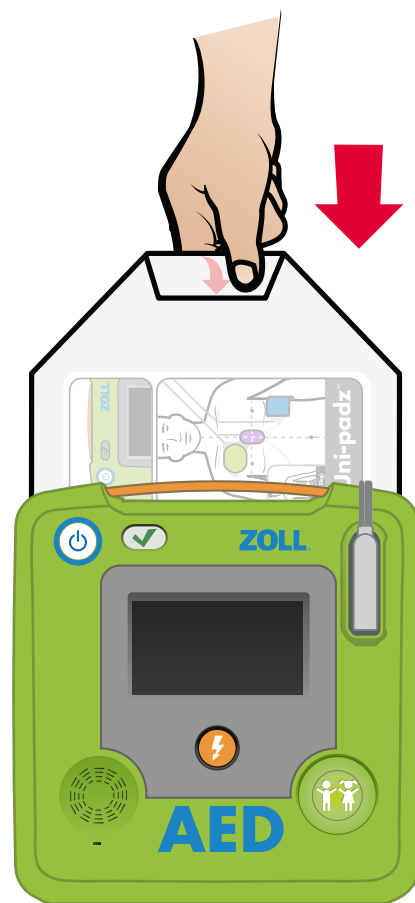

O ZOLL AED 3 realizará um autoteste automático. Durante a execução do autoteste, insira o CPR Uni-padz na parte traseira do DEA de modo que o rótulo na embalagem permaneça voltado para você.

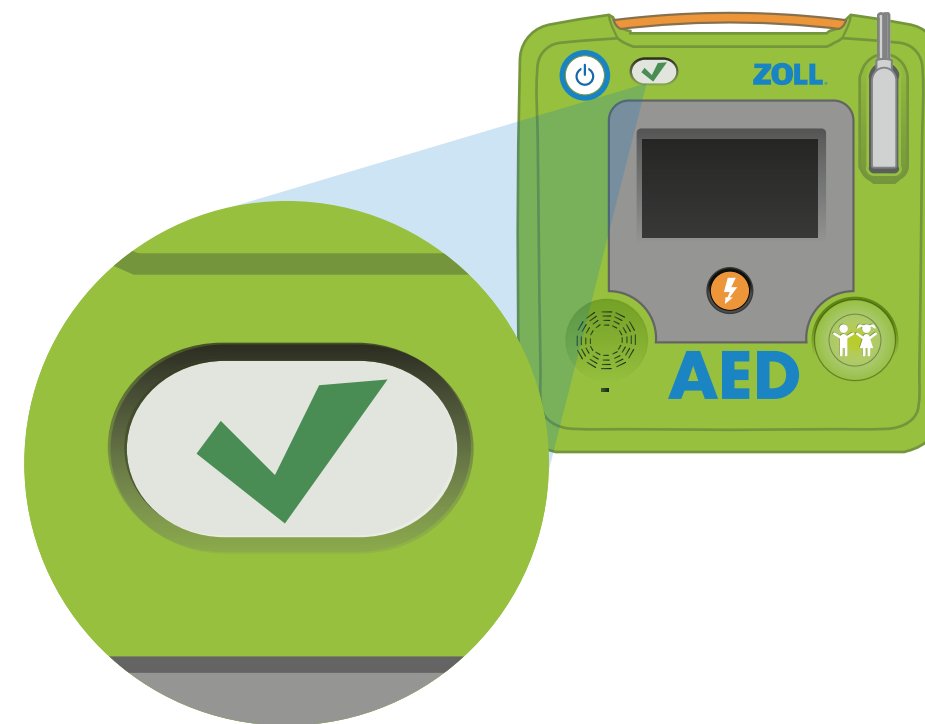

Após a conclusão do autoteste do AED 3, confirme que ele foi aprovado ouvindo o aviso sonoro "Unidade OK" ou procurando o símbolo de verificação verde na janela do indicador de status. Seu AED 3 está pronto para ser usado. Em caso de dúvidas, consulte o manual do operador incluído na pasta de documentação.

Perguntas:

Contate a Assistência Técnica ZOLL ou seu representante autorizado ZOLL local

Assistência Técnica ZOLL:

Telefone: +1-978-421-9655

Email: tservice_master@zoll.com

9650-001753-24 Rev. A

The ZOLL logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a registered trademark symbol (®) at the end of the word.