

מדריך להתחלה מהירה

ZOLL AED 3®



ZOLL®

ברוך הבא

תודה שבחרת את ZOLL AED 3® בתור הדפיברילטור האוטומטי החיצוני, נכון להיום, זהו הדפיברילטור המתקדם ביותר בעולם. פעל בהתאם להוראות הפשוטות על מנת להגדיר את ה-AED 3 תוך כמה דקות בלבד. לאחר השלמת ההתקנה, רשום את המספר הסידורי והיכנס לכתובת www.zollaed3.com על-מנת לרשום את ה-AED 3 לקבלת אחריות מורחבת.

אם יש לך שאלות או חששות, פנה אל ZOLL בטלפון 1-978-421-9655 או שלח לנו דוא"ל לכתובת tservice_master@zoll.com או פנה למפיץ המורשה שממנו רכשת את ה-AED 3.

תוכן

תיקיית תיעוד:

- מדריך להתחלה מהירה
- תעודת הפעלה PlusTrac™
- פוסטר/מדריך עזר להצלת חיים של ZOLL AED 3
- מדריך למפעיל של ZOLL AED 3

תכולת האריזה:

- ZOLL AED 3
- תיקיית תיעוד
- CPR Uni-padz™
- סוללה ל-ZOLL AED 3

השלם את הרישום של ה-AED

כנס אל: www.zollaed3.com על-מנת:


- להירשם לאחריות מורחבת לשנתיים ללא תשלום
- להגדיר את חשבון PlusTrac באמצעות שימוש בתעודת ההפעלה של PlusTrac*, אשר מקנה לך את PlusTrac בשנה הראשונה ללא תשלום
- עקוב אחר רמת המוכנות של ה-AED 3
- עקוב אחר מידת ההדרכה של המגיבים
- נהל את תוכנית ה-AED באינטרנט
- קבל תזכורות אלקטרוניות והודעות על התראות
- אפשר ל-AED 3 לשלוח מעת לעת תוצאות של בדיקות עצמיות ל-PlusTrac דרך רשת ה-Wi-Fi המקומית שלך
- לקבל מידע על הגדרת חשבון האינטרנט של ZOLL לצורך העלאה וניהול נתוני אירועים קליניים ב-ZOLL Case Review™

*תעודת ההפעלה כלולה בתיקיית התיעוד


הגדרת ה-ZOLL AED 3 שברשותך




הוצא את כל הפריטים מקופסת המשלוח.

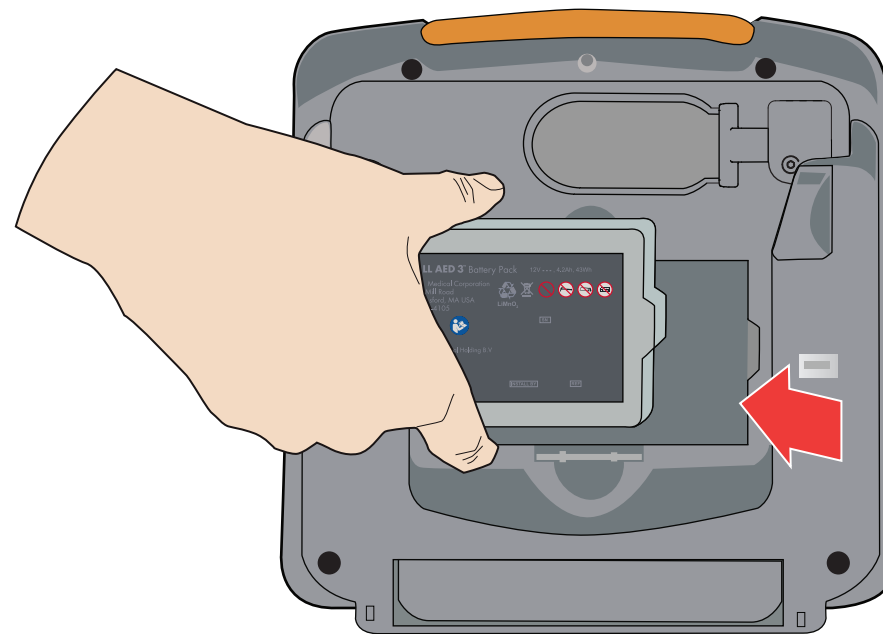


הוצא את הסוללה של ה-AED 3 מקופסת המשלוח. החזק את הסוללה מהלשוניות שבצדדים כאשר התווית פונה כלפיך. הכנס את הסוללה לחלקו האחורי של ה-AED עד שתישמע נקישה, כאשר החריץ בקצה הסוללה נכנס למקום המתאים בתא הסוללה.

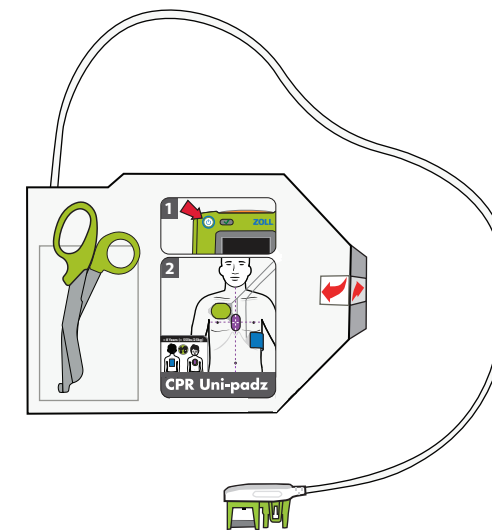


הוצא את הרפידות CPR Uni-padz מאריזת המגן שלהן.

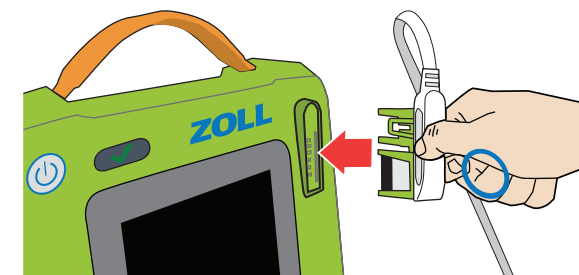

חבר את מחבר כבל הרפידות CPR Uni-padz ליציאת האלקטרודות ב-AED 3.

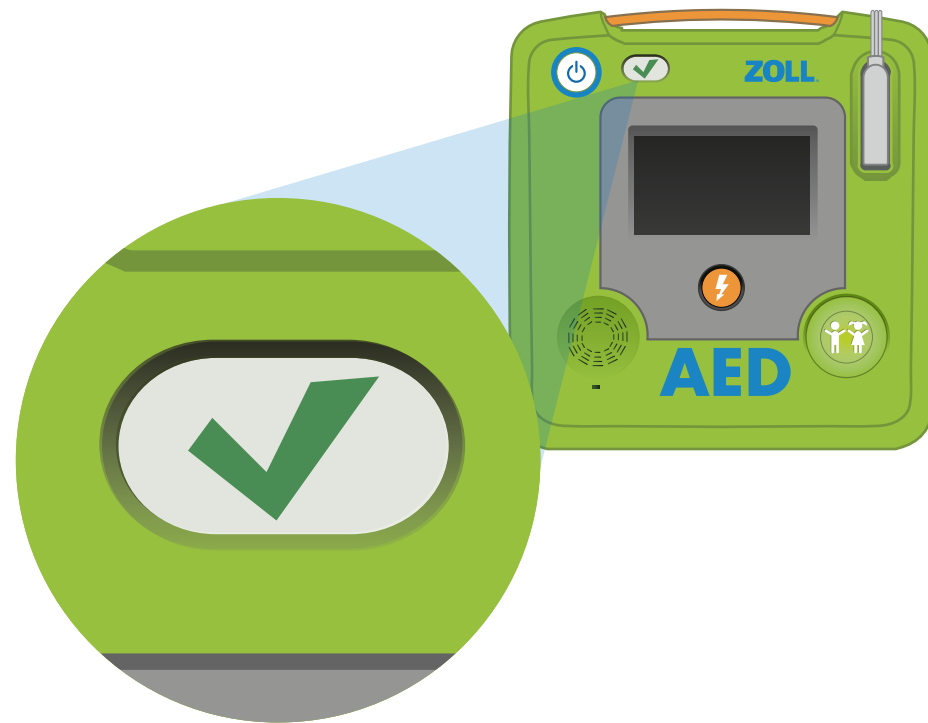

בתום הבדיקה העצמית של ה-AED 3, ודא שהיא עברה בהצלחה באמצעות האזנה להנחיה הקולית או "המכשיר תקין" או חיפוש סמל הביקורת הירוק בחלון חיווי המצב. ה-AED 3 שלך מוכן כעת לשימוש. אם יש לך שאלות כלשהן, עיין במדריך למפעיל שכלול בתיקיית התיעוד.

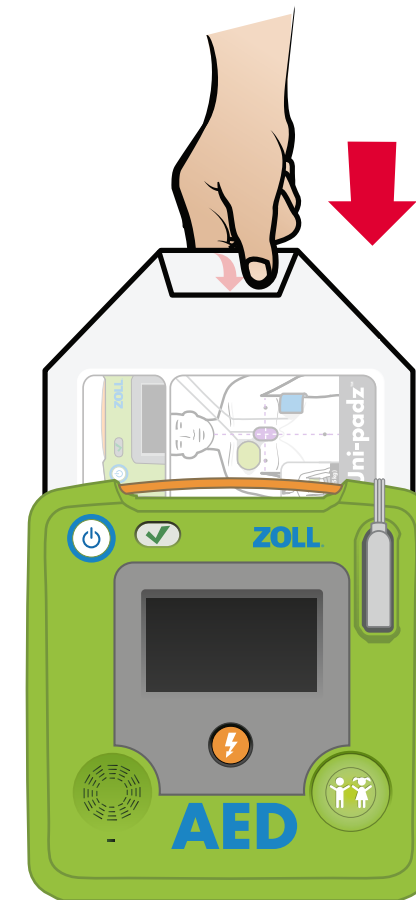

ה-ZOLL AED 3 יבצע בדיקה עצמית אוטומטית. בזמן שמתבצעת בדיקה עצמית, הכנס את הרפידות CPR Uni-padz לחלקו האחורי של ה-AED כאשר התווית שעל-גבי האריזה פונה כלפיך.



שאלות:

פנה לשירות הטכני של ZOLL
או לנציג המקומי המורשה של ZOLL

שירות טכני של ZOLL:

טלפון: +1-978-421-9655
דוא"ל: tservice_master@zoll.com

9650-001753-35 Rev. B