

ZOLL AED 3®

Hướng dẫn bắt đầu nhanh



ZOLL®

Chào mừng

Cảm ơn bạn đã chọn ZOLL AED 3® làm máy khử rung tim ngoài tự động, máy AED tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản này để thiết lập AED 3 của bạn chỉ trong vài phút. Sau khi thiết lập hoàn tất, hãy ghi lại số sê-ri của bạn và đăng nhập vào www.zollaed3.com để đăng ký AED 3 của bạn để được hưởng chương trình bảo hành mở rộng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với ZOLL theo số +1-978-421-9655 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tservice_master@zoll.com hoặc liên hệ với nhà phân phối ủy quyền mà bạn đã mua AED 3 từ đó.

Nội dung

Thư mục tài liệu:

- Hướng dẫn bắt đầu nhanh
- Chứng chỉ kích hoạt PlusTrac™
- Hướng dẫn cấp cứu tham khảo/Tờ rơi thông tin ZOLL AED 3
- Hướng dẫn dành cho người vận hành ZOLL AED 3

Trong hộp:

- ZOLL AED 3
- Thư mục tài liệu
- CPR Uni-padz™
- Pin ZOLL AED 3

Hoàn tất Đăng ký AED

Đăng nhập vào: www.zollaed3.com để:


- Đăng ký bảo hành mở rộng thời hạn 2 năm miễn phí
- Thiết lập tài khoản PlusTrac bằng Chứng chỉ kích hoạt PlusTrac,* cho phép bạn đủ điều kiện hưởng chương trình PlusTrac miễn phí năm đầu tiên
 - Theo dõi khả năng sẵn sàng của AED 3
 - Theo dõi trình độ đào tạo của các phản ứng viên của bạn
 - Quản lý chương trình AED trực tuyến
 - Nhận nhắc nhở qua email và thông báo cảnh báo
 - Cho phép AED 3 thường xuyên xuyên báo cáo kết quả tự kiểm tra đến PlusTrac thông qua mạng Wi-Fi cục bộ
- Nhận thông tin về việc thiết lập Tài khoản trực tuyến ZOLL để tải lên và quản lý dữ liệu sự kiện lâm sàng trong ZOLL Case Review™

*chứng chỉ kích hoạt có trong thư mục tài liệu


Thiết lập ZOLL AED 3




Lấy tất cả các thứ bên trong ra khỏi hộp vận chuyển.

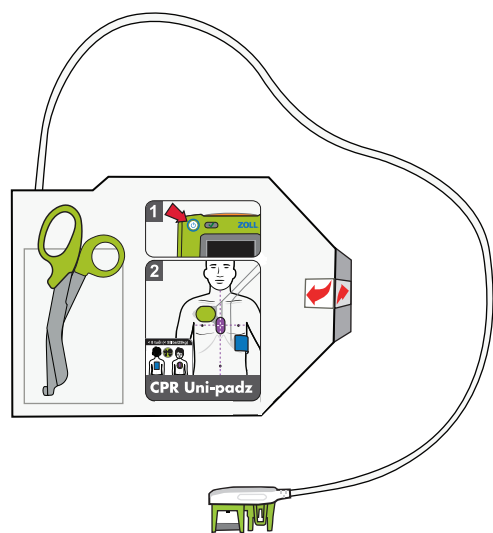


Lấy CPR Uni-padz khỏi hộp bảo vệ.

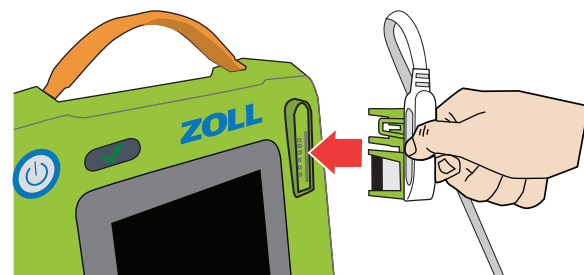


Cắm giắc nối dây cáp CPR Uni-padz vào cổng điện cực AED 3.

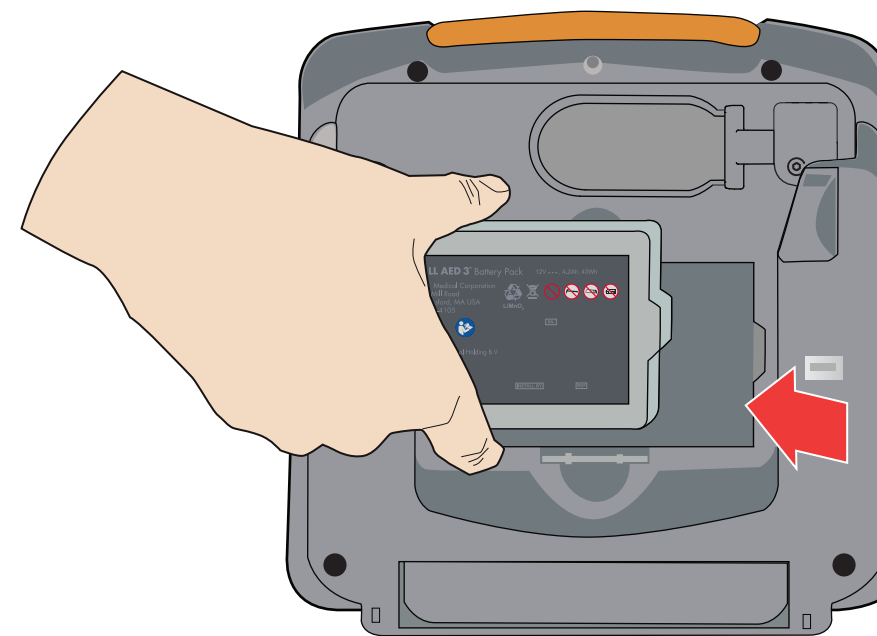

Lấy pin AED 3 ra khỏi hộp vận chuyển. Giữ vào các vấu bên cạnh pin với nhãn hướng ra ngoài. Lắp pin vào mặt sau của AED cho đến khi có tiếng tách khớp vào vị trí, đặt sao cho khác ở đầu pin khớp với hình dạng tương ứng trong ngăn chứa pin.

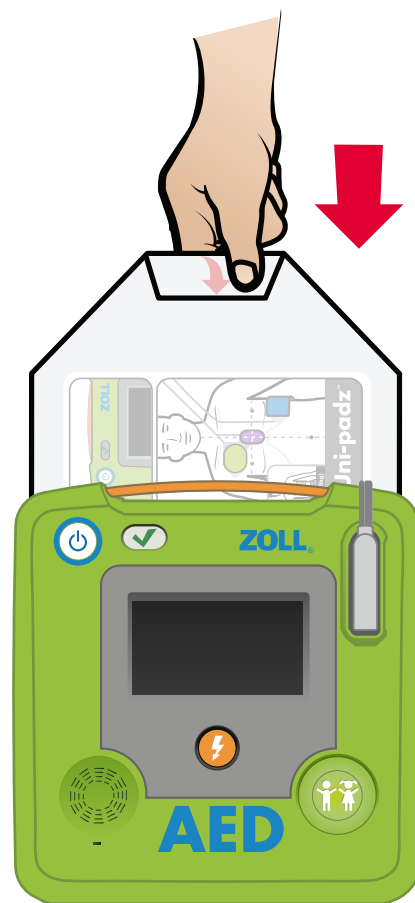

ZOLL AED 3 sẽ thực hiện tự kiểm tra tự động. Trong khi tự kiểm tra đang chạy, hãy đưa miếng điện cực CPR Uni-padz vào mặt sau của AED sao cho nhãn trên gói quay về phía bạn.

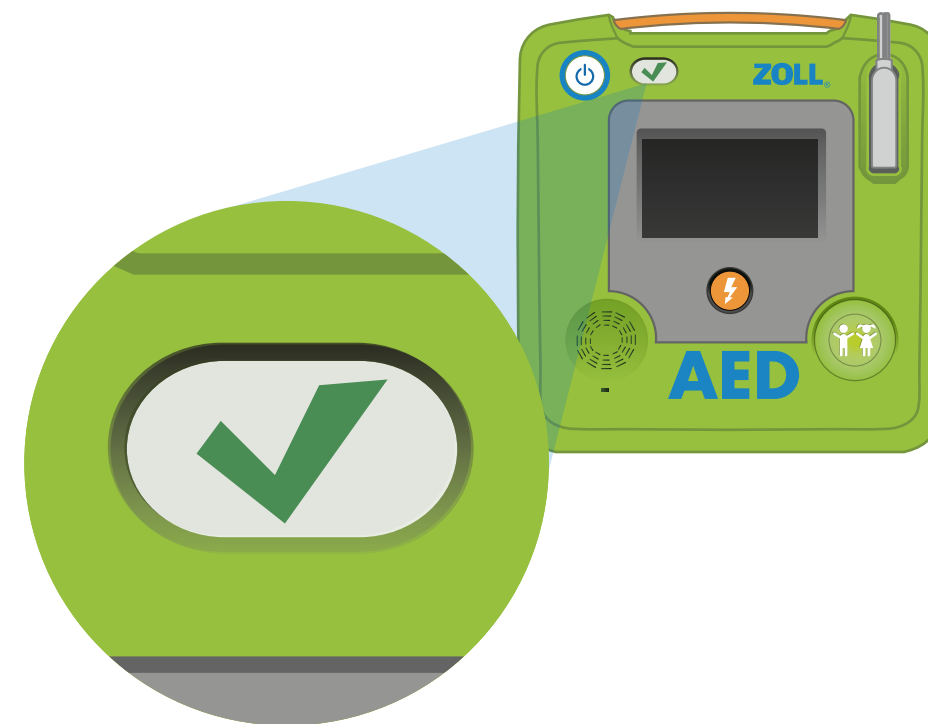

Sau khi hoàn thành tự kiểm tra AED 3, hãy xác nhận rằng máy đã đạt bằng cách lắng nghe lời nhắc thoại "Thiết bị đạt" hoặc tìm biểu tượng dấu kiểm màu lục xuất hiện trong cửa sổ chỉ báo trạng thái. AED 3 của bạn hiện đã sẵn sàng sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo hướng dẫn dành cho người vận hành có trong thư mục tài liệu.

Câu hỏi:

Liên hệ với bộ phận dịch vụ kỹ thuật của ZOLL hoặc đại diện được ủy quyền của ZOLL tại địa phương của bạn

Dịch vụ kỹ thuật của ZOLL:

Điện thoại: +1-978-421-9655

Email: tservice_master@zoll.com