

ZOLL AED 3®

Rýchla referenčná príručka



ZOLL®

Vitajte

Ďakujeme vám za výber prístroja ZOLL AED 3® za váš automatizovaný externý defibrilátor, v súčasnosti najpokročilejší AED na svete. Podľa týchto jednoduchých pokynov nastavíte svoj prístroj AED 3 za pár minút. Po dokončení nastavenia si zaznamenajte svoje sériové číslo a prihláste sa na webovú stránku www.zollaed3.com, kde zaregistrujete svoj prístroj AED 3 ohľadom predĺženej záruky.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, kontaktujte, prosím, spoločnosť ZOLL na telefónnom čísle +1-978-421-9655 alebo nám napíšte email na adresu tservice_master@zoll.com. Tiež môžete kontaktovať autorizovaného distribútora, od ktorého ste zakúpili váš prístroj AED 3.

Obsah

Zložka s dokumentáciou:

- Rýchla referenčná príručka
- Aktivačný certifikát PlusTrac™
- Záchranárska referenčná príručka/plagát k prístroju ZOLL AED 3
- Príručka pre obsluhu prístroja ZOLL AED 3

V škatuli:

- Prístroj ZOLL AED 3
- Zložka s dokumentáciou
- Elektródy na CPR Uni-padz™
- Batéria prístroja ZOLL AED 3


Kompletná registrácia AED

Prihláste sa na webovej stránke: www.zollaed3.com za účelom:


- registrácie vašej 2-ročnej predĺženej záruky zdarma,
- založenia účtu PlusTrac pomocou vášho aktivačného certifikátu PlusTrac*, ktorý vás oprávňuje k prvému roku funkcie PlusTrac zdarma,
 - sledovania pripravenosti vášho prístroja AED 3,
 - sledovania stavu školenia vašich podriadených,
 - online správy vašich programov AED,
 - získavania elektronických pripomienok a výstražných oznámení,
 - umožnenia vášmu prístroju AED 3 pravidelne hlásiť výsledky samotestovania do funkcie PlusTrac cez vašu lokálnu sieť wifi,
- získavania informácií o nastavení vášho online účtu ZOLL pre nahrávanie a správu údajov o klinických udalostiach v aplikácii ZOLL Case Review™

*aktivačný certifikát sa nachádza v zložke s dokumentáciou


Nastavenie prístroja ZOLL AED 3

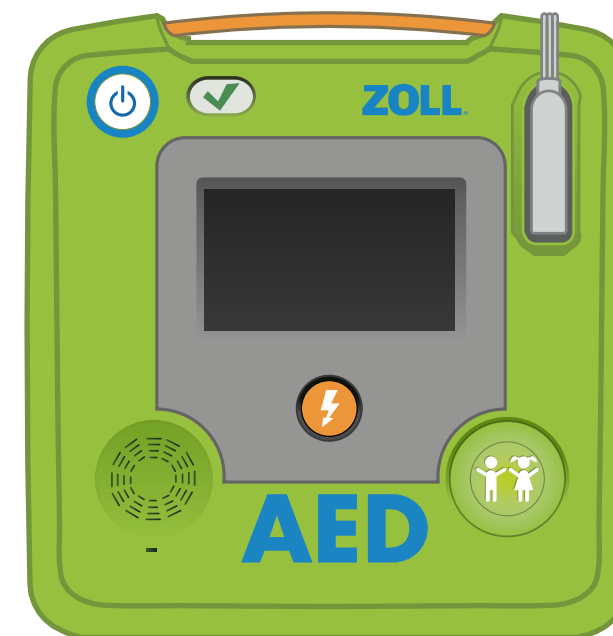


Vyberte celý obsah z prepravnej nádoby.

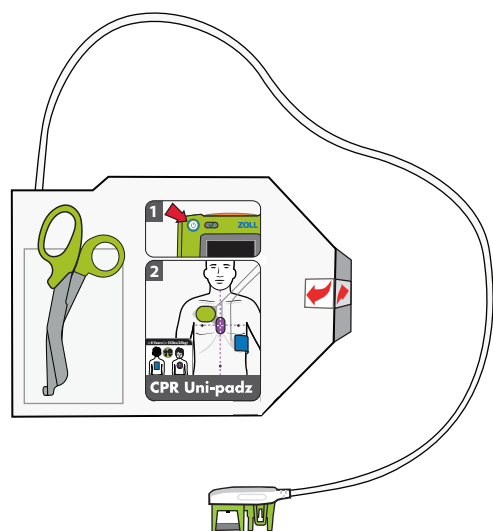


Vyberte elektródy na CPR Uni-padz z ich ochrannej škatule.

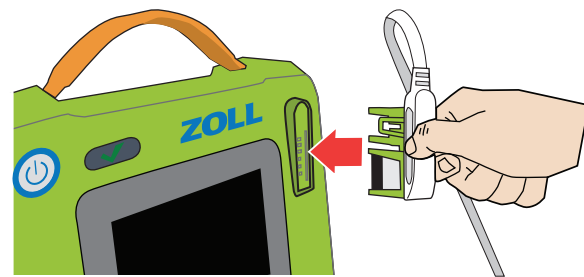


Zapojte kábel elektród na CPR Uni-padz do portu pre elektródy prístroja AED 3.

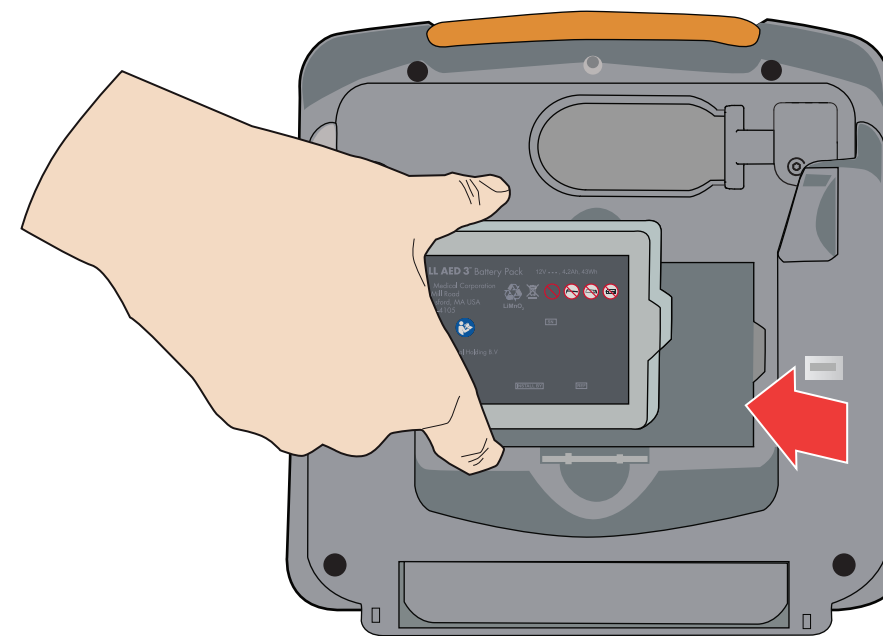

Vyberte batériu prístroja AED 3 z prepravnej nádoby. Podržte batériu za bočné ušká tak, aby štítok smeroval von. Batériu vložte do zadnej strany prístroja na AED tak, aby zacvakla na mieste. Zarovnajte drážku na konci batérie so zodpovedajúcim tvarom v priehradke na batériu.

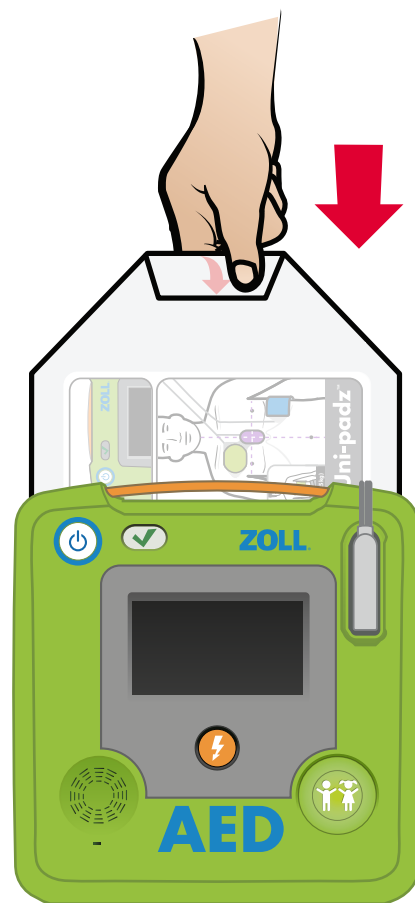

Prístroj ZOLL AED 3 vykoná automatické samotestovanie. Počas priebehu samotestovania vložte elektródy na CPR Uni-padz do zadnej strany AED tak, aby štítok na balení smeroval k vám.

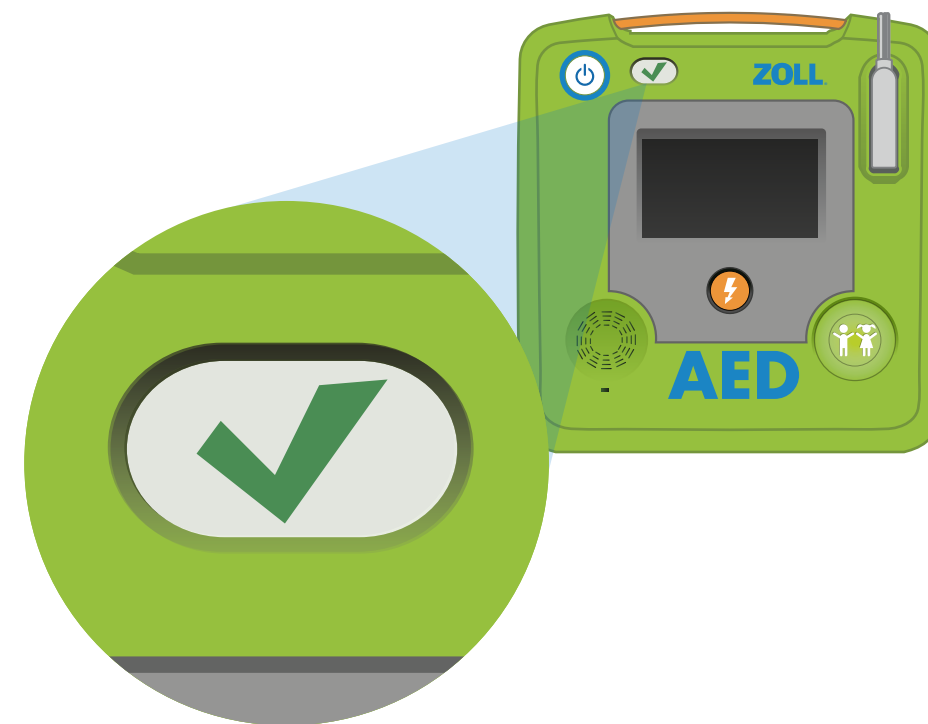

Po dokončení samotestovania prístroja AED 3 potvrdíte, že bol úspešný, počúvaním zvukovej výzvy "JEDNOTKA V PORIADKU" alebo vyhľadáním zeleného kontrolného symbolu v okne stavového indikátora. Váš prístroj AED 3 je teraz pripravený na použitie. Ak máte akékoľvek otázky, pozrite si príručku pre obsluhu v zložke s dokumentáciou.

Otázky:

Kontaktujte technickú podporu spoločnosti ZOLL alebo miestneho autorizovaného zástupcu spoločnosti ZOLL.

Technický servis spoločnosti ZOLL:

Telefónne číslo: +1-978-421-9655

Email: tservice_master@zoll.com