

ZOLL AED 3™

Guide de démarrage rapide



ZOLL®

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi ZOLL AED 3™ comme défibrillateur externe entièrement automatique, le DA le plus sophistiqué du monde à ce jour. Respectez ces instructions simples pour configurer votre AED 3 en quelques minutes seulement. Une fois la configuration terminée, notez votre numéro de série et connectez-vous à www.zollaed3.com afin d'enregistrer votre AED 3 pour une garantie étendue.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, contactez ZOLL au +1-978-421-9655, envoyez-nous un e-mail à l'adresse tservice_master@zoll.com ou contactez le distributeur autorisé auprès duquel vous avez acheté votre AED 3.

Contenu

Dossier de documentation :

- Guide de démarrage rapide
- Certificat d'activation PlusTrac™
- Affiche/guide de référence de réanimation ZOLL AED 3
- Manuel de l'opérateur ZOLL AED 3

Dans le carton :

- ZOLL AED 3
- Dossier de documentation
- CPR Uni-padz™
- Pile de ZOLL AED 3


Enregistrement complet du DA

Connectez-vous à : www.zollaed3.com à :


- Enregistrez-vous pour obtenir gratuitement une garantie étendue de 2 ans
- Configurez votre compte PlusTrac à l'aide de votre certificat d'activation PlusTrac, *qui vous donne droit à une année de service PlusTrac gratuit.
 - Vérifiez l'état de fonctionnement de votre AED 3
 - Vérifiez la formation de vos secouristes
 - Gérez votre programme de DA en ligne
 - Recevez des notifications de rappels et d'alertes par e-mail
 - Autorisez votre AED 3 à rapporter régulièrement les résultats des auto-tests à PlusTrac via votre réseau Wi-Fi local
- Recevez des informations sur la configuration de votre compte en ligne ZOLL pour le téléchargement et la gestion de données d'événements cliniques dans ZOLL Case Review™

*certificat d'activation inclus dans le dossier de documentation


Configuration de votre ZOLL AED 3

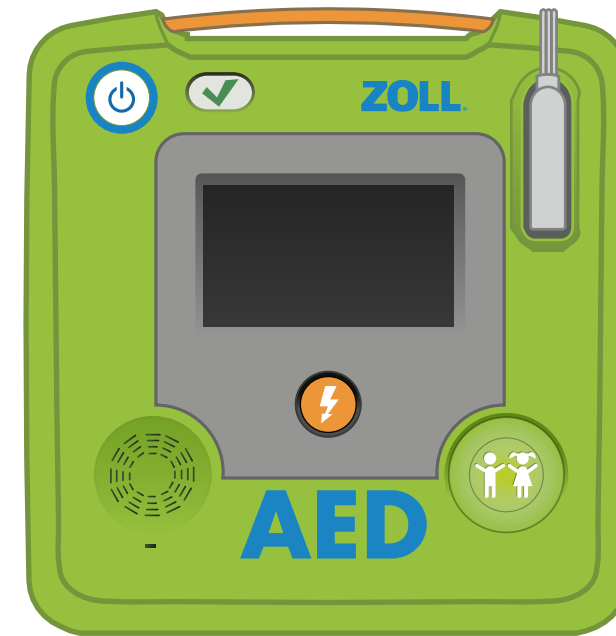


Retirez tout le contenu du conteneur d'expédition.

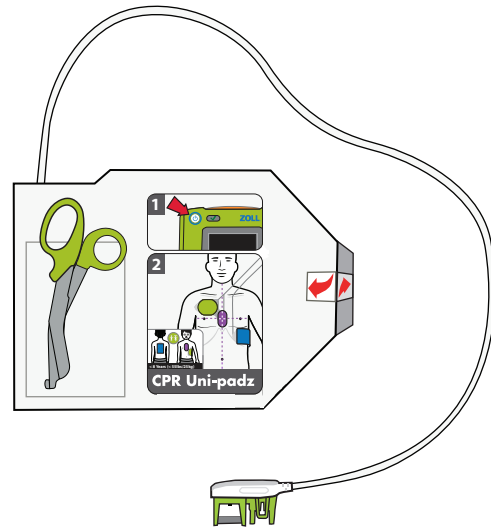


Retirez les CPR Uni-padz de leur carton protecteur.

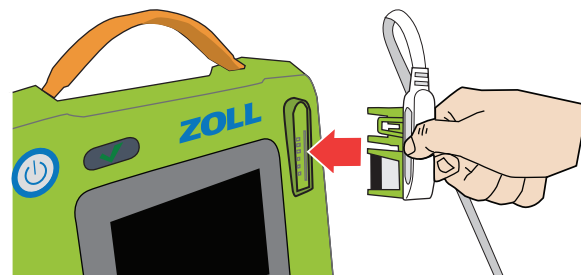


Branchez le connecteur du câble CPR Uni-padz sur le port d'électrode AED 3.

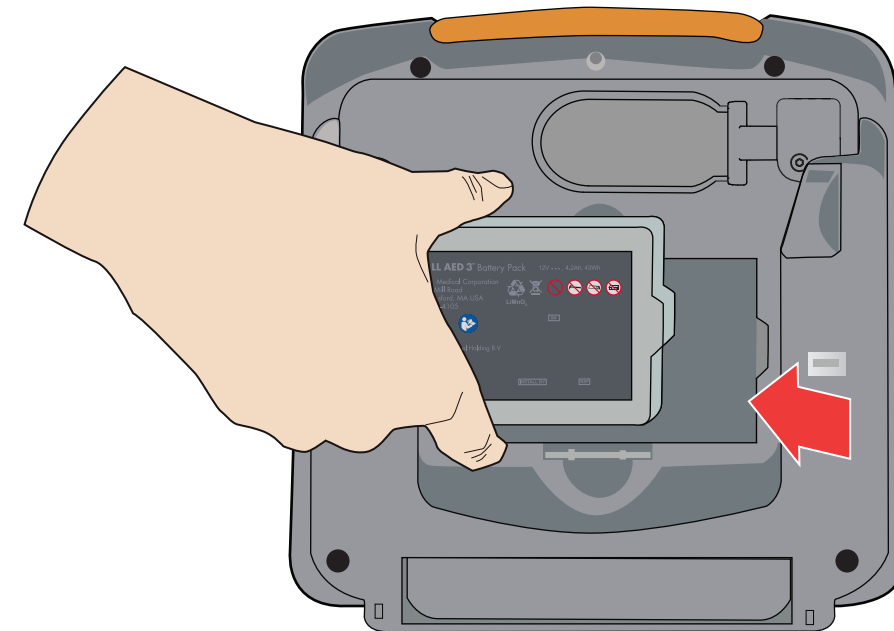

Retirez la pile AED 3 du conteneur de transport. Maintenez la pile par les languettes latérales avec l'étiquette dirigée vers l'avant. Insérez la pile à l'arrière du DA jusqu'à ce qu'elle se mette en place en alignant l'onglet situé à l'extrémité de la pile avec l'encoche correspondante dans le compartiment de pile.

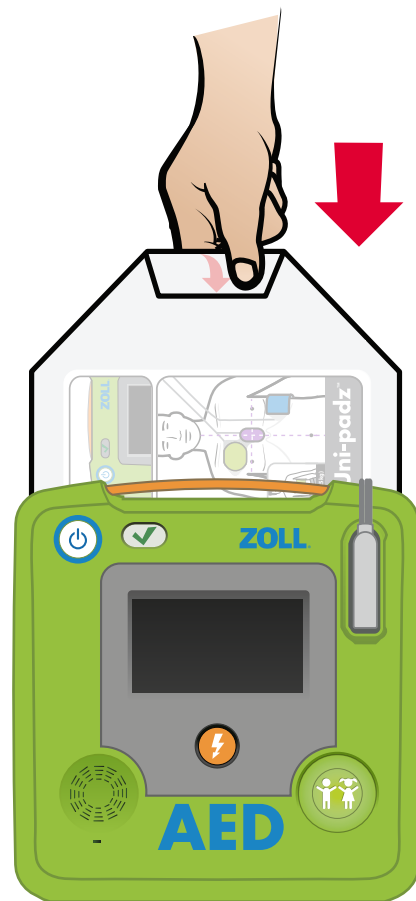

Le ZOLL AED 3 effectuera un auto-test automatique. Pendant que l'auto-test est en cours, insérez les CPR Uni-padz à l'arrière du DA de manière à ce que l'étiquette de l'emballage soit dirigée vers vous.

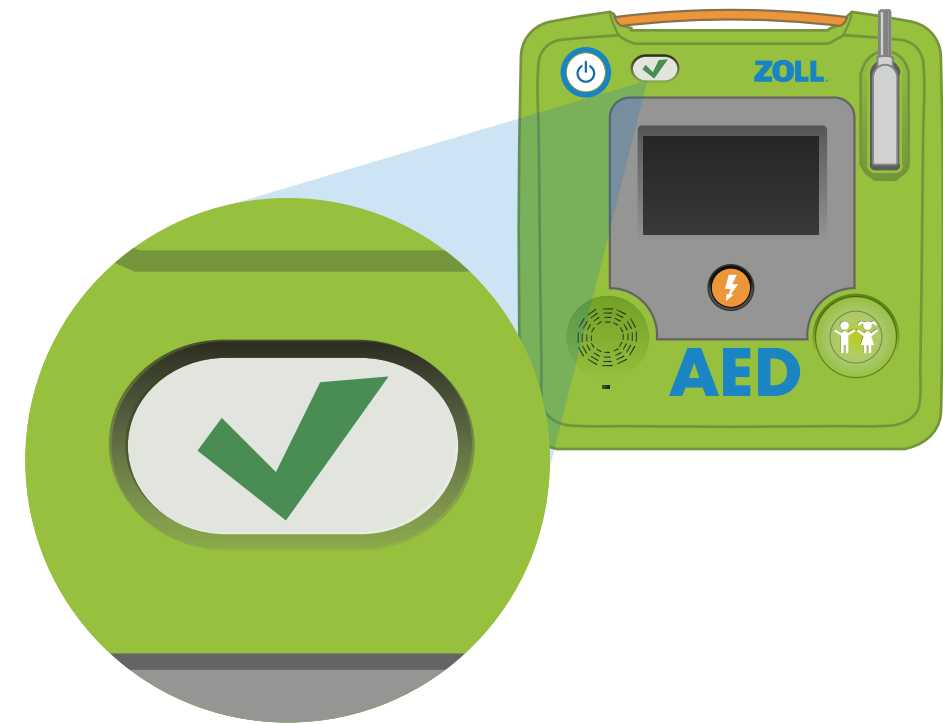

Au terme de l'auto-test de l'AED 3, vérifiez la réussite du test en écoutant le message sonore "Appareil prêt" ou en identifiant l'icône de coche verte dans la fenêtre d'indicateur d'état. Votre AED 3 est prêt à l'utilisation. Si vous avez des questions, consultez le manuel utilisateur inclus dans le dossier de documentation.

Questions:

Contactez le service technique de ZOLL
ou votre représentant local ZOLL agréé

Service technique de ZOLL :

Téléphone: +1-978-421-9655

Email: tservice_master@zoll.com