

Inserto della Guida per l'amministratore ZOLL® AED Plus®



Importante: questo simbolo indica che l'unità AED Plus è destinata al trattamento sia di pazienti adulti che pediatrici. L'assenza di questo simbolo indica che l'unità AED Plus non è destinata al trattamento di pazienti pediatrici e NON è operativa con gli elettrodi bambino Pedi-padz® II. Per l'uso dell'unità AED Plus con gli elettrodi bambino ZOLL pedi•padz II, contattare ZOLL Medical Corporation o il distributore autorizzato ZOLL per informazioni sul Kit di aggiornamento pediatrico di ZOLL AED Plus.

Se un'unità AED Plus è destinata al trattamento di pazienti adulti e pediatrici, quando si collega il cavo per gli elettrodi adulto, l'unità AED Plus attiva automaticamente la modalità adulto per il controllo del ritmo cardiaco e la selezione automatica dell'energia dello shock (120 Joule, 150 Joule, 200 Joule), visualizza il prompt grafico *MFE AD* ed emette tre bip sonori. Quando si collega il cavo per gli elettrodi bambino ZOLL Pedi-padz II, l'unità AED Plus attiva automaticamente la modalità pediatrica per il controllo del ritmo cardiaco e la selezione automatica dell'energia dello shock (50 Joule, 70 Joule, 85 Joule), visualizza il prompt grafico *MFE PED* ed emette tre bip sonori.

Applicazione degli elettrodi Pedi-padz II (neonato/bambino)


Prima di fissare gli elettrodi Pedi-padz II, preparare il paziente.

Per preparare il paziente:

1. Togliere tutti gli indumenti che coprono il torace.
2. Verificare che il torace sia asciutto.

Per applicare gli elettrodi Pedi-padz II:

1. Aprire la scatola e la confezione interna per estrarre gli elettrodi. Orientarli come indicato nel disegno riportato sulla confezione.
2. Estrarre l'elettrodo rotondo dal materiale protettivo, e applicarlo sul petto del paziente (nel modo illustrato sulla confezione dell'elettrodo).
3. Posizionare la mano sul bordo dell'elettrodo e, con l'altra mano, stenderlo delicatamente sul petto del paziente, spingendo fuori l'aria man mano che si procede con l'applicazione.
4. Sistemare il paziente in posizione prona, estrarre l'elettrodo quadrato dal materiale protettivo, e posizionarlo sul dorso del paziente (nel modo illustrato sulla confezione dell'elettrodo).
5. Posizionare la mano sul bordo dell'elettrodo e, con l'altra mano, stenderlo delicatamente sulla pelle del paziente, spingendo fuori l'aria man mano che si procede con l'applicazione.
6. Sistemare il paziente in posizione supina e seguire i prompt di ZOLL AED Plus.

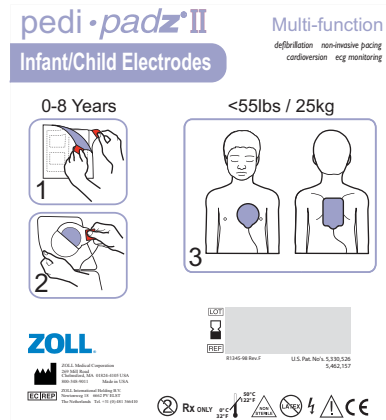

NOTA BENE Gli elettrodi Pedi-padz II (neonato/bambino) possono essere utilizzati anche con i pacemaker ZOLL per fino ad un'ora di stimolazione cardiaca (fare riferimento alla *Guida dell'operatore M Series* per informazioni sulla stimolazione cardiaca).

Indicazioni per l'uso

Usare ZOLL AED Plus se una sospetta vittima di un arresto cardiaco presenta un'evidente ARRESTO DELLA CIRCOLAZIONE indicato da:

- perdita della coscienza
- assenza di respirazione normale; e
- assenza di polso o di segni di circolazione.

Quando il paziente ha un'età inferiore a 8 anni o un peso inferiore a 25 kg, usare l'unità ZOLL AED Plus con gli elettrodi bambino ZOLL AED Plus. Non ritardare la terapia per determinare esattamente l'età o il peso del paziente.