

**ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
(huvudkontor)**
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-348-9011
www.zoll.com

**ZOLL:s dotterbolag med
direktförsäljning**
Australien, +61 2 8424 8700
www.zoll.com.au
Frankrike, +33 (1) 30 57 70 40
www.zoll.fr
Kanada, 905-629-5005
www.zoll.com
Kina, +86 21 6226 9505
www.zoll.com

Mellanöstern och Afrika,
+96 278 800 4411
www.zoll.com
Nederländerna, +31 (0) 488 41 11 83
www.zoll.nl
Österrike, +43 650 413 6222
www.zollmedical.at
Ryssland, +7495 936 2338
www.zoll.com

Storbritannien, +44 (0) 1928 595 160
www.zoll.com
Tyskland, +49 2236 87 87 0
www.zollmedical.de

För adresser och faxnummer till
dotterbolagen, samt andra globala
lägen, gå till www.zoll.com/contacts.

ZOLL rätlinjig bifasisk vågform: verklig prestanda

ZOLL Rectilinear Biphasic™ vågform (RBW) har utformats särskilt för extern defibrillering för att kontrollera variationer i patientimpedans. Endast ZOLL RBW har statistiskt visat klinisk överlägsenhet¹ framför monofasiska vågformer i användargranskade randomiserade kontrollerade prövningar. Och nu, med data från mer än 11 500 patienter som stöder detta, kan du känna dig säker på RBW:s förmåga.

RescueNet Ready

Överför enkelt data från E Series och AED Pro till ZOLL:s rad av RescueNet-alternativ för insamling av fältdata. Leta efter RescueNet-loggan nyckeln till plug and play – snabbkopplingskompatibilitet – på alla ZOLL defibrillatorer och datainsamlingsprodukter.



ZOLL är pionjär inom återupplivningslösningar och utmärker sig genom att ha varit konsekventa vad gäller hantering, ägandeskap och tillvägagångssätt i nästan 30 år. ZOLL är ett ekonomiskt starkt, oberoende företag som har ett avundsvärt anseende vad gäller produktkvalitet och tillförlitlighet. Bland ZOLL:s metoder för att bringa framsteg inom återupplivningsmetoder ingår pacing, defibrillation, cirkulation, ventilation, datahantering och återupplivning genom vätsketillförsel. Dessa omfattande metoder hjälper kliniker, akutsjukvårdare och lekmän att återuppliva individer vid hjärtstopp eller trauma. ZOLL:s arbetar hårt för att vara ett pålitligt val för alla som vidtar åtgärder inom återupplivningsområdet.

ZOLL
Advancing Resuscitation. Today.®

Problemfri produktkompatibilitet

AEDPRO

E Series och AED Pro delar bekvämt elektroder, batterier och data, vilket ger systemövergripande kompatibilitet.

- Praktiskt taget oförstörbar motståndskraftig mot damm och direkt högttrycksvattenspray (IP55-klassificerad)
- LCD-skärm med hög upplösning och övervakningskompatibilitet med EKG-elektroder
- Tre modeller: halvautomatisk, halvautomatisk med manuell förbikoppling och helt manuell
- **CPR-D•padz** i ett stycke eller **CPR-stat•padz** i två delar ger omedelbar återkoppling om bröstkompressionernas frekvens och djup
- Data lagras genom USB-minnesteknik
- Överträffad batterikompatibilitet från engångsbatterier till uppladdningsbara
- See-Thru CPR gör att du kan se organiserade rytmer utan att avbryta kompressionerna



Guidelines 2005
Ready

CE

¹För defibrillering av kammarflimmer. "...data visar även den överlägsna effekten av rätlinjiga bifasiska chocker med låg energi för patienter med hög transtorakal impedans på 90 %* konfidensnivå." *Kerber et al. AHA Scientific Statement, Circulation. 1997;95:1677-82. För elkonvertering av förmaksflimmer: "...data visar den överlägsna effekten av rätlinjiga bifasiska chocker med låg energi jämfört med monofasiska chocker med hög energi för transtorakal elkonvertering av förmaksflimmer." ©2007 ZOLL Medical Corporation. Med ensamrätt. "Advancing Resuscitation. Today.", Protocol Assist CodeMarkers, Real CPR Help, RescueNet, See-Thru CPR, SurePower, Tri-Mode Display och ZOLL Rectilinear Biphasic är varumärken som tillhör ZOLL Medical Corporation. AED Pro, CPR-D•padz, E Series, M Series, stat•padz och ZOLL är registrerade varumärken som tillhör ZOLL Medical Corporation. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Tryckt i USA 080802
9656-0197-22

E
SERIES

real CPR help

Smart och tuff på gatan.



ZOLL
Advancing Resuscitation. Today.®

Precis vad du sa att du behöver. En tuff defibrillator för ALS (Advanced Life Support) med avancerade möjligheter.

Det är på tiden att du har utrustning som är utformad för piskande regn, brännande hetta och isande kyla. För fall och stötar, skvätt och stänk. För smuts och lera. För användning i snabba fordon som väjer för trafik på gator i full rörelse. ZOLL® har byggt en radikalt ny defibrillator, med dig och din värld i åtanke. E Series®. För i ditt arbete har du redan tillräckligt mycket att oroa dig för. Och du ska inte behöva oroa dig över din utrustning. Någonsin.



Se skärmen i alla miljöer

Lättläslig Tri-Mode Display™ kan justeras på vägen från färg till svart på vitt eller vitt på svart och säkerställer att du aldrig missar viktig information för patientbedömning.



GPS-klocka synkroniserar tiden över hela systemet

Global Positioning System (GPS)-klocka synkar automatiskt när defibrillatoren sätts på och kan ta emot signaler från en satellit.

Mjuk bärväska som tillval



Förstärkt väska som tillval ger ökat skydd mot ambulanssjukvårdens risker.



Liten, kompakt, och lätt design i portföljstil.


realCPRhelp®

Bröstkompressionernas frekvens och djup mäts i realtid och både visuell och audiell återkoppling ges. All HLR-data kan registreras och granskas med RescueNet™ programvara.



see-thruCPR®

EKG-filtrering tar bort HLR-artefakter från EKG:t så att du kan se organiserade rytmer utan avbrott för kompressioner.

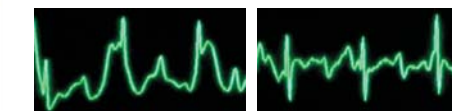

Ofiltrerat

Filtrerat

Elektrod i ett stycke eller två delar. Det är ditt val.

Välj CPR-D•padz® i ett stycke eller CPR stat•padz® i två delar.

Snabb, precis placering och HLR-återkoppling utan extra steg eller sensorer.



Bäst i sitt slag

Masimo® pulsoximetri ger korrekta SpO₂-mätningar vid låg perfusion och kraftig rörelse när du behöver det som mest. GE® 12SL 12-avlednings-EKG tolkning och kommunikation ger fler diagnostiska möjligheter. Respirationics® "plug and play" — snabbinkoppling — main- eller sidestream EtCO₂ och SunTech® icke-invasiv blodtrycksmätning ger noggrannhet och tillförlitlighet vid övervakning under återupplivning.

Rätt batteri. Rätt plats. Rätt tid.

Två val för att täcka alla behov:

1. Tätade blybatterier för standardisering mellan ZOLL M Series®, E Series®, och AED Pro®.
2. Laddningsbara SurePower™ litiumjonbatterier för ökad kapacitet och längre drifttid.

Fler alternativ betyder bättre anpassning till ditt system.

Dokumentation på enkelt vis

E Series erbjuder konfigurerbara Protocol Assist CodeMarkers™ för snabb dokumentation av händelser. Särskilda datainmatningstangenter gör det enkelt för användaren att ange patientnamn och annan viktig information. Ägna mer tid åt att arbeta med patienten och mindre tid åt att dokumentera ingripanden korrekt. Bluetooth®-tillvalet gör trådlös dataöverföring och 12-avledningsöverföring möjlig. Dessutom är E Series fullt kompatibel med ZOLL:s RescueNet datahanteringssystem.

