

ZOLL AED 3[®] Trainer

AED-trainer en aanvullende producten



Volledige simulatie van het werken met een ZOLL AED 3 met real-time reanimatiefeedback via Real CPR Help

De ZOLL AED 3[®] trainer is de enige trainings-AED (automatische externe defibrillator) met Real CPR Help[®], voor real-time feedback over de kwaliteit van de borstcompressies die bij het oefenen worden gegeven. Met de AED 3 Trainer kunnen cursisten tijdens een training of cursus het juiste tempo en de juiste diepte van de borstcompressies aanleren.

De ZOLL AED 3 Trainer bootst de werking van de klinische AED precies na, waardoor cursisten zo realistisch mogelijk een reanimatie kunnen oefenen. De ZOLL AED 3 Trainer is uitgerust met:

- Een lcd-kleurenscherm met beelden die identiek zijn aan die van een ZOLL AED 3 voor klinisch gebruik
- Contactsensoren in trainingselektroden die detecteren dat de elektroden contact maken met de oefenpop, zodat er geen afstandsbediening nodig is bij de simulatie
- Een pauzeknop op het apparaat waarmee de instructeur een oefenscenario kan pauzeren
- Verbruiksartikelen met een lange levensduur, wat tijd en geld bespaart
- Eenvoudig updaten van de software/instellen van de taal via USB

Voldoet aan de AHA- en ERC-richtlijnen uit 2015

Eenvoudig in te stellen: Alle instellingen en keuzes wat betreft het oefenscenario worden op het apparaat zelf ingesteld. Opties die ingesteld kunnen worden zijn:

- Oefenscenario
- Gebruiksmodus (halfautomatisch of volautomatisch)
- Aanwijzingen voor niet-professionele hulpverleners
- Aanwijzingen voor het controleren van de ademhaling
- Volume van gesproken aanwijzingen
- Taal (is afhankelijk van het bestelde artikelnummer)

De ZOLL AED 3 trainer bevat alles wat nodig is voor instructie:

- ZOLL AED 3 Trainer
- Trainingskabel voor de CPR Uni-padz[®]-elektroden van de ZOLL AED 3 Trainer (voor ten minste 100 oefensessies)
- Gels/afdekfolie voor de Uni-padz-elektroden van de ZOLL AED 3 Trainer (voor ten minste 50 oefensessies)
- Vier (4) D-cel-batterijen
- Gebruikershandleiding


ZOLL[®]



Real-time feedback over de reanimatie, met een grote indicator voor de compressiediepte in 2 kleuren



Gebruiksmodus en trainingsscenario's rechtstreeks op het apparaat in te stellen

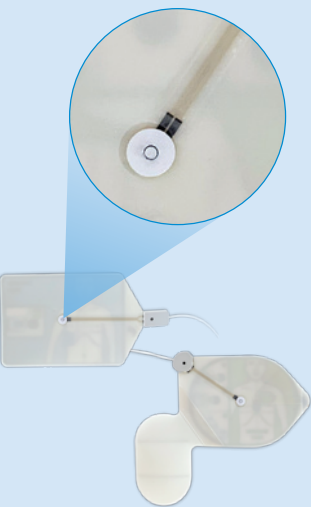

Sensoren in de elektroden detecteren dat deze contact maken met de oefenpop, zodat er geen afzonderlijke afstandsbediening nodig is

Specificaties van de ZOLL AED 3 Trainer

Afmeting: (D x B x H) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm

Gewicht: 1,8 kg inclusief batterij

Voeding: Vier (4) D-cel-batterijen (inbegrepen) voor de ZOLL AED 3 Trainer (voldoende voor meer dan 16 uur gebruik)


Trainingsscenario's

De instructeur kan met behulp van softkeys verschillende trainingsscenario's rechtstreeks op de ZOLL AED 3 Trainer instellen.



Aanvullende producten bij de ZOLL AED 3 Trainer

Vervangende artikelen moeten afzonderlijk worden besteld.

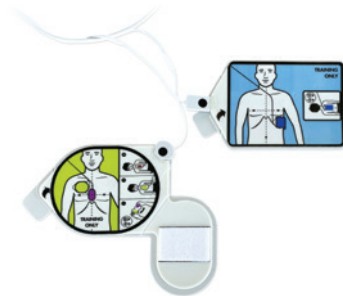

Reserveverpakkingen voor de trainingsuitvoering van de CPR Uni-padz®-elektroden
Onderdeelnr. 8028-000012 (doos van 5 stuks)



Reservefolie voor de trainings-Uni-padz
Onderdeelnr. 8028-000013



Oefenpop
Onderdeelnr. 8000-0835-01



Kit voor USB software-upgrade
Onderdeelnr. 8028-000011-XX



Trainingskabel voor de CPR Uni-padz
Onderdeelnr. 8028-000010

Wereldwijd hoofdkantoor ZOLL Medical Corporation

269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824, VS
+1-978-421-9655
+1-800-804-4356

Ga voor adressen en faxnummers van dochterondernemingen en andere wereldwijde locaties naar www.zoll.com/contacts.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Alle rechten voorbehouden. Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL en ZOLL AED 3 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ZOLL Medical Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de betreffende merkhouders. De ZOLL AED 3-defibrillator wordt niet verkocht in de Verenigde Staten.

Gedrukt in de VS. MCN PP 1902 0365-16

ZOLL®