

ZOLL AED 3® Trainer

เครื่องฝึกการใช้งาน AED และอุปกรณ์เสริม



จำลองเหตุการณ์การใช้งาน ZOLL AED 3 โดยสมบูรณ์แบบ ด้วยฟังก์ชัน Real CPR Help ที่แสดงผลการทำ CPR แบบเรียลไทม์

อุปกรณ์ ZOLL AED 3® Trainer เป็นโซลูชันการฝึกปฏิบัติการกับเครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกอัตโนมัติ (AED) เพียงชนิดเดียวที่ให้ Real CPR Help® หรือผลตอบแทนของคุณภาพการกดหน้าอกของผู้เข้าอบรมแบบเรียลไทม์ อุปกรณ์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้อัตราเร็วและความลึกที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมกดหน้าอกของการทำ CPR

อุปกรณ์ ZOLL AED 3 Trainer ได้รับการออกแบบมาเพื่อเลียนแบบการทำงานของเครื่อง AED ทางคลินิกให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์การช่วยเหลือได้สมจริงยิ่งขึ้น อุปกรณ์ ZOLL AED 3 Trainer ประกอบด้วย:

- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมภาพประกอบการช่วยเหลือแบบสี ที่แสดงสิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นบนหน้าจออุปกรณ์ ZOLL AED 3
- เซ็นเซอร์สัมผัสในแผ่นฝึกปฏิบัติจะตรวจจับสัมผัสกับหุ่นได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทควบคุมเพื่อช่วยในสถานการณ์จำลองการช่วยเหลือ
- ปุ่มหยุดชั่วคราวบนอุปกรณ์ที่ให้ผู้ฝึกสอนสามารถหยุดการฝึกปฏิบัติไว้ชั่วคราว
- วัสดุสามารถใช้ได้ในระยะยาว ช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงิน
- อัปเดตซอฟต์แวร์/การกำหนดค่าของภาษาได้ง่าย ๆ ด้วย USB

พร้อมด้วยแนวทางปฏิบัติ AHA และ ERC ปี 2015

ตั้งค่าได้ง่าย ๆ: ผู้ฝึกสอนสามารถกำหนดค่าและการจัดการสถานการณ์จำลองการฝึกปฏิบัติได้ทั้งหมด ตัวเลือกที่สามารถกำหนดได้ ได้แก่:

- สถานการณ์การฝึกอบรม
- โหมดการทำงาน (แบบกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติ)
- ข้อความแจ้งเตือนจากหน่วยกู้ภัย
- การแจ้งเตือนผลการตรวจสอบการหายใจ
- ระดับเสียงเสียงเตือน
- ภาษา (แตกต่างกันไปตามหมายเลขชิ้นส่วนที่ส่ง)


อุปกรณ์ ZOLL AED 3 Trainer รวมทุกอย่างที่ผู้ฝึกสอนต้องการ:

- อุปกรณ์ ZOLL AED 3 Trainer
- ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz® ชุดสายรัดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฝึกปฏิบัติ (สามารถใช้ฝึกได้ขั้นต่ำ 100 ครั้ง)
- อิเล็กโทรดเจล/แผ่นรองชั้นในสำหรับ ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz (สามารถใช้ฝึกได้ขั้นต่ำ 50 ครั้ง)
- แบตเตอรี่สี่ (4) ก้อน ขนาด D
- คู่มือการใช้งาน


ZOLL®



ผลตอบกลับ CPR แบบเรียลไทม์พร้อมตัวบ่งชี้ 2 สีขนาดใหญ่ของความลึกของการกด

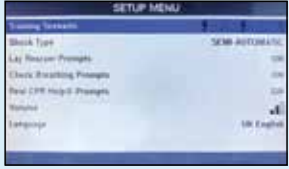

สามารถกำหนดค่าการทำงานของอุปกรณ์และสถานะการช่วยเหลือบนอุปกรณ์ได้โดยตรง

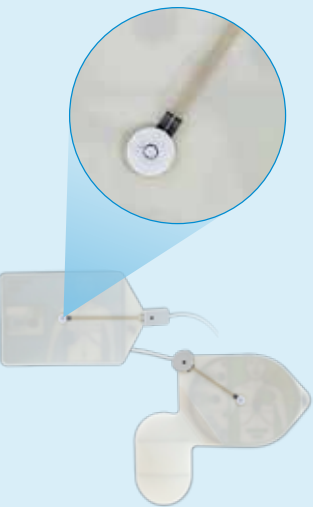

เซ็นเซอร์ที่แผ่นจะตรวจจับการสัมผัสกับหุ่นโดยไม่ต้องใช้มือแยกต่างหาก

ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ ZOLL AED 3 Trainer

ขนาด: (ลึก x กว้าง x สูง) 5.0 นิ้ว x 9.3 นิ้ว x 9.7 นิ้ว (12.7 ซม. x 23.6 ซม. x 24.7 ซม.)

น้ำหนัก: 3 ปอนด์ 15 ออนซ์ (1.8 กิโลกรัม) พร้อมแบตเตอรี่

กำลังไฟ: ขนาด D จำนวนสี่ (4) ก้อน (รวมอยู่แล้ว) สำหรับการฝึกปฏิบัติ AED (เหมาะสำหรับการฝึกอบรมมากกว่า 16 ชั่วโมง)

เหตุการณ์จำลองการกู้ชีพ

ผู้ฝึกสอนสามารถตั้งสถานการณ์การช่วยเหลือต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ฝึกได้โดยตรงโดยใช้ปุ่มซอฟต์แวร์



อุปกรณ์เสริมของ ZOLL AED 3 Trainer

ชิ้นส่วนทดแทนจะต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก




แผ่นกาวเจลลอิเล็กโทรดเสริมของอุปกรณ์ฝึก CPR Uni-podz® รหัส# 8028-000012 (5 ชิ้น)



ตัวแปรงรองซับในอิเล็กโทรดเสริมของอุปกรณ์ฝึก CPR Uni-podz รหัส# 8028-000013



หุ่นจำลองปฏิบัติ รหัส# 8000-0835-01

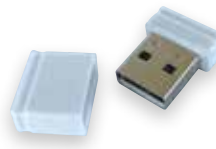

USB สำหรับอัปเดตซอฟต์แวร์ รหัส# 8028-000011-XX



ชุดสายอิเล็กโทรดสำหรับฝึกปฏิบัติ CPR Uni-podz รหัส# 8028-000010

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-804-4356

สำหรับที่อยู่บริษัทในเครือและหมายเลขแฟกซ์ รวมถึงที่อยู่อื่น ๆ ทั่วโลก โปรดไปที่ www.zoll.com/contacts

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

©2019 ZOLL Medical Corporation สงวนลิขสิทธิ์ Real CPR Help, Uni-podz, ZOLL, และ ZOLL AED 3 เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ZOLL Medical Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เครื่องมือหรือ ZOLL AED 3 ยังไม่พร้อมจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา

พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา MCN PP 1902 0365-33

ZOLL