

ZOLL AED 3® Trainer

DEA para la Formación y Accesorios



Simulación completa del ZOLL AED 3 con la tecnología Real CPR Help e información sobre la RCP en tiempo real

ZOLL AED 3® Trainer es la única solución para la formación sobre el uso de un desfibrilador externo automático (DEA) que cuenta con Real CPR Help®, que ofrece información en tiempo real sobre la calidad de las compresiones torácicas del estudiante. Este equipo de formación permitirá a los estudiantes aprender la frecuencia y profundidad correctas de las compresiones torácicas durante la RCP en un entorno de aprendizaje.

ZOLL AED 3 Trainer ha sido diseñado para reproducir fielmente el funcionamiento del DEA clínico, lo que ofrece a los estudiantes una experiencia de reanimación más realista. ZOLL AED 3 Trainer incluye:

- Una pantalla LCD activa con imágenes de la reanimación a todo color que representan lo que el estudiante vería en un ZOLL AED 3 clínico.
- Sensores en los electrodos de formación que detectan el contacto de los electrodos con el maniquí, lo que evita la necesidad de controles remoto para las simulaciones de situaciones de rescate.
- Un botón en el aparato que permite al formador pausar la simulación de situación de rescate.
- Consumibles duraderos, que ahorran tiempo y dinero.
- Actualizaciones sencillas de software por USB/configuración de idiomas.

Preparado según las directrices del ERC y de la AHA de 2015

Configuración sencilla: Toda la configuración y la gestión de la situación de rescate se lleva a cabo en el dispositivo. Las opciones de configuración incluyen:

- Escenarios de simulación
- Modo de funcionamiento (semiautomático o automático)
- Indicaciones para reanimadores no profesionales
- Indicaciones para comprobar la respiración
- Volumen de las indicaciones por voz
- Idioma (varía según el modelo pedido)

ZOLL AED 3 incluye todo lo que un instructor necesita:

- El dispositivo ZOLL AED 3 Trainer
- Cable de formación para electrodos CPR Uni-padz® de ZOLL AED 3 Trainer (al menos 100 sesiones de formación)
- Gel/revestimiento para los electrodos CPR Uni-padz de formación de ZOLL AED 3 Trainer (al menos 50 sesiones de formación)
- Cuatro (4) baterías de tamaño D
- Guía del operario


ZOLL®



Información sobre RCP en tiempo real con un gran indicador de profundidad en dos colores



Configure el funcionamiento del dispositivo y los escenarios de simulación directamente en el dispositivo.

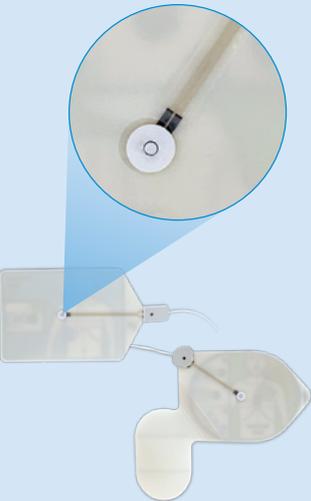

Los sensores de los electrodos detectan el contacto con el maniquí, lo que evita la necesidad de un control remoto.

Especificaciones del ZOLL AED 3 Trainer

Tamaño: (Al. x An. x Prof.) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm

Peso: 1,8 kg con baterías

Alimentación: Cuatro (4) baterías de tamaño D (incluidas) para el DEA de formación (más de 16 horas de formación)


Escenarios de simulación

Los instructores pueden configurar diferentes escenarios de simulación directamente en el aparato usando las teclas programables.



Accesorios del ZOLL AED 3 Trainer

Los repuestos deben pedirse por separado.

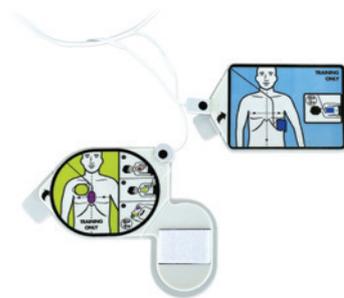

Gel adhesivo de repuesto para los electrodos CPR Uni-padz® de formación
N.º de pieza: 8028-000012
(estuche de 5)



Revestimientos de repuesto para los electrodos CPR Uni-padz de formación
N.º de pieza: 8028-000013



Maniquí de demostración para la formación
N.º de pieza: 8000-0835-01



Kit de actualización del software de formación por USB
N.º de pieza: 8028-000011-XX



Conjunto de cables de formación para los electrodos CPR Uni-padz
Pieza n.º: 8028-000010

ZOLL Medical Corporation
Sede mundial
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-804-4356

Para consultar las direcciones y números de fax de las filiales, así como otras oficinas mundiales, visite www.zoll.com/contacts.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Todos los derechos reservados, Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL y ZOLL AED 3 son marcas comerciales o registradas de ZOLL Medical Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. El desfibrilador ZOLL AED 3 no está disponible para la venta en los Estados Unidos.

Impreso en EE. UU. MCN PP 1902 0365-10

ZOLL®