

RescueNet AmbulancePad Administrations-Tool Benutzerhandbuch

Juni 2017

ZOLL®

© 2017 bei ZOLL. Alle Rechte vorbehalten.

ZOLL und RescueNet sind eine registrierte Handelsmarke der ZOLL Medical Corporation. RescueNet AmbulancePad, M Series, E Series, X Serie, AED Plus und AED Pro sind Handelsmarken der ZOLL Medical Corporation. Andere Produkt- und Firmennamen können Handelsmarken ihrer jeweiligen Besitzer sein.

ZOLL Medical Deutschland GmbH

Emil-Hoffmann-Str.13
50996 Köln

Tel.: + 49 (0) 2236 87 87 - 0

www.zoll.com/de

Inhaltsverzeichnis

Überblick	1
Bevor Sie anfangen	1
Anmelden	1
Dashboard	2
Stammdaten	3
Stammdaten Allgemeine Seiteninformation	3
Aktivität	4
Adressen	4
Verwaltung	5
Allergie	5
NEF Status	5
Anamnese Hauptbeschwerde	6
Ereignisse vor Symptombeginn	6
Anamnese Infektionsliste	7
Anamnese Linderung	7
Anamnese Vorerkrankung	8
Anamnese Provokation	8
Anamnese Region	8
Anamnese Risikofaktoren	9
Anamnese zeitl. Verlauf	9
Anamnese Symptom Qualität	10
Anamnese Symptom Stärke	10
Anamnese Veränderung	10
Anamnese letzte Ausscheidung	11
Anamnese letzte Mahlzeit	11
Applikationsformen	12
Austria Codex (nur österreichische Version)	12
Wachen	13
Abrechnung Sonstige	13

ZOLL Medical Deutschland GmbH

Emil-Hoffmann-Str.13

50996 Köln

Tel.: + 49 (0) 2236 87 87 - 0

www.zoll.com/de



Abrechnungsart	14
Abrechnung Tarif	14
Abrechnung Rettungsmittel	15
Abrechnung Wartezeit	15
Einsatz Priorität	15
Benutzerspezifische Fragen (nur Internationale Version)	16
Benutzerspezifische Antworten (nur Internationale Version)	17
Einsatzart	17
Hauptbeschwerde	18
Code (nur Schweizer Version)	18
Codetyp	19
Cotation Actes (nur französisches Version)	20
Länderliste	20
Beschreibungsdaten	21
Geräte	21
Einsatzbesonderheiten	22
Sonderziele	22
Maßnahmen des Ersthelfers (nur österreichisches Tool)	23
Geschlecht	23
Klinikwahl	24
Klinikstatus	24
ICD-10 (nur österreichisches Tool)	25
Erkrankungen	25
Erkrankungen Gruppen	26
Kostenträger	26
Versicherungsverhältnis	27
Stichworte	27
Lastmens (nur österreichisches Tool)	28
Sonderziele	28
Organisationen (nur Administrator)	29

ZOLL Medical Deutschland GmbH

Emil-Hoffmann-Str.13
50996 Köln
Tel.: + 49 (0) 2236 87 87 - 0
www.zoll.com/de



Medikamentenliste (nur Administrator)	29
Fehleinsatz	30
MRSA	30
Kein Transport	31
Nicht notwendig	31
Andere Dienste (nur Schweizer und französische Version)	32
Vorgefunden (nur österreichische Version)	32
Personal	33
Vorerkrankungen	34
Privatärzte	35
Mitarbeiterfunktion (nur Administrator)	35
Mitarbeiter Herkunft	36
Alarmierung angemessen	36
EKG Telemetrie Gründe	36
EKG Telemetrie Ergebnis	37
Begründung bei Überschreitung - Einsatz angenommen	37
Begründung bei Überschreitung - Fahrtzeit	38
Begründung bei Überschreitung – Zeit am Einsatzort	38
Begründung bei Überschreitung – Fahrtzeit zur Klinik	39
Erstes Rettungsmittel am Einsatzort	39
Funktion Pat. Übergeben an	40
Patient Ausweis Art	40
Rolle	41
Radar Falle	41
Unterstütze Panel	42
Verfügbare Stammdaten	43
Felder abschalten	43
Transportschein Stempel (nur für Deutschland)	46
Einweisender	46
Risikofaktoren	46

ZOLL Medical Deutschland GmbH

Emil-Hoffmann-Str.13
50996 Köln
Tel.: + 49 (0) 2236 87 87 - 0
www.zoll.com/de



Fachgebiete Ärzte	47
Schweizer Medikamente (nur Schweizer Version)	47
Symptom Qualität	48
Symptom-Region	48
Teamliste (nur Schweizer Version)	49
Textblöcke	49
Zeit und Zeitbereiche	50
Transfer (nur französische Version)	50
Transportgrund	51
Transportarten	51
Art des Notfalls	52
Einsatzgründe	52
Einheiten Medikamente	53
Rettungsmittel	53
Fahrzeug Art	54
Fahrzeuge Funkrufnummer	54
Fahrzeuge	55
Gewalt Angreifer	56
Gewalt Art	56
Gewalt Ergebniss	56
Gewalt Betroffener	57
Fahrzeugeinheit (nur österreichische Version)	57
Index	59
Protokollliste	60
Anpassen der Datenspalten in Ihrer Protokollliste	60
Protokoll für Prüfung markieren	61
Protokoll zur Abrechnung freigeben	62
Anzeige von Protokollen nach Jahr und Monat	62
Protokolle suchen	62
Filter anwenden	63

ZOLL Medical Deutschland GmbH

Emil-Hoffmann-Str.13
50996 Köln
Tel.: + 49 (0) 2236 87 87 - 0
www.zoll.com/de



Protokolllisten-Optionen	65
Papierkorb	66
Nachbearbeitung	67
Einstellungen	69
Konto hinzufügen/löschen	69
Konto löschen	73
Statistiken	73
Bericht erstellen	73
Statistikeinstellungen (nur Administrator)	74
Hilfe Bereiche	75
Technischer Support	76
Kontaktinformationen Support	76

Überblick

Das AmbulancePad Administrations-Tool konfiguriert und überwacht die AmbulancePad-Anwendung. Benutzen Sie es, um Ihre AmbulancePad-Auswahllisten zu verwalten, die Nutzung zu überwachen, um Benutzer zu verwalten, um Patientenversorgungsberichte anzusehen und um sich innerhalb der Anwendung schnell zu bewegen.

Dashboard	Stammdaten	Hauptmenü	Protokolle	Einstellungen	Statistiken	Abmelden	Deutsch
Ansicht der aktuell mit dem System verbundenen Clients		Anzeige des angemeldeten Benutzernamens und Möglichkeit Ihr Passwort zu ändern		Benutzer hinzufügen/ändern/löschen und Anmeldeverlauf der Benutzer ansehen			Zwischen Englisch, Französisch, oder Deutsch wechseln
	AmbulancePad-Auswahllisten hinzufügen/ändern/löschen		Anzeige aller erfassten Patientenversorgungsberichte		Eine Reihe von vordefinierten Berichten ausführen		



Anmerkung: Obwohl die Grafik oben alle möglichen Menüpunkte anzeigt, sehen Sie möglicherweise abhängig von Ihren Benutzergenehmigungen eventuell nicht alle.

Bevor Sie anfangen

ZOLL benutzt ausgewählte Browser, um das AmbulancePad Administrations-Tool zu verifizieren. Vor Ausführung des AmbulancePad Administrations-Tool stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen der folgenden Browser benutzen:

- Firefox 41 oder später
- Microsoft Internet Explorer 11
- Opera 32

Anmelden

In Ihrem Netzwerk:

1. Starten Sie das AmbulancePad Administrations-Tool.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.
3. Klicken Sie auf **Angemeldet bleiben**, um das Passwort auf Ihrem Gerät zu speichern.
4. Klicken Sie auf **Anmelden**



Anmerkung: Sie benötigen ein gültiges Benutzerkonto, um sich am System anzumelden. Falls Sie ein erstmaliger Benutzer sind, melden Sie sich mit dem Konto des Systemadministrators an.

Dashboard

Das Dashboard zeigt den Verbindungsstatus von AmbulancePad-Clients an. Das System empfängt die Statusinformationen vom AmbulancePad-Master-Server.

Dashboard				
Host	IP Adresse	Rufnummer	Zuletzt Online	Ambulance Pad Version
DEMO20	217.229.194.49		2016-05-02 16:24:44+02:00	AmbulancePad/1.5.0.13 2016/01/29 07:19:11 UTC
DEMO24	217.229.194.49		2016-05-02 16:30:12+02:00	AmbulancePad/1.5.0.13 2016/01/29 07:19:11 UTC
DEMO18	217.229.194.49		2016-05-02 16:25:09+02:00	AmbulancePad/1.5.0.13 2016/01/29 07:19:11 UTC

Host: Windows-Hostname des Client-PCs

IP Adresse: IP-Adresse des Client-PCs

Rufzeichen: Rufzeichen des Geräts oder die Nummer des Funkempfängers

Zuletzt online: Datum und Uhrzeit der letzten Serververbindung des Clients


AmbulancePad-Version: Auf dem Client-PC installierte Version



Anmerkung: Für einen Zeitraum von 72 Stunden zeigt diese Liste außerdem Clients, die kürzlich vom System abgemeldet wurden.

Stammdaten

Benutzen Sie die Auswahlliste Stammdaten, um die Auswahllisten zu verwalten, die auf den AmbulancePad-Geräten angezeigt werden. Das folgende Diagramm stellt den Informationsfluss dar, wenn Sie eine Auswahlliste ändern.

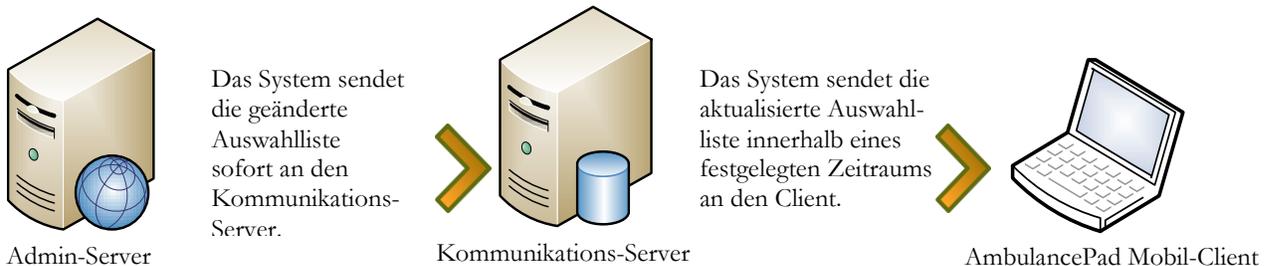

Stammdaten Allgemeine Seiteninformation

Unabhängig davon, welche Stammdaten-Auswahlliste Sie wählen, ist die Funktionalität auf jeder Seite gleich. Sie können zum Beispiel einen Eintrag auf jeder Seite ändern, löschen, kopieren und hinzufügen. Zusätzlich dazu können Sie die Suchmöglichkeit der Seite benutzen, um einfach einen bestimmten Auswahllisteneintrag zu finden.



Standarddaten: Klicken Sie, um verfügbare Listen anzusehen. Die Anzahl und die Art der Auswahllisten, die in der ausklappbaren Liste angezeigt werden, hängt von der benutzten Version von AmbulancePad und Ihren Genehmigungen ab.

Anmerkung: Für Informationen über jede Auswahlliste siehe [Stammdaten](#).

Push Masterdata: Überträgt geänderte Stammdaten sofort an alle AmbulancePad Geräte

Neuer Eintrag: Anklicken, um einen Auswahllisteneintrag hinzuzufügen.

Suche: Um eine beliebige Informationsspalte zu durchsuchen, geben Sie ein komplettes oder teilweises Wort bzw. Namen ein. Drücken Sie die Eingabetaste oder , um die Suche auszuführen.

Zeilen pro Seite: Wählen Sie die Anzahl der Zeilen, die Sie auf Ihrer Seite anzeigen möchten.

Bitte wählen Sie eine Spalte:

- Eintrag ändern
- Eintrag löschen
- Eintrag kopieren

Allgemeine Spalten:

- **Sortierfolge:** Bestimmt, wo der Eintrag in der Auswahlliste der Anwendung angezeigt wird.
- **Export-Code:** Ein individueller Code, der manchmal für ein angepasstes Abrechnungssystem oder Statistiken benötigt wird.

Aktivität

Liste der Aktivitäten oder Gründe, die in der Entsendung eines Ersthelfers an den Ort resultierten.

Stammdaten						
Aktivität						
Aktion wählen	Aktivität	Medi.data nicht benötig	Medi.data benötig	Vorgang abgebro	Kein Transp	Service-ID
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Einsatzabbruch durch AZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Einsatzleiter-Einsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Einweisung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Aktivität: Grund des Rufs

Medi.data: Benutzer muss keine medizinischen Daten eingeben.

Pat.data: Benutzer muss keine Patientendaten eingeben.

Vorgang abgebrochen: Die Ersthelfer brachen die Aktivität ab, bevor sie beendet wurde.

Kein Transport: Es fand kein Transport statt.

Service-ID: Die interne Kennung für einen Rettungsdienst



AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Zusätzliche Informationen > Einsatzgrund

Adressen

Liste der Adressen.

Stammdaten							
Adressen							
1	2	Aktion wählen	PLZ	Ort	Ortsteil	Strasse	Hnr
		6700	Bludenz	Bludenz	Am Tobel	34	
		6700	Bludenz	Bludenz	Am Tobel	39	
		6700	Bludenz	Bludenz	Am Tobel	41	



AmbulancePad-Bereich:

AmbulancePad benutzt diese Liste für alle Adressen.

Verwaltung

Liste der Medikamentencodes und Arzneimittelbeschreibungen.

Stammdaten		Verwaltung	
Aktion wählen	Code	Beschreibung	
  	01	Intraveineux	
  	03	Inhalation/Aérosol	
  	04	Intramusculaire	

Code: Numerischer Code, der benutzt wird, um die Verabreichung zu identifizieren.

Beschreibung: Beschreibt, wie der Ersthelfer das Medikament verabreicht.



AmbulancePad-Bereich:

Maßnahmen > Medikation >  > Medikation anklicken
Die Information erscheint im Feld Verabreicht.

Allergie

Liste der Allergien.

Stammdaten		Allergien		
Aktion wählen	Beschreibung	Sortierung	Export Code	
  	Lebensmittel			
  	Insektengift			
  	Tiere			
  	Bäume			

Beschreibung: Der Name der Allergie



AmbulancePad-Bereich:

Erstuntersuchung > E Anamnese (Krankengeschichte) > Allergien

NEF Status

Status des NEF Fahrzeugs

Beschreibung:	NEF nachgefordert
Sortierung:	4
Export Code:	9
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Wert für Auswahlliste

 **AmbulancePad Bereich:**
Einsatzdaten > Rettungstechn. Daten

Anamnese Hauptbeschwerde

Beschreibung der Beschwerde

Beschreibung:	Schmerzen Becken
<input type="checkbox"/> Beschreibung Notwendig? :	
Sortierung:	
Export Code:	
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Bezeichnung der Beschwerde

 **AmbulancePad Bereich:**
Erstbefund > SAMPLER

Ereignisse vor Symptombeginn

Aktivität des Patienten bevor die Beschwerde begonnen hat.

Beschreibung:	<input type="text" value="Unfall Motorrad"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>

Beschreibung: Name der Aktivität

 AmbulancePad Bereich: Erstbefund > SAMPLER
--

Anamnese Infektionsliste

Mögliche bzw. bereits Diagnostizierte Infektionen

Beschreibung:	<input type="text" value="4-MRGN"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>

Beschreibung: Name der Infektion

 AmbulancePad Bereich: Erstbefund > Infektionen
--

Anamnese Linderung

Maßnahmen die zu einer Linderung der Beschwerde führen

Beschreibung:	<input type="text" value="kühlen"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>

Beschreibung: Name der Aktion



AmbulancePad Bereich:
Erstbefund > SAMPLER

Anamnese Vorerkrankung

Liste der bekannten Vorerkrankungen des Patienten.

Beschreibung:	<input type="text" value="Augenerkrankung"/>
Sortierung:	<input type="text" value="18"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>

Beschreibung: Name der Vorerkrankung



AmbulancePad Bereich:
Erstbefund > SAMPLER

Anamnese Provokation

Angabe über die Position bzw. Maßnahme wie die Beschwerde hervorgerufen werden kann

Beschreibung:	<input type="text" value="auf Schmerzreiz"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>

Beschreibung: Name der Position oder Maßnahme



AmbulancePad Bereich:
Einsatzdaten > SAMPLER

Anamnese Region

Beschreibung der Region in die der Schmerz ausstrahlt.

Beschreibung:	<input type="text" value="zum rechten Arm"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Beschreibung des Bereiches

 AmbulancePad Bereich: Erstbefund > SAMPLER
--

Anamnese Risikofaktoren

Liste der bekannten Risikofaktoren wie Diabetes, Rauchen, etc.

Beschreibung:	<input type="text" value="Cholesterin"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Bezeichnung des Risikofaktors

 AmbulancePad Bereich: Erstbefund > SAMPLER
--

Anamnese zeitl. Verlauf

Angabe über den zeitlichen Verlauf der Beschwerde

Beschreibung:	<input type="text" value="vor ~3 Tagen"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Beschreibung des Verlaufes



Anamnese Symptom Qualität

Angabe über die Qualität bzw. Auswirkung der Beschwerde

Beschreibung:	<input type="text" value="Schwindel"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
Speichern	Abbrechen

Beschreibung: Name der Qualität bzw. Auswirkung



Anamnese Symptom Stärke

Angabe über die Symptomstärke

Beschreibung:	<input type="text" value="10"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
Speichern	Abbrechen

Beschreibung: Beschreibung der Stärke



Anamnese Veränderung

Angabe über den Zustand der Beschwerde (meist in Relation zur Angabe des zeitlichen Verlaufes).

Beschreibung:	<input type="text" value="verschlechtert"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Bezeichnung der Veränderung

 AmbulancePad Bereich: Erstbefund > SAMPLER
--

Anamnese letzte Ausscheidung

Zeitpunkt der letzten Ausscheidung

Beschreibung:	<input type="text" value="< 1 Stunde"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Beschreibung der Zeitangabe

 AmbulancePad Bereich: Erstbefund > SAMPLER
--

Anamnese letzte Mahlzeit

Zeitpunkt der letzten Mahlzeit

Beschreibung:	<input type="text" value="< 1 Stunde"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Beschreibung der Zeitangabe

 AmbulancePad Bereich: Erstbefund > Einsatzdaten

Applikationsformen

Liste der Arten, wie der Ersthelfer ein Medikament verabreichen kann.

Stammdaten		Applikationsformen
Aktion wählen		Beschreibung

Beschreibung: Beschreibt, wie der Ersthelfer das Medikament verabreicht.



AmbulancePad-Bereich:

Maßnahmen >Medikation > > Medikation anklicken
Die Liste erscheint im Feld Verabreicht.

Austria Codex (nur österreichische Version)

Liste der Medikamente, die der Patient aktuell nimmt.

Stammdaten		Austria Codex
Aktion wählen		Beschreibung

Beschreibung: Der Name des Medikaments



AmbulancePad-Bereich:

Patientenbeurteilung > Krankengeschichte >Medikation

Wachen

Liste der Wachen, die einer Organisation zugordnet sind.

Aktion wählen	Organisation	Beschreibung
  	Demo AT	Testwache 2
  	Demo AT	Testwache 1

Organisation: Organisationsname, der mit der Wache verbunden ist

Beschreibung: Wachenname

Adressfelder: Adresse der Wache



AmbulancePad-Bereich:

Rettungsmittel (Anmeldung)
Auch unter Besatzung/Wagen > Wache

Abrechnung Sonstige

Liste der zusätzlichen Datenfelder, die im Abrechnungsbereich von AmbulancePad angezeigt werden.

Aktion wählen	Beschreibung	UI Beschreibung	Gruppe	Beschreibung Notwendig?	Export Code
  	2 Mann Besatzung	2 Mann Besatzung	1	<input type="checkbox"/>	0002
  	1 Mann Besatzung	1 Mann Besatzung	1	<input type="checkbox"/>	0001
  	Kein Transport/Nur Behandlung	Kein Transport \n Nur Behandlung	2	<input type="checkbox"/>	0003

Beschreibung: das Label, das im ausgedruckten Patientenversorgungsbericht (PDF) angezeigt wird

UI-Beschreibung: das Label des Buttons in AmbulancePad

Gruppe: Nur eine Eintrag innerhalb einer Gruppe kann in AmbulancePad ausgewählt werden.

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob der AmbulancePad-Benutzer eine Notiz eingeben muss.

Export-Code: ein Code, der Ihr Abrechnungssystem erfordert oder für Statistiken benötigt wird



AmbulancePad-Bereich:

Abrechnung > Sonstige

Abrechnungsart

Liste der Abrechnungsart, die ein Benutzer in AmbulancePad auswählen kann.

Stammdaten Abrechnung Art				
Aktion wählen	Beschreibung	Kostenträger Notwendig?	Beschreibung Notwendig?	Export Code
  	26 - nicht in Anspruch genommener KTW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3602
  	27 - nicht in Anspruch genommener RTW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3603
  	06 - Untersuchungsfahrt/Fernfahrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3579

Beschreibung: Name der Abrechnungsart

Kostenträger notwendig?: Zeigt an, das der AmbulancePad-Benutzer zusätzliche Abrechnungsangaben über den Button „Abweichende Rechnungsadresse“ eingeben muss.

Beschreibung erforderlich?: Zeigt an, dass der AmbulancePad-Benutzer eine zusätzliche Beschreibung über den Button „Notiz“ hinzufügen muss.



AmbulancePad-Bereich:

Abrechnung > Art

Abrechnung Tarif

Liste der zusätzlichen Detailinformationen für die Abrechnungsart.

Stammdaten Abrechnung Tarif		
Aktion wählen	Art	Beschreibung
  	05 - Rettungstransport/Fernfahrt	15 - Transport nach Psych. KG
  	02 - Rettungstransport/Stadtfahrt	09 - Risiko-Neugeborene (Inkubator)
  	07 - Notarztbehandlung	03 - Hausunfall

Art: entsprechende Abrechnungsart

Beschreibung: zusätzliche Angaben bezüglich der Abrechnungsart



AmbulancePad-Bereich:

Abrechnung > Artdetails

Abrechnung Rettungsmittel

Liste der abrechenbaren Fahrzeugtypen.

Stammdaten		Abrechnung Rettungsmittel ▾
Aktion wählen	Beschreibung ⓘ	
  	RTW	
  	KTW	
  	NAW	

Beschreibung: Name des Fahrzeugtyps



AmbulancePad-Bereich:

Abrechnung > Transportfahrzeug

Abrechnung Wartezeit

Liste von vordefinierten Zeitangaben die beschreiben, wie lange die Besatzung benötigt um das Fahrzeug wieder Einsatzbereit zu machen (Reinigung, Desinfektion, etc.).

Beschreibung:	<input type="text" value="gross"/>
Wert:	<input type="text" value="20"/>
Sortierung:	<input type="text" value="4"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Wert: Zeit in Minuten

Beschreibung: Beschreibung der Zeitangabe



AmbulancePad Bereich:

Abrechnung > Wartezeit

Einsatz Priorität

Priorität mit welcher der Einsatz von der Leitstelle disponiert wurde (Primär, Sekundär, etc.)

Beschreibung:	<input type="text" value="Sekundär"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text" value="4"/>
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	<input type="text" value="Bitte Auswählen"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Bezeichnung der Priorität



AmbulancePad Bereich:

Einsatzdaten > Rettungstechn. Daten

Benutzerspezifische Fragen (nur Internationale Version)

Liste der benutzerspezifischen Fragen die in AmbulancePad angezeigt werden.

Aktion wählen	Nr	Frage	Pflichteingabe?
	1	Frage 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	Frage 2	<input type="checkbox"/>
	3	Frage 3	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	Frage 4	<input type="checkbox"/>

Nr: Referenznummer der Frage. **Bitte beachten Sie das maximal 4 benutzerspezifische Fragen unterstützt werden.**

Frage: Tragen Sie hier die Frage ein

Pflichteingabe?: Gibt an ob es sich bei der Frage um eine Pflichteingabe handelt.



AmbulancePad-Bereich:

Übergabe



Benutzerspezifische Antworten (nur Internationale Version)

Liste der zu der Frage entsprechenden benutzerspezifischen Antworten.

Aktion wählen	Nr	Antwort	Sortierung
	1	Antwort 1	1
	2	Antwort 1	1
	3	Antwort 1	1
	4	Antwort 1	1
	1	Antwort 2	2
	2	Antwort 2	2

Nr: Verweis auf die entsprechende Referenznummer der Frage.

Antwort: Tragen Sie hier die entsprechende Antwort ein.

AmbulancePad-Bereich:

Übergabe

Einsatzart

Liste der Einsatzarten, die die Anfrage zur Entsendung eines Ersthelfers auslöste.

Stammdaten		Einsatzart						
		+ neuer Eintrag						
Aktion wählen	Einsatzart-ID	Einsatzart-Code	Einsatzart-Text	Reihenfolge	Transport refusal?	Transport aktiv?	Patient aktiv?	
	101	111	Heimtransport von stationärer Behandlung		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	104	120	Verlegung	14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	105	125	Übergabe Rettungshubschauber		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	106	130	Nachalarmierung NEF NAW	15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Einsatzart-ID: die ID, die zur Einsatzart gehört.

Einsatzart-Code: der Code, der zur Einsatzart gehört.

Einsatzart-Text: Beschreibung der Einsatzart

Transport verweigert?: Zeigt an, wenn diese Einsatzart die Verweigerung des Transports enthält.

Transport aktiv?: Zeigt an, ob diese Einsatzart einen Transport enthält

Patient aktiv?: Zeigt an, ob Sie vom AmbulancePad-Benutzer die Aufnahme von Patientendaten für diese Einsatzart verlangen.

AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Einsatzart

Hauptbeschwerde

Liste der Beschwerden, die die Ersthelfer vom Patienten beim Eintreffen vor Ort hören.

Stammdaten Hauptbeschwerde alle Einträge löschen neuer Eintrag				
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:52 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:52)				
1 2				
Aktion wählen	Beschreibung	Beschreibung Notwendig?	Sortierung	
	Schmerzen Zähne	<input type="checkbox"/>		
	Schmerzen Ohren	<input type="checkbox"/>		
	Schmerzen Hals	<input type="checkbox"/>		
	Schmerzen Brust	<input type="checkbox"/>		
	Schmerzen Rücken	<input type="checkbox"/>		

Beschreibung: Beschreibt die Hauptbeschwerde des Patienten.

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie vom AmbulancePad-Benutzer verlangen, eine zusätzliche Beschreibung einzugeben, wenn er diese Position auswählt.



AmbulancePad-Bereich:

Erstuntersuchung > Anamnese (Krankengeschichte) Symptom

Code (nur Schweizer Version)

Liste mit mehreren Positionen wie etwa verschiedenen Auswahllisten im Bereich Einsatzdaten, Anamnese, Medikamente, usw.

Stammdaten Code					
Aktion wählen	Code type	AmbulancePad Code	Beschreibung	Auftr	St
	Radaradressen		Olten, Solothurnerstr., Richtung Olten	5	
	Radaradressen		Wynau, Bernstrasse, Richtung Langenthal	4	
	Radaradressen	01	Aarwangen, Langenthalstr., Richtung Niederbipp	1	

Codetyp: Beschreibt den Codetyp

AmbulancePad-Code (optional): Zugehörige ID – AmbulancePad-Code funktioniert in etwa so wie der Export-Code in anderen Listen

Beschreibung: Bestimmt die Sortierreihenfolge des Codeeintrags in der Liste

Auftrag: Bestimmt, wo der Eintrag in der Liste angezeigt wird

Service-ID: Wird derzeit nicht benutzt



Anmerkung: Fügen Sie den Codetyp zuerst hinzu und wenden Sie ihn dann in der Codeliste oben an.

Codetyp

Liste der Codetypen. Sowohl Codetyp als auch Codeinträge entstammen dem Sanostat-Produkt und werden in das AmbulancePad Admin Tool importiert.

Stammdaten		Codetype
Aktion wählen	Beschreibung	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Anamnese, Ereignisse vor Symptomen	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Anamnese, Hauptbeschwerde	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Anamnese, Medikamente	

Beschreibung: Beschreibt den Codetyp



Anmerkung: Fügen Sie den Codetyp zuerst hinzu und wenden Sie ihn dann in der Codeliste oben an.



AmbulancePad-Bereich:

- SAMPLER > Symptom
- SAMPLER > Allergien
- SAMPLER > Pers. Vorerkrankungen
- SAMPLER > Letzte orale Einnahme/Ausscheidung
- SAMPLER > Ereignisse vor Symptomen
- SAMPLER > Risikofaktoren
- Einsatzdaten > Zeitüberschr. Begründung
- Einsatzdaten > Dringlichkeit
- Einsatzdaten > Einsatzgrund
- Einsatzdaten > Einsatzart
- Einsatzdaten > Grund Einsatzabbruch
- Medikamente > Einheiten
- Medikamente > Applikationsform
- Medikamente > Wirkstoff
- Rettungsmittel > Mitarbeiterfunktion
- Administration > Radaradressen

Cotation Actes (nur französisches Version)

Liste der möglichen Ergebnisse eines Vorfalls.

Données de base		Cotation Actes
Choix	Sélection	
		moyen annulé au départ ou sur le trajet
		concours inutile sur place
		réalisation d'un bilan paramédical sur place
		Soins sans visée thérapeutique

Beschreibung: Die Ergebnisse eines Vorfalls wie etwa Transport nicht benötigt.



AmbulancePad-Bereich:

Ziel > Fahrt

Das Feld Cotation Actes wird unter der Zielliste angezeigt.

Länderliste

Liste der Ländernamen.

Stammdaten		Länderliste		
Letzte Übertragung am 15.02.16 08:33 von Benutzer 'admin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 15.02.16 08:33)				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
Aktion wählen	Beschreibung			Iso2
			Algerien	DZ
			Andorra	AD
			Angola	AO
			Anguilla	AI

Beschreibung: Ländername

Iso2: Ländercode



AmbulancePad-Bereich:

Patiententendaten > Land

Beschreibungsdaten

Liste der Standorttypen.

Stammdaten		Beschreibung	alle Einträge löschen		neu
Letzte Übertragung am 10.12.15 12:32 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 12:32)					
Aktion wählen	Beschreibung	Beschreibung Notwendig?			
	keine Angabe	<input type="checkbox"/>			
	Wohnung	<input type="checkbox"/>			
	Altenheim	<input type="checkbox"/>			
	Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/>			

Beschreibung: Beschreibt den Ort des Vorfalls

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, eine zusätzliche Beschreibung einzugeben, wenn diese Position ausgewählt wurde.



AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Beschreibung

Geräte

Liste der medizinischen Geräte, die Daten in AmbulancePad importieren.

Stammdaten		Geräte	alle Einträge löschen		neu
Letzte Übertragung am 01.03.16 22:25 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 01.03.16 22:25)					
1	2				
Aktion wählen	Organisation	Geräte ID	Verbindungs ID		
	Feuerwehr Essen	ZOLL X Series	hgfrzrtdhfg		
	Feuerwehr Essen	ZOLL M Series	00:12:f3:09:47:53		
	Feuerwehr Essen	ZOLL M Series	00:12:f3:09:47:2a		
	Feuerwehr Essen	ZOLL M Series	00:12:f3:09:35:9e		
	Feuerwehr Essen	ZOLL M Series	00:12:f3:09:47:11		

Service-ID: die interne Kennung für einen Rettungsdienst

Geräte-ID: Name des Gerätetyps

Verbindungs-ID: ID, die zur Verbindung mit dem Gerät benutzt wird

Beschreibung: Beschreibung , die zur Identifizierung des Geräts benutzt wird

Fahrzeug (optional): Das Fahrzeug auf dem das Gerät stationiert ist



AmbulancePad-Bereich:

Button Besetzung ändern oben > Geräte und Besetzung/Wagentafel > Einsatzdaten > Geräte

Einsatzbesonderheiten

Liste der zusätzlichen Einsatzinformationen.

Stammdaten			Einsatzbesonderheiten	
alle Einträge löschen neuer Eintrag				
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:53 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:53)				
Aktion wählen	Beschreibung	Beschreibung Notwendig?		
	Pat. lehnt indizierte Therapie ab	<input type="checkbox"/>		
	bewußter Therapieverzicht durch Arzt (Palliation)	<input type="checkbox"/>		
	Pat. nicht transportfähig (Intensivtransport)	<input type="checkbox"/>		
	Erhöhter Hygieneaufwand	<input type="checkbox"/>		

Beschreibung: Zusätzliche Einsatzinformationen wie etwa „von Polizei gemeldet“ – es ist nur ein Wert erforderlich.

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, eine zusätzliche Beschreibung hinzuzufügen, wenn diese Position ausgewählt wurde.



AmbulancePad-Bereich:

Ziel > Einsatzbesonderheiten

Sonderziele

Liste der Sonderziele.

Stammdaten							Sonderziele
Aktion wählen	Objekt ID	Objekt Bezeichnung	Objektteil	Einsatzort?	Transportziel?	Klassifikation	
	2	ZOLL Medical Center	ER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hospital	
	1	ZOLL Medical Center	Shock Room	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hospital	

Beschreibung: Name/Beschreibung der Einrichtung

Objektteil: eine Abteilung oder Unterabteilung einer Einrichtung

Einsatzort: Setzen Sie einen Haken, falls diese Einrichtung ein potenzieller Einsatzort ist.

Transportziel: Setzen Sie einen Haken, falls diese Einrichtung ein potenzielles Transportziel ist.

Klassifikation: Art der Einrichtung wie etwa ein Krankenhaus



AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Objekt/ID

Ziel > Object/ID

Maßnahmen des Ersthelfers (nur österreichisches Tool)

Liste der Maßnahmen, die Ersthelfer ausführen.

Stammdaten		Massnahmen		
Aktion wählen	Text	Sortierung	Export Code	
  	Blutstillung:Abbindung			
  	Blutstillung:Wundversorgung			
  	Kühlung			
  	Lagerung			

Text: Maßnahme, die von Ersthelfern ausgeführt wurden.



AmbulancePad-Bereich:
 Erstbefund > Ersthelfer > Maßnahmen
 Erstbefund > Vorgefunden

Geschlecht

Liste der Geschlechter.

Stammdaten		Geschlecht	
Aktion wählen	Beschreibung		
  	Female		
  	Male		

Beschreibung: Beschreibt das Geschlecht wie etwa männlich, weiblich und unbekannt.



AmbulancePad-Bereich:
 Wird nur für die Auswahl des Geschlechtes des Rettungsdienstpersonals innerhalb des AmbulancePad-Tool benutzt.

Klinikwahl

Liste der Gründe, warum ein bestimmtes Krankenhaus gewählt wurde.

Stammdaten		Klinikwahl			
Aktion wählen	Beschreibung	Beschreibung Notwendig?	Sortierung	Export Code	
  	advised by doctor	<input type="checkbox"/>			
  	ER	<input type="checkbox"/>			
  	requested by patient	<input type="checkbox"/>			
  	medical requirement	<input type="checkbox"/>			

Beschreibung: Grund, warum der Benutzer das Krankenhaus wählt.

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, eine zusätzliche Beschreibung einzugeben, wenn er diese Position auswählt.

 **AmbulancePad-Bereich:**
 Ziel > Klinikwahl

Klinikstatus

Liste der Krankenhaustypen.

Stammdaten		Klinikstatus		 alle Einträge löschen	 neuer Eintrag
Aktion wählen	Beschreibung	Beschreibung Notwendig?			
Letzte Übertragung am 10.12.15 12:31 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 12:31)					
  	keine Angabe	<input type="checkbox"/>			
  	Grund-/Regelversorgung	<input type="checkbox"/>			
  	Schwerpunktversorgung	<input type="checkbox"/>			
  	Maximalversorgung	<input type="checkbox"/>			
  	RehaKlinik	<input type="checkbox"/>			

Beschreibung: Beschreibung eines Krankenhaustyps

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, eine zusätzliche Beschreibung einzugeben, wenn er diese Position auswählt.

 **AmbulancePad-Bereich:**
 Ziel > Klinikstatus

ICD-10 (nur österreichisches Tool)

Liste der ICD-10-Codes, die zur Meldung medizinischer Diagnosen und Behandlungen benutzt wird.

Stammdaten		ICD10		
1	2			
Aktion wählen	Uid	Igroup	IKrankheit	
	90400	RKV	Abortus	
	90401	RKV	Akuter Brustschmerz	
	90402	RKV	Akuter Erregungszustand	
	90403	RKV	Akutes Abdomen	

Uid: ICD-10-Code

Igroup: ICD-10-Gruppe

IKrankheit: ICD-10-Beschreibung



AmbulancePad-Bereich:
Expose > Icon klicken > RKV/ICD10 > ICD10

Erkrankungen

Liste der Namen, die mit Krankheit verbunden sind.

Stammdaten		Erkrankungen		alle Einträge löschen	neuer Eintrag
1	2	3	4	5	
Aktion wählen	Gruppe	Erkrankung	Beschreibung Notwendig?		
	ZNS Erkrankungen	SAB (klin. Diagnose)	<input type="checkbox"/>		
	ZNS Erkrankungen	Krampfanfall	<input type="checkbox"/>		
	ZNS Erkrankungen	Fieberkrampf	<input type="checkbox"/>		

Gruppe: Gruppe, in der die Krankheit klassifiziert ist. Um Gruppen zu konfigurieren, klicken Sie auf **Krankheit>Gruppen**.

Erkrankung: Name der Krankheit

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, einen Kommentar für diese Krankzeit einzugeben.



AmbulancePad-Bereich:
Erstuntersuchung vermutete Diagnose > 

Erkrankungen Gruppen

Liste der Gruppen, die Krankheiten eines ähnlichen Typs enthalten.

Stammdaten		Erkrankung Gruppen
Aktion wählen		Beschreibung
		NEUROLOGICAL
		GENERAL
		GASTROINTESTINAL
		DIABETIC

Beschreibung: Name, der die Erkrankungsgruppe beschreibt.

AmbulancePad-Bereich:
Erstuntersuchung > > Krankheit

Kostenträger

Liste der Kostenträger/Versicherungen.

Stammdaten		Kostenträger			
Letzte Übertragung am 15.02.16 10:04 von Benutzer 'admin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 15.02.16 10:04)					
1	2				
Aktion wählen	Krankenkassen Nr.	IK	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Bezeichnung 3
			AOK RHEINLAND UND HAMBURG	AOK RHEINLAND u. HAMBURG	Fachbereich Rechnungsprüfung
			AOK NORD WEST	AOK	NORD WEST
			BA F ZIVILD	BUNDESAMT FÜR DEN ZIVILDienst	

Krankenkassen-Nr.: Kennzeichen der Versicherung

IK: IK-Nummer des Versicherungsunternehmens

Beschreibung 1: Name des Versicherungsunternehmens

Beschreibung 2: zusätzliche Informationen

Beschreibung 3: zusätzliche Informationen

Beschreibung 4: zusätzliche Informationen

Abrechnungszentrum: Name des verbundenen Abrechnungszentrums

Abrechnungszentrum- ID: ID des verbundenen Abrechnungszentrums

DTA-Status: DTA-Informationen

IA: Interner Vermerk, falls das Versicherungsunternehmen inaktiv ist

AmbulancePad-Bereich:
Patientendaten > Kostenträger

Versicherungsverhältnis

Liste der Versicherungsverhältnisse.

Stammdaten		Versicherungs Verhältnis ▾		
Aktion wählen	Beschreibung	Sortierung	Export Code	
  	Familienangehörig			
  	Pensionist			
  	Sonstige			

Beschreibung: Beschreibt die Art der Versicherung.

 **AmbulancePad-Bereich:**
Patient > Fahrt > Versicherungsverhältnis

Stichworte

Liste der Servicetypen, die ein Benutzer anfordern kann.

Stammdaten		Stichworte ▾		
Aktion wählen	Beschreibung	Sondersignal?	Protokoll umwandeln?	
  	BLS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
  	Wheelchair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
  	Response Mode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
  	Emergency	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Beschreibung: angeforderter Service – Stufe des Service

Sondersignal?: Erlaubnis zur Nutzung von Sirene und Blaulicht

Protokoll umwandeln?: Setzt die Art des Patientenversorgungsberichts um eine Prioritätsstufe herab (RTW zu KTW)

 **AmbulancePad-Bereich:**
Einsatzdaten > Ruftyp

Lastmens (nur österreichisches Tool)

Liste der Zeitstempel, die zur Aufzeichnung der letzten Menstruation der Patientin benutzt werden.

Stammdaten		Lastmens
Aktion wählen	Beschreibung	Sortierung Export Code
		vor 2 Tagen
		vor 3 Tagen
		vor 4 Tagen

Beschreibung: Chronologische Zeiten



AmbulancePad-Bereich:

Erstuntersuchung > Krankengeschichte > Menstruation

Sonderziele

Liste der Einrichtungen.

Stammdaten		Lage2			
1	2	3	4	5	6
Aktion wählen	Els Objekt	Objekt Beschreib	Fax1	Fax2	Email
		AMBULANZ EG BLUDENZ	LKH Bz Allg Amb	0555231166202	055526037502
		CHR AMB EG BLUDENZ	LKH Bz Chir Amb	0555231166202	055526037502
		CT BLUDENZ	LKH Bz CT	0555231166202	055526037502
		GYN AMB EG BLUDENZ	LKH Bz Gyn Amb	0555231166202	055526037502

Els-Objekt: Name der Einrichtung

Objektbeschreibung: Beschreibung der Station der Einrichtung

Fax1: Faxnummer

Fax2: zusätzliche Faxnummer

E-Mail: E-Mail-Adresse

Infocfeld: zusätzliche Informationen



AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten – Einsatzdaten - Objekt

ID auch in Zielobjekt

Organisationen (nur Administrator)

Liste der Servicenamen und Beschreibungen.

Stammdaten		Organisationen
Aktion wählen		Beschreibung
		Feuerwehr Essen

Beschreibung: Servicebeschreibung

Sichtbar: Zeigt an, ob durch Ankreuzen in dieser Spalte dieser Service in der Service-Auswahlliste sichtbar ist.

Andere mögliche Spalten:

Admin-Label: Gibt Ihnen die Möglichkeit, das Patientenversorgungsprotokoll einem einzelnen Benutzer zuzuweisen.

Extra-Label: Wird derzeit nicht benutzt.

	AmbulancePad-Bereich: Besatzung/Wagen > Service
---	---

Medikamentenliste (nur Administrator)

Liste der Medikamente.

Stammdaten		Medikamente			
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:45 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:45)					
1 2 3					
Aktion wählen	Beschreibung	Medikament Gruppe	Inhalt	Einheit	Wirkstoff
  	Jonosteril		500	ml	
  	Toxogonin	Sonstige	1	ml	Obidoxime chloride
  	Aqua ad injectable	Sonstige	100	ml	
  	Suprarenin	Katecholamine	25	ml	Epinephrin

Beschreibung: Medikamentenbeschreibung

Medikamentengruppe: Wird benutzt, um ähnliche Medikamente in einer Gruppe zusammenzufassen.

Medikamentenname: Marken- oder generischer Name

Wirkstoff: Aktiver Inhaltsstoff

Wirkstoffmenge: Menge, in der das Medikament geliefert wird.

Wirkstoffeinheit: Maßeinheit

Indikation: Leiden, für die das Medikament verabreicht werden sollte.

Besondere Kompetenz: Zeigt an, ob das Medikament nur von einem besonders ausgebildeten Klinikarzt verabreicht werden darf.

Service-ID: Auf welchem Service diese Liste angewendet wird.

Dosierungsfelder sind optional: abweichende Dosierungsmenge

 **AmbulancePad-Bereich:**
Maßnahmen >  > Medikamentenliste

Fehleinsatz

Liste der möglichen Gründe, für die ein Benutzer eine Fahrt bestimmen kann.

Stammdaten Fehleinsatz			
letzte Übertragung am 10.12.15 13:24 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 13:24)			
Aktion wählen	Text 1	Text 2	Druck Text?
	Kein Patient vorgefunden		Kein Patient vorgefunden
	Patient bereits abtransp.		Patient bereits abtransp.
	Von Leitstelle abbest.		Von Leitstelle abbest.
	Böswillige Alarmierung		Böswillige Alarmierung

Text 1: Buttontext 1. Zeile in AmbulancePad

Text 2: Buttontext 2. Zeile in AmbulancePad

Text drucken?: Text im Protokoll Ausdruck

Kommentar hinzufügen: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, einen zusätzlichen Kommentar einzugeben, wenn diese Position ausgewählt wird

 **AmbulancePad-Bereich:**
Einsatzdaten > Button Ambulanz > Seite Ruf bestimmt

MRSA

Liste der MRSA-Infektionen.

Stammdaten MRSA	
Letzte Übertragung am 10.12.15 13:27 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 13:27)	
Aktion wählen	Beschreibung
	Nein
	Trägerstatus unbekannt
	I/II A
	II B
	III

Beschreibung: Stufen der MRSA-Infektionen

 **AmbulancePad-Bereich:**
Einsatzdaten > Einsatzinformationen > MRSA

Kein Transport

Liste der Gründe, warum der Patient nicht transportiert wurde.

Stammdaten X alle Einträge löschen				
Letzte Übertragung am 15.12.15 08:44 von Benutzer 'admin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 15.12.15 08:44)				
Aktion wählen	Beschreibung	Med. Daten Notwendig?	Pat. Daten Notwendig?	Abrechn. Daten Notwendig?
	Todesfeststellung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Übergabe an anderes Rettungsmittel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nur Untersuchung/Behandlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Beschreibung: Grund, warum der Patient nicht transportiert wurde.

Med. Daten notwendig?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer medizinische Daten erfassen muss.

Pat. Daten notwendig?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer Patientendaten erfassen muss.

Abrechnungsdaten notwendig?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer Abrechnungsdaten erfassen muss.

Erstbefund notwendig?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer den Erstbefund erfassen muss.

Transp. Daten notwendig?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer Transportinformationen erfassen muss.

Kommentar hinzufügen?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer einen zusätzlichen Kommentar erfassen muss.



AmbulancePad-Bereich:

Ziel > Kein Transport

Nicht notwendig

Liste der Gründe, warum ein Benutzer einen Patientenversorgungsbericht nicht abgeschlossen hat.

Stammdaten Nicht Notwendig	
letzte Übertragung am 10.12.15 13:30 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 13:30)	
Aktion wählen	Beschreibung
	Testeinsatz (Wird aus System gelöscht!)
	offenes Protokoll von Vorschicht übernommen
	nicht möglich

Beschreibung: Gründe, warum ein Benutzer den Patientenversorgungsbericht nicht abgeschlossen hat.



AmbulancePad-Bereich:

Bericht schließen > Grund

Andere Dienste (nur Schweizer und französische Version)

Liste der anderen Einsatzkräfte vor Ort wie Polizei usw.

Données de base		Renforts
Choix	renfort-label	Type
  	SMUR Saint NAZAIRE	1
  	SMUR Nantes	1
  	SMUR Chateaubriant	1
  	SMUR Redon	1

Einsatzkräfte-Label: Andere Behörden am Einsatzort

Typ: Numerisches Kennzeichen, das mit dem Typ der Einsatzkräfte verbunden ist.



AmbulancePad-Bereich:

Renforts Medical > SMUR

Vorgefunden (nur österreichische Version)

Liste der Patientenzustände, auf die ein Ersthelfer treffen kann, wenn er vor Ort eintrifft.

Stammdaten		Vorgefunden	
Aktion wählen	Text	Sortierung	Export Code
  	Gehend/stehend		
  	Seitenlage		
  	Sitzend		
  	eingeklemmt		

Text: Beschreibt den Zustand des Patienten bei Ankunft.



AmbulancePad-Bereich:

Erstbefund > Vorgefunden

Personal

Liste des Personals, das auf das System zugreifen kann.

Stammdaten		Personal					✖ alle Einträge
Letzte Übertragung am 15.02.16 08:45 von Benutzer 'admin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 15.02.16 08:45)							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22 23							
Aktion wählen	Personal Nr.	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht	Qualifikation	
  		Ahlhorn	Werner		unknown\unbekannt	Assistent	
   		Anselm	Benjamin		unknown\unbekannt	Helfer	
   		Arnhold	Guido		unknown\unbekannt	Assistent	
   		Avcu	Kapris		unknown\unbekannt	Sanitäter	

Klicken Sie auf , um das Konto des Benutzers zu ändern. Das System führt Sie auf die Einstellungsseite und öffnet das Fenster „Einstellungen hinzufügen/ändern“. Nach der Änderung der Benutzerdaten klicken Sie auf **Speichern**. Für weitere Informationen dazu, wie Sie diese Seite benutzen, gehen Sie zu [Konto hinzufügen/ändern](#).

Benutzerverwaltung	Übersetzungen	Info
Organisation: Feuerwehr Essen		
Benutzername:		
Passwort:		
Vorname: Benjamin		
Nachname: Anselm		
E-mail Adresse:		
Account gesperrt: <input type="checkbox"/>		
Account abgelaufen: <input type="checkbox"/>		
Berechtigung: Protokoll Admin		
Accountgültigkeit bis:		
Speichern Abbrechen		

Personalnummer: Nummer, die den Benutzer identifiziert.

Vor-/Nachname: Vor- und Nachname des Benutzers

Geburtsdatum: Geburtsdatum des Benutzers

Geschlecht: weiblich/männlich/sonstiges/unbekannt

Qualifikation: Beschreibt die Qualifikation des Benutzers. Benutzer können eine Qualifikation wählen, wenn sie einen Benutzer auf der Konfigurationsseite hinzufügen oder ändern.

Spezialfeld: Studienggebiet oder Fähigkeit eines Benutzers, in dem/der Erfahrungen bestehen.

Organisations-ID: Mitarbeiternummer

Service-ID: das interne Kennzeichen für einen Rettungsdienst oder einen Mieter

Linkshänder/Rechtshänder: Die Hand, die vom Benutzer am häufigsten benutzt wird.

PLZ, Stadt, Straße: Adresse des Benutzers

Telefonnummern (privat, mobil, beruflich): Kontaktinformationen des Benutzers

Fahrer NEF, Fahrer RTW/KTW, Transportführer, Arzt: gibt an ob der Benutzer in der entsprechenden Personalliste in AmbulancePad gelistet wird.

Barcode: Benutzer können am Anfang ihrer Schicht statt der Auswahl ihres Namens aus einer Liste einen Barcode scannen. Das System benutzt den Barcode, um zu erkennen, wer welche Rolle in der Besatzung erfüllt.



AmbulancePad-Bereich:
Besatzungswechsel > Besatzung

Vorerkrankungen

Liste der Krankengeschichte des Patienten. Der AmbulancePad-Benutzer wählt aus dieser Liste während der Erstuntersuchung aus.

Stammdaten		Vorerkrankungen
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:55 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 20		
1	2	3
Aktion wählen	Beschreibung	
  	Augenerkrankung	
  	Allergie	
  	Asthma	
  	Aneurysma	

Beschreibung: Krankheiten, die vor der Erstellung des Patientenversorgungsberichts bestanden.



AmbulancePad location:
Erstuntersuchung > Anamnese > Vorerkrankung

Privatärzte

Liste der Privatärzte in diesem Gebiet.

Aktion wählen	KV	BS Nr.	LANR	Nachname	Vorname
				Dr. Wolfart	
				Abbushi	Gudrun

KV: Name der Versicherungsgesellschaft

BS No.: Telefonnummer des Arztes

LANR: Ärzte-ID

Nachname: Nachname des Arztes

Vorname: Vorname des Arztes

Kurzname: Alternativer Name des Arztes

Straße, PLZ, Stadt: Adresse des Arztes



AmbulancePad-Bereich:

Patient > Fahrt

Mitarbeiterfunktion (nur Administrator)

Liste der Qualifikationen.

Stammdaten		Mitarbeiter Funktion
Aktion wählen	Text	
	RK First Responder	
	Sani	
	Dipl	

Text: Beschreibt die Qualifikation einer Person.



AmbulancePad-Bereich:

Besatzungswechsel > Besatzung > Qualifikation

Mitarbeiter Herkunft

Rettungsdienst oder Klinik bei dem der Mitarbeiter angestellt ist.

Description:	Freelancer
Sort Order:	
Export Code:	
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Beschreibung: Name des Arbeitgebers

 AmbulancePad Bereich: Rettungstechn. Daten > Rettungsmittel

Alarmierung angemessen

Rückmeldung ob die disponierte Dringlichkeit bzw. das Einsatzstichwort in Bezug auf die vorgefundene Situation angemessen war

Organisation:	Bitte Auswählen
Beschreibung:	Nein, Sondersignal notwendig
Sortierung:	
Export Code:	8
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Beschreibung der Angemessenheit

 AmbulancePad Bereich: Rettungstechn. Daten > Einsatzdaten

EKG Telemetrie Gründe

Gründe warum keine EKG Übermittlung durchgeführt wurde.

Beschreibung:	Übertragungsfehler
Sortierung:	
Export Code:	3
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Liste der Gründe



AmbulancePad Bereich:
Erstbefund > EKG

EKG Telemetrie Ergebnis

Ergebnis/Rückmeldung der Klinik bezüglich des übermittelten EKG

Beschreibung:	Direkt zur PTCA
Sortierung:	1
Export Code:	2
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Liste der möglichen Rückmeldungen



AmbulancePad Bereich:
Erstbefund > EKG

Begründung bei Überschreitung - Einsatz angenommen

Liste der möglichen Gründe warum die Zeit zwischen “Alarm” und “Einsatz angenommen” überschritten wurde. Eine Anleitung wie Sie die Grenzwerte Einstellen finden Sie im Bereich „Unterstütze Stammdaten“.

Beschreibung:	Pager nicht ausgelöst
Sortierung:	2
Export Code:	
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Gründe warum die Zeit Überschritten wurde



AmbulancePad Bereich:
Rettungstechn. Daten > Einsatzdaten

Begründung bei Überschreitung - Fahrtzeit

Liste der möglichen Gründe warum die Zeit zwischen "Einsatz angenommen" und „Eintreffen am Einsatzort“ überschritten wurde. Eine Anleitung wie Sie die Grenzwerte Einstellen finden Sie im Bereich „Unterstütze Stammdaten“.

Beschreibung:	Falsche Adresse im Einsatzauftra
Sortierung:	1
Export Code:	
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Gründe warum die Zeit Überschritten wurde



AmbulancePad Bereich:
Rettungstechn. Daten > Einsatzdaten

Begründung bei Überschreitung – Zeit am Einsatzort

Liste der möglichen Gründe warum die Zeit zwischen „Eintreffen am Einsatzort“ und „Abfahrt Einsatzstelle“ überschritten wurde. Eine Anleitung wie Sie die Grenzwerte Einstellen finden Sie im Bereich „Unterstütze Stammdaten“.

Beschreibung:	<input type="text" value="Umfangreiche Behandlungsthera"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	<input type="text" value="Bitte Auswählen"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Gründe warum die Zeit Überschritten wurde



AmbulancePad Bereich:
Rettungstechn. Daten > Einsatzdaten

Begründung bei Überschreitung – Fahrtzeit zur Klinik

Liste der möglichen Gründe warum die Zeit zwischen „Abfahrt Einsatzstelle“ und „Ankunft Zielklinik“ überschritten wurde. Eine Anleitung wie Sie die Grenzwerte Einstellen finden Sie im Bereich „Unterstütze Stammdaten“.

Beschreibung:	<input type="text" value="Ausfahrt blockiert"/>
Sortierung:	<input type="text" value="2"/>
Export Code:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	<input type="text" value="Bitte Auswählen"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Gründe warum die Zeit Überschritten wurde



AmbulancePad Bereich:
Rettungstechn. Daten > Einsatzdaten

Erstes Rettungsmittel am Einsatzort

Erstes eintreffendes Rettungsmittel vor Ort (z.B. First Responder, RTW, NEF, etc.).

Description:	First Responder
Sort Order:	4
Export Code:	
<input type="checkbox"/> Comment required? :	
Service ID:	please select
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

Beschreibung: Name des Rettungsmittels



AmbulancePad Bereich:

Rettungstechn. Daten > Einsatzdaten

Funktion Pat. Übergeben an

Funktion des Empfängers an die der Patient übergeben wurde

Beschreibung:	Pflegepersonal
Sortierung:	2
Export Code:	02
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Bezeichnung der Funktion



AmbulancePad Bereich:

Übergabe

Patient Ausweis Art

Liste von Ausweisarten anhand derer der Patient identifiziert wurde.

Beschreibung:	Personalausweis
Sortierung:	1
Export Code:	2
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Bezeichnung der Ausweiseart



AmbulancePad Bereich:

Rettungstechn. Daten > Patientendaten

Rolle

Liste der Rollen (Funktion) die ein Mitarbeiter während einer Schicht auf einem Fahrzeug einnehmen kann.

Beschreibung:	Fahrer
Sortierung:	1
Export Code:	1
<input checked="" type="checkbox"/> Auswahl nur aus Liste erlaubt? :	
<input checked="" type="checkbox"/> Qualifikation anzeigen? :	
<input type="checkbox"/> Fachgebiet anzeigen? :	
<input type="checkbox"/> Herkunft anzeigen? :	
<input type="checkbox"/> ist Arzt? :	
<input checked="" type="checkbox"/> erlaube Anmeldung mit Name? :	
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Auswahl nur aus Liste erlauben?: Es können nur Mitarbeiter ausgewählt werden die im System hinterlegt sind. Es ist keine Freitexteingabe erlaubt.

Qualifikation anzeigen?: Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird das Feld Qualifikation angezeigt sobald die entsprechende Rolle ausgewählt wurde.

Fachgebiet anzeigen?: Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird das Feld Fachgebiet angezeigt sobald die entsprechende Rolle ausgewählt wurde.

Herkunft anzeigen?: Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird das Feld Herkunft angezeigt sobald die entsprechende Rolle ausgewählt wurde.

Ist Arzt?: Gibt an ob es sich bei dieser Rolle um einen Arzt handelt.

erlaube Anmeldung mit Name?: Wenn diese Option eingeschaltet ist, kann der Mitarbeiter aus einer Liste ausgewählt werden. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, kann der sich der Mitarbeiter nur durch Eingabe seiner Mitarbeiternummer oder durch Scannen eines Barcodes ausgewählt werden.



AmbulancePad Bereich:

Rettungstechn. Daten > Rettungsmittel bzw. Schichtanmeldung

Radar Falle

Liste von bekannten Radarfallen

Beschreibung:	Emil Klöti-Strasse 18 (Semi-Anla
Sortierung:	
Export Code:	4
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Standort der Radarfalle

 AmbulancePad Bereich: Abrechnung
--

Unterstütze Panel

Erlaubt dem Administrator einzelne Bereiche in AmbulancePad ein- bzw. auszublenzen

Beschreibung:	psyche_first
<input checked="" type="checkbox"/> aktiv :	
<input type="checkbox"/> Pflichteingabe? :	
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Name des Bereiches in AmbulancePad

Aktiv: Schaltet das Panel ein bzw. aus.

Pflichteingabe: Wird aktuell nicht unterstützt

Verfügbare Stammdaten

Die Liste „verfügbare Stammdaten“, beinhaltet alle Stammdatenlisten, die innerhalb der AmbulancePad Version nutzbar sind.

Bezeichnung	Entity	aktiv	Pflichteingabe?	Freitext erlaubt?	Keyboard anzeigen?	Wert	Anzahl erlaubte Einträge	verknüpfte Datenfelder	SysAdmin?
applicationformchoice	Medikamente - Administration	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
answers	Übergabe - Benutzerdefinierte Antworten	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
bases	Allgemein - Wachen	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
consignment_stamp	Abrechnung - Transportschein Stempel	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
country	Allgemein - Länderliste	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
devices	Allgemein - Geräte	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
illness_data	Diagnose - Erkrankungen	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Folgende Einstellungen können durch den Administrator angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass einige Konfigurationen nicht für alle Stammdatenlisten verfügbar sind:

- **aktiv** – wurde eine Stammdatenliste auf aktiv gesetzt, kann diese über die Dropdown-Liste ausgewählt und bearbeitet werden. Zusätzlich wird das dazugehörige Datenfeld in der AmbulancePad Benutzeroberfläche angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Felder abschalten weiter unten.
- **Pflichteingabe?** – schaltet die Pflichteingabe für dieses Datenfeld ein.
- **Freitext erlaubt?** – gibt an, ob in diesem Datenfeld ein Freitext eingeben werden darf oder nur eine Auswahl aus der Stammdatenliste erlaubt ist.
- **Keyboard anzeigen?** – gibt an, ob in diesem Feld die Bildschirmstatur angezeigt werden soll.
- **Wert** – In diesem Feld können weitere Einstellungen zu Pflichtfeldern vorgenommen werden. Bitte wenden Sie sich an die Supportabteilung bezüglich Fragen zur Konfiguration.

Die folgenden Felder sind schreibgeschützt und können nur durch das Support Team und die Entwicklungsabteilung von ZOLL geändert werden.

- **Verknüpfte Datenfelder**
- **Bezeichnung**
- **Entity**
- **Anzahl erlaubte Einträge**
- **Sysadmin**

Felder abschalten

Sobald das aktiv Kästchen für eine Stammdatenliste abgewählt wurde, steht diese Liste nicht mehr im Bereich der Stammdatenverwaltung zur Verfügung. Zusätzlich wird das entsprechende Feld auch nicht mehr in AmbulancePad angezeigt. Folgende Felder können von einem Administrator abgeschaltet werden:

Einsatzdaten

- Beschreibung
- 1. Rettungsmittel
- MRSA Bogen
- Einsatzstichwort
- Transportgrund
- Priorität
- Transportart
- NEF Status
- Alarm angemessen

Zeiten überschritten

- Reaktionszeit
- Fahrtzeit
- Zeit an Einsatzstelle
- Fahrtzeit Klinik



Anmerkung: Wurden alle 4 Felder deaktiviert, wird der Knopf “Zeiten überschritten” nicht mehr im Bereich Einsatzdaten angezeigt.

Patientendaten

- Land – blendet gleichzeitig das Feld **Nationalität** ebenfalls aus
- Bundesland
- Herkunft
- Krankenkasse – blendet gleichzeitig die Felder **Versicherten-Nr., EU Nummer, Kassen-Nr, Status und gültig bis** ebenfalls aus
- Ausweis Art – blendet gleichzeitig das Feld **Ausweis Nr.** ebenfalls aus
- Arzt / Klinik – blendet gleichzeitig die Felder **Betriebsstätten Nr.** und **LANR** ebenfalls aus

Anamnese SAMPLER

- Allergien
- Vormedikation
- Medizinische Vorgeschichte
- Letzte orale Einnahme
- Letzte Ausscheidung
- Ereignisse vor Symptomen
- Risikofaktoren
- Provokation
- Linderung
- Qualität

- Region
- Symptom Stärke
- Zeitl. Verlauf
- Veränderung

Erstbefund – EKG Bereich

- Telemetrie Nein (Begründung)
- Telemetrie Ja (Ergebnis/Rückmeldung)



Anmerkung: Wurden beide Felder ausgeschaltet, wird im Bereich **12 Kanal EKG / Telemetrie** nur noch **Telemetrie Ja** und **Telemetrie Nein** angezeigt.

Transportziel

- Beschreibung
- Klinik Status
- Kein Transport
- Klinikwahl
- Besonderheiten

Übergabe

- Patient Übergeben an
 - Funktion
- Gewaltanwendung gegen Personal
 - Angreifer
 - Betroffener
 - Art der Gewaltanwendunge
 - Folge der Gewaltanwendung



Anmerkung: Wenn alle vier Felder im Bereich **Gewaltanwendung gegen Personal** ausgeschaltet wurde, wird der komplette Bereich aus dem Bereich **Übergabe** entfernt.

Abrechnung

- Art
- Tarif
- Transportmittel
- Sonstige

Radar Falle

- Ort Radar Falle



Anmerkung: Wenn dieses Feld abgeschaltet wurde, wird gleichzeitig auch der Knopf **Radar Falle**

aus dem Bereich Abrechnung entfernt.

Transportschein Stempel (nur für Deutschland)

Liste der Stempel für den Transportschein

Beschreibung	Zelle 1	Zelle 1	Zelle 1
BF	Notarzdienst	Berufsfeuerwehr Wuppertal	August-Bebel-Str. 55

Beschreibung: Name der Organisation

Zeile 1-6: Adresseinformation



AmbulancePad Bereich:
Ausdruck > Transportschein

Einweisender

Liste der Ärzte/Organisationen.

Stammdaten Einweiser				
Aktion wählen	Einweiser-ID	Einweisername	Einweisersuche	Reihenfolge
	4	Rüscher Rudolf Dr.	Rüscher Rudolf Dr. (Andelsbuch) (951781)	
	5	Ganthaler Franz Anton Dr.	Ganthaler Franz Anton Dr. (Au) (356443)	
	6	Ganthaler Franz Josef Dr.	Ganthaler Franz Josef Dr. (Au) (751069)	
	8	Haus St. Josef in Au	Haus St. Josef in Au (Au) (819955)	

Einweiser-ID: Eine einmalige Identifikationsnummer, die benutzt wird, um den Arzt/die Organisation zu identifizieren.

Einweisername: Person/Organization, die den Patienten einweist.

Einweisersuche: zusätzliche Einweiserinformationen



AmbulancePad location:
Patient > Fahrt > Einweiser

Risikofaktoren

Liste von Risikofaktoren eines Patienten wie etwa Diabetes oder Übergewicht.

general data		typesdefaultdata.edanger
actions-label		text-label
		Gefahrgut
		Gewalt
		Strom
		Tiere
		Verkehr
		Keine
		Feuer

Text: Beschreibung von Risikofaktoren eines Patienten



AmbulancePad-Bereich:

Anamnese > Vorrangig > Bekannte Risikofaktoren
 Sampler > Diagnose > Risikofaktoren

Fachgebieteer Ärzte

Liste der Fachgebiete, die ein Notarzt haben kann.

Stammdaten		Fachgebiet Ärzte
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:37 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche U		
Aktion wählen		Beschreibung
		Innere
		andere
		Anästhesie
		Allgemeinmedizin

Beschreibung: die Art der Spezialisierung, die ein Notarzt haben kann.



AmbulancePad-Bereich:

Besatzungswechsel > Besatzung > Fachgebiet

Schweizer Medikamente (nur Schweizer Version)

Liste der Medikamente und zugehörigen Dosen.

Stammdaten		Swiss Medics
Aktion wählen	Medikamente	
		ACAMPROSATE BIOGARAN 333 mg
		ACAMPROSATE REF 333 mg
		ACAMPROSATE SET 333 mg
		ACARBOSE ARROW 100 mg

Medikamente: Beschreibt die Medikamente und die zugehörigen Dosen.



AmbulancePad-Bereich:

SAMPLER > Medikation

Symptom Qualität

Liste der möglichen Symptome eines Patienten.

Stammdaten		Symptom Qualität
Aktion wählen	Beschreibung	Sortierung
		stechend
		drückend
		krampfartig

Beschreibung: Definiert das Symptom.



AmbulancePad-Bereich:

Erstuntersuchung > Anamneses > Symptom

Sampler > Diagnose > Qualität

Symptom-Region

Liste der Körperstellen, an denen die Symptome des Patienten auftreten.

Stammdaten		Symptom Region	
Aktion wählen	Beschreibung	Sortierung	Export Code
		zum Nacken	
		zum Kopf	
		zum rechten Arm	
		zum linken Arm	

Beschreibung: Körperteil oder Körperbereich



AmbulancePad-Bereich:

Sampler > Diagnose > Region

Anamnese > Region

Teamliste (nur Schweizer Version)

Liste der Teams.

Stammdaten		Teamliste	neuer Eintrag			
Aktion wählen	Team	Team kurz	Wache	Einsatzleiter	NEF Einsatz	Organisation
	Medics	464	Rettungswache	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kuessnacht

Team: Name des Teams

Team kurz: Kurzname für das Team (falls vorhanden)

Wache: Station, der das Team angehört.

Einsatzleiter: Ankreuzen, falls diesem Team ein Leiter angehört.

NEF-Einsatz: Zeigt an, dass dies nur ein NEF-Team ist.

Service-ID: das interne Kennzeichen für einen Rettungsdienst



AmbulancePad-Bereich:



> Fahrt > Team

Textblöcke

Liste der möglichen Ausdrücke in AmbulancePad, die das System einem Benutzer anzeigt, wenn er auf das ABC-Icon klickt.

Stammdaten		Textblöcke	alle Einträge löschen	neuer Eintrag
Aktion wählen	Text	Sortierung		
	Verdacht auf	0		
	im Haus	0		
	mehrmals	0		
	Patient klagt über	0		

Text: Textausdrücke



AmbulancePad-Bereich:
Verschiedene Stellen in AmbulancePad

Zeit und Zeitbereiche

Liste der unterschiedlichen Zeitlängen.

Stammdaten		Zeitbereiche
letzte Übertragung am 10.12.15 15:56 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung)		
Aktion wählen	Beschreibung	
	< 1 Stunde	
	< 4 Stunden	
	< 12 Stunden	
	vor ~1 Tag	

Beschreibung: Länge der Zeit



AmbulancePad-Bereich:
Erscheint an verschiedenen Stellen, z. B. Erstuntersuchung > Krankengeschichte > Letzte Mahlzeit

Transfer (nur französische Version)

Liste der möglichen Transfertypen.

Données de base		Transfert
Choix	transfert-label	
	SAPEUR-POMPIER SEUL	
	AMBULANCE PRIVEE SEULE	
	PARAMEDICALISE	

Transfer-Label: Beschreibung der Art des Transfers



AmbulancePad-Bereich:
Zielfahrt 2 > Transfer

Transportgrund

Liste der möglichen Transportgründe.

Stammdaten		Transport reason
1	2	
Aktion wählen	Beschreibung	
	Raufhandel	
	Verbrechen (Verdacht)	
	Tierverletzung	
	Kontrolluntersuchung KH, Arzt	
	Rehabilitaion (Rehabilitationsaufenthalt)	
	Strahlentherapie und Chemotherapie DA	
	Dialyse DA	

Beschreibung: Grund für den Transport



AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Transportgrund

Transportarten

Position des Patienten während des Transports.

Stammdaten		Transportarten	alle Einträge
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:56 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:56)			
Aktion wählen	Beschreibung		
	liegend		
	sitzend		

Beschreibung: Position des Patienten während des Transports



AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Art

Art des Notfalls

Liste der Beschwerden, die ein Patient melden kann.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...	20	21
please select	Text												
			akuter Harnverhalt										
			Alkohol und Tabletten Mischintoxikation										
			Alkoholeinfluss										
			allergische Reaktion										

Text: Beschreibung der Beschwerde



AmbulancePad-Bereich:

Sampler > Diagnose > Hauptbeschwerde

Einsatzgründe

Liste der Transportgründe.

Aktion wählen	Beschreibung	Med. Daten Notwendig?	Pat. Daten Notwendig?	Abrechn., Daten Notwendig?	Anamnese Notwendig?	Transp. Daten Notwendig?	Sortierung	Export Code
	Blut+Medikamente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1103	1103
	Dialyse	<input checked="" type="checkbox"/>	1106	1106				
	Chir. Notfall	<input checked="" type="checkbox"/>	1105	1105				
	Einweisung	<input checked="" type="checkbox"/>	1107	1107				

Beschreibung: Einsatzgrund

Für diese Art von Notfall kreuzen Sie (ja) an, falls der AmbulancePad-Benutzer eine der folgenden Datenarten eingeben muss:

- Med.data (Medizinische Daten) notwendig
- Pat.data (Patientendaten) notwendig
- Abrechnungsdaten notwendig
- Erstbefund notwendig
- Transp.data (Transportdaten) notwendig



AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Transportgrund

Einheiten Medikamente

Liste der Dosierungseinheiten für Medikamente.

Stammdaten		Einheiten Medikamente	X alle Einträge
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:44 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:44)			
Aktion wählen	Beschreibung		
	Perfusor		
	Dosieraerosol		
	mg		

Beschreibung: Beschreibt die Dosierungseinheiten bei Medikamenten.



AmbulancePad-Bereich:

Maßnahmen Medikamente > > Einheit

Rettungsmittel

Liste der Ambulanzfahrzeuge.

Stammdaten		Rettungsmittel				X alle Einträge
Letzte Übertragung am 15.02.16 10:35 von Benutzer 'admin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 15.02.16 10:35)						
1	2	3				
Aktion wählen	Organisation	Beschreibung	KFZ Kennzeichen	Art	Wache ID	
	Feuerwehr Essen	W 02-RTW-12	W-RD 6552	RTW	FRW2	
	Feuerwehr Essen	W 01-NEF-01	W-RD 6511	NEF	NEW Elberfeld	
	Feuerwehr Essen	W 01-NEF-02	W-RD 6509	NEF	HFRW	

Service-ID: Identifikationsnummer des Fahrzeugs

Beschreibung: Fahrzeugbeschreibung

KFZ-Kennzeichen: Nummer wie sie auf dem Nummernschild zu lesen ist.

Art: Fahrzeugart wie etwa RTW oder NEF

Wachen-ID: Identifikationsnummer, die der mit dem Fahrzeug verbundenen Rettungsstation zugewiesen ist

Inventarnummer: Inventarnummer oder interne Fahrzeugnummer

Rufsignal: Identifikationsname/-nummer des Rettungsfahrzeugs

GPS-Name: Name, für die Navigation die auf dieses Fahrzeug benutzt wird.



AmbulancePad-Bereich:

Besatzungswechsel > Fahrzeug

Fahrzeug Art

Liste der Fahrzeugarten

Beschreibung: <input type="text" value="NEF"/>						
Protokoll Typ: <input type="text" value="NEF"/>						
verfügbare Rollen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verfügbar</th> <th>Ausgewählt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Fahrer Transportführer Notarzt Praktikant</td> </tr> </tbody> </table>	Verfügbar	Ausgewählt		Fahrer Transportführer Notarzt Praktikant	
Verfügbar	Ausgewählt					
	Fahrer Transportführer Notarzt Praktikant					
Rolle benötigt?:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verfügbar</th> <th>Ausgewählt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Praktikant Transportführer</td> <td>Fahrer Notarzt</td> </tr> </tbody> </table>	Verfügbar	Ausgewählt	Praktikant Transportführer	Fahrer Notarzt	
Verfügbar	Ausgewählt					
Praktikant Transportführer	Fahrer Notarzt					
Sortierung: <input type="text" value="3"/>						
Export Code: <input type="text" value="3"/>						
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>						

Beschreibung: Art des Fahrzeuges (KTW, RTW, NEF, etc.)

Protokoll Typ: Dem Fahrzeug zugeordneter Protokoll Typ

Verfügbare Rollen: Rollen / Funktionen die auf diesem Fahrzeug Typ besetzt werden können

Rolle benötigt?: Rollen die für diesen Fahrzeug Typ mindestens besetzt werden müssen (Beispiel: NEF benötigt Fahrer und Notarzt, Helikopter benötigt Pilot, etc.)



AmbulancePad Bereich:

Rettungstechn. Daten > Rettungsmittel

Fahrzeuge Funkrufnummer

Liste der Funkrufnummern.

Beschreibung:	<input type="text" value="W 06-RTW-01"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
Fahrzeug:	<input type="text" value="Bitte Auswählen"/>
Fahrzeug Typ Filter:	<input type="text" value="Bitte Auswählen"/>
Wache:	<input type="text" value="Bitte Auswählen"/>
Organisation:	<input type="text" value="Feuerwehr Wuppertal"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Name der Funkrufnummer

Fahrzeug: Eine Funkrufnummer kann direkt einem Fahrzeug zugeordnet werden (optional)

Fahrzeug Typ Filter: Eine Funkrufnummer kann direkt einem Fahrzeug Typ zugeordnet werden (optional)

Wache: Eine Funkrufnummer kann direkt einer Wache zugeordnet (optional)

Organisation: Eine Funkrufnummer kann direkt einer Organisation zugeordnet (optional)



AmbulancePad Bereich:
Rettungstechn. Daten > Rettungsmittel

Fahrzeuge

Liste der Fahrzeuge

Beschreibung:	<input type="text" value="W-RD 6551"/>
Sortierung:	<input type="text"/>
Export Code:	<input type="text"/>
Organisation:	<input type="text" value="Feuerwehr Wuppertal"/>
Fahrzeug Art:	<input type="text" value="RTW"/>
Wache:	<input type="text" value="HFRW"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Beschreibung: Bezeichnung / Name des Fahrzeugs

Fahrzeug Art: Ein Fahrzeug kann direkt einer Fahrzeug Art zugeordnet werden (optional)

Wache: Ein Fahrzeug kann direkt einer Wache zugeordnet (optional)

Organisation: Ein Fahrzeug kann direkt einer Organisation zugeordnet (optional)



AmbulancePad Bereich:

Rettungstechn. Daten > Rettungsmittel

Gewalt Angreifer

Angabe von wem der Angriff ausgegangen ist.

Beschreibung:	Patient
Sortierung:	1
Export Code:	4
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	



AmbulancePad Bereich:

Übergabe > Gewaltanwendung gegen Personal

Gewalt Art

Art des Übergriffs.

Beschreibung:	Verbale Drohung
Sortierung:	
Export Code:	296
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	



AmbulancePad Bereich:

Übergabe > Gewaltanwendung gegen Personal

Gewalt Ergebniss

Folgen der Gewaltanwendung.

Beschreibung:	Körperverletzung
Sortierung:	
Export Code:	326
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

 **AmbulancePad Bereich:**
Übergabe > Gewaltausübung gegen Personal

Gewalt Betroffener

Angabe des betroffenen der Gewaltausübung.

Beschreibung:	Eigenes Personal
Sortierung:	
Export Code:	
<input type="checkbox"/> Kommentar :	
Organisation:	Bitte Auswählen
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

 **AmbulancePad Bereich:**
Übergabe > Gewaltausübung gegen Personal

Fahrzeugeinheit (nur österreichische Version)

Liste der Einheiten.

Stammdaten		Fahrzeug Einheit				
1	2	3	4	5	6	7
Aktion wählen	Einheit					
			7.202			
			7.221			
			7.222			
			7.225			

Einheit: Identifikationsnummer/-name für die Einheit




AmbulancePad-Bereich:

Besatzung/Wagen > Fahrt > Einheit

Index

Die Indexseite zeigt Ihren Benutzernamen, die Berechtigung und den Zeitpunkt der letzten Anmeldung am System und einen Link zur Änderung Ihres Passworts.

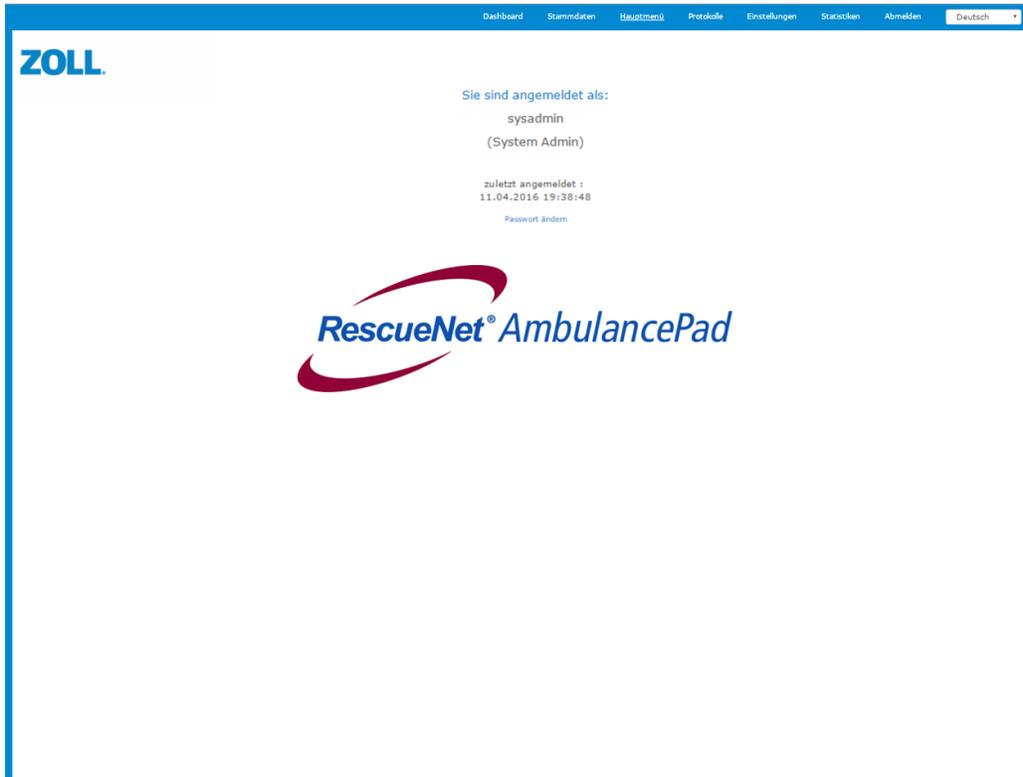

Protokollliste

Benutzen Sie die Protokollliste, um Patientenversorgungsprotokolle anzusehen, die von AmbulancePad übermittelt wurden und um zwei Protokolle zusammenzufügen. Um ein oder mehrere Protokolle einfach zu finden, bietet diese Seite einen Filtermechanismus und eine Suchmöglichkeit.

Die Werkzeugleiste der Protokollliste wird oben auf der Seite angezeigt. Während die folgende Grafik alle für den Systemadministrator sichtbaren Optionen zeigt, können die für Sie sichtbaren Optionen abhängig von Ihren Genehmigungen abweichen.



Anklicken, um auszuwählen, welche Spalten auf Ihrer Seite angezeigt werden (siehe [Anpassen der Datenspalten in Ihrer Protokollliste](#)).

Filtert Protokolle nach Jahr und Monat. Das System setzt standardmäßig aktuelles Datum (siehe [Anzeige von Protokollen nach Jahr und Monat](#)).

Klicken Sie auf den Papierkorb, um alle deaktivierten Protokolle anzusehen (siehe [Papierkorb](#)).

Klicken Sie die Auswahl an, um nicht abgerechnete Protokolle oder Protokolle anzusehen, die noch nicht auf Qualitätseinhaltung geprüft wurden (siehe [Protokoll für Prüfung markiere](#) und [Protokoll für Abrechnung prüfen](#)).

Suchfeld. Geben Sie einen Wert ein, um alle den Kriterien entsprechenden Protokolle anzuzeigen. Klick Sie auf , um die Suche auszuführen (siehe [Protokolle suchen](#)).

Standardmäßig zeigt das System 25 Einträge pro Seite an. Klicken Sie auf den Pfeil, um den Wert zu verkleinern oder zu vergrößern.

Anpassen der Datenspalten in Ihrer Protokollliste

Sie können Ihre Seite anpassen, um nur die Spalten anzuzeigen, die Sie sehen möchten. Das System benutzt die Liste der Spalten, die Sie auswählen, wenn Sie einen Filter erstellen.


1. Im Navigationsbalken Protokollliste klicken Sie auf . Eine Liste mit allen möglichen Spalten wird angezeigt.



2. Um die Spalten für die Anzeige auszuwählen, setzen Sie einen Haken in das Kästchen neben dem Spaltennamen.

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Es ist möglich, die Spalten in der Protokoll-Liste per Drag & Drop an eine andere Position zu verschieben.

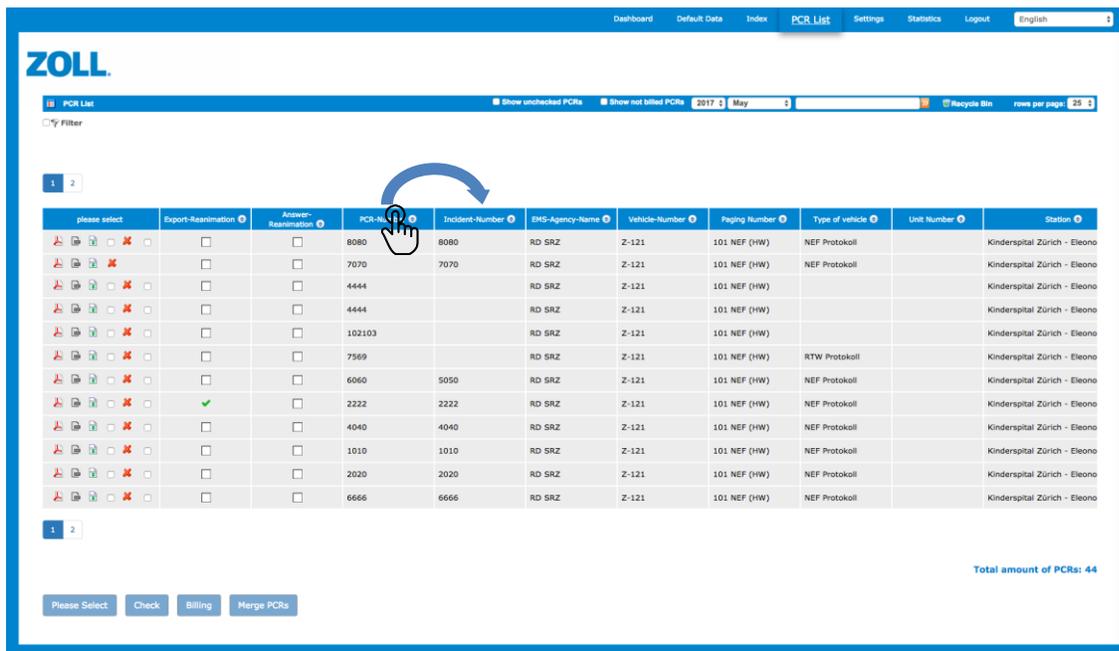

Protokoll für Prüfung markieren

Das System ermöglicht es Ihnen, alle ungeprüften Protokolle anzusehen und diejenigen zu markieren, die noch nicht auf Qualitätseinhaltung geprüft wurden.

1. In der Werkzeugleiste Protokollliste setzen Sie einen Haken bei „Ungeprüfte Protokolle“. Das System zeigt die Protokolle an, die noch nicht geprüft wurden.
2. Für jedes Protokoll, das Sie prüfen möchten, setzen Sie einen Haken in der Spalte QS.
3. Klicken Sie auf **Prüfen** unten in der Liste. Das System ersetzt das Auswahlfeld unter der Spalte QS mit der Anmelde-ID der Person, die die Prüfung durchführte. Klicken Sie auf die Anmelde-ID, um die Qualitätsprüfung zurückzusetzen, damit ein Benutzer es erneut prüfen kann.



Anmerkungen:

- Nur Benutzer mit Kontrolleurs- und Qualitätsprüfungs-Genehmigung können Qualitätsprüfungen durchführen.
- Nur Benutzer mit den folgenden Genehmigungen können eine Qualitätsprüfung zurücksetzen:
 - ❖ Wachenleiter

- ❖ QA Organisation
- ❖ QA Admin
- ❖ Administrator

Protokoll zur Abrechnung freigeben

Das System ermöglicht es Ihnen, nicht abgerechnete Protokolle anzusehen und Protokolle zu markieren, die abgerechnet werden müssen.

1. In der Werkzeugleiste Protokollliste setzen Sie einen Haken bei „Nicht abgerechnete Protokolle“. Das System zeigt die Protokolle an, die noch nicht abgerechnet wurden.
2. Für jedes Protokoll, das Sie abrechnen möchten, setzen Sie einen Haken in der Spalte Abrechnung.
3. Klicken Sie Abrechnung unten in der Liste. Nach dem Klick auf Abrechnung lädt das System die Daten für das Protokoll (im XML-Format) in eine Zip-Datei, die sie sofort herunterladen können. Das System ersetzt das Auswahlfeld unter der Spalte Abrechnung mit der Anmelde-ID der Person, die das Protokoll abrechnete. Klicken Sie auf die Anmelde-ID, um das Abrechnungskennzeichen zurückzusetzen, damit Sie erneut abrechnen können.



Anmerkungen:

- Nur Benutzer mit entsprechender Berechtigung können das Protokoll als abgerechnet markieren.
- Nur Benutzer mit den folgenden Genehmigungen können das Abrechnungskennzeichen zurücksetzen:
 - ❖ Wachenleiter
 - ❖ Administrator

Anzeige von Protokollen nach Jahr und Monat

Die Felder Jahr und Monat in der Werkzeugleiste der Protokollliste bestimmen die Protokollliste, die angezeigt wird. Wenn Sie zum Beispiel den November 2015 auswählen, zeigt das System alle Protokolle an, die in diesem Monat des Jahres erstellt wurden. Sie können diese Felder benutzen, um in der Vergangenheit erstellte Protokolle anzusehen. Sie können außerdem Protokolle nach Quartalen innerhalb des gewählten Jahres anzeigen lassen.

Protokolle suchen

Benutzen Sie die Suchmöglichkeit in der Werkzeugleiste der Protokollliste, um ein bestimmtes Protokoll zu suchen oder eine Liste der Protokolle mit gemeinsamen Datenelementen anzeigen zu lassen.


1. Geben Sie Ihre Suchkriterien in das Suchfeld ein (schreibungsunabhängig).
2. Um die Suche auszuführen, klicken Sie auf  oder drücken Sie die Eingabetaste.

- Um die Suche zurückzusetzen, löschen Sie den Text im Suchfeld und drücken Sie die Eingabetaste.


Filter anwenden

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen nur die Protokolle anzusehen, die in einer bestimmten Spalte einen Wert enthalten oder nicht enthalten. Falls eingegeben, können Sie nach einem bestimmten Wert filtern, der in einer Spalte vorhanden ist, oder Sie können nach einem Teil dieses Werts suchen.


- Klicken Sie auf den Kasten Filter  Filter .

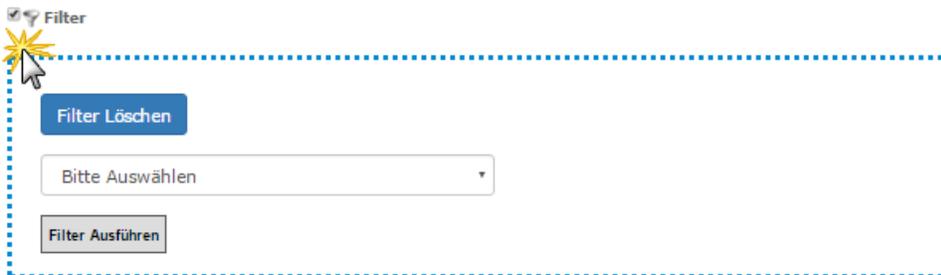


- Klicken Sie das Feld an, um die Spaltenüberschriften anzuzeigen.

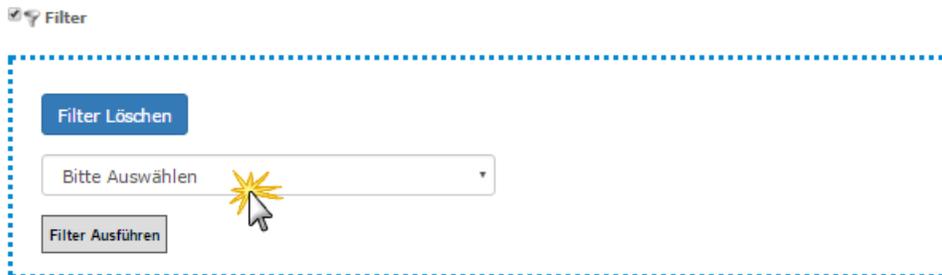

- Klicken Sie auf den Namen der Kopfzeile, um sie auszuwählen.

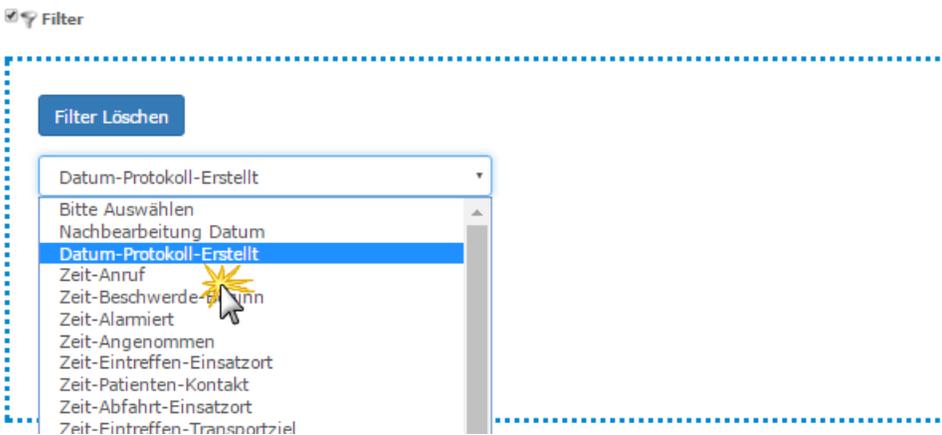

- Das System zeigt verschiedene Daten an, aus denen Sie auswählen können. Im Beispiel unten können Sie alle Protokolle nach Datum filtern, an dem die Protokolle erstellt wurden, oder Sie sich dafür entscheiden, nach einem bestimmten Datum zu filtern.

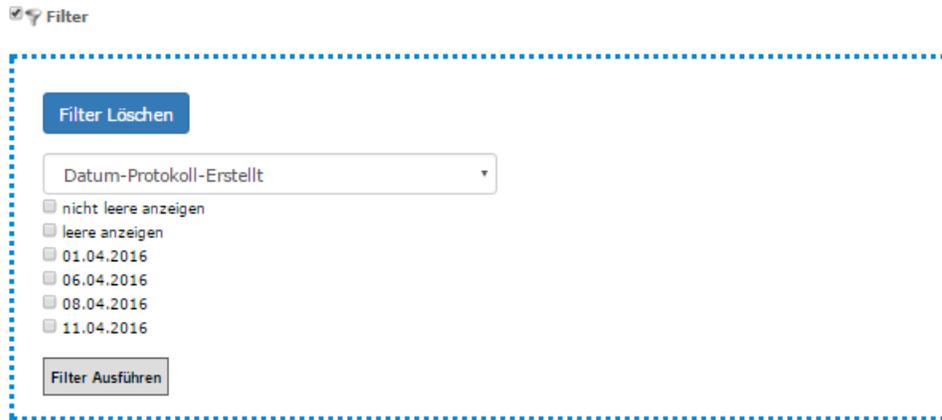


Leere nicht anzeigen: Anzeige aller Protokolle, die in den von Ihnen gewählten Spalten Informationen enthalten. Im Beispiel oben würde das System alle Protokolle anzeigen, die ein Protokolldatum haben.

Leere anzeigen: Anzeige aller Protokolle, die bestimmte Informationen in den von Ihnen gewählten Spalten nicht enthalten. Im Beispiel oben würde das System alle Protokolle anzeigen, die kein Protokolldatum haben.



Anmerkung: Um Ihre Ergebnisse noch weiter zu definieren, können Sie mehrere Werte auswählen.


- Klicken Sie auf „Filter ausführen“.

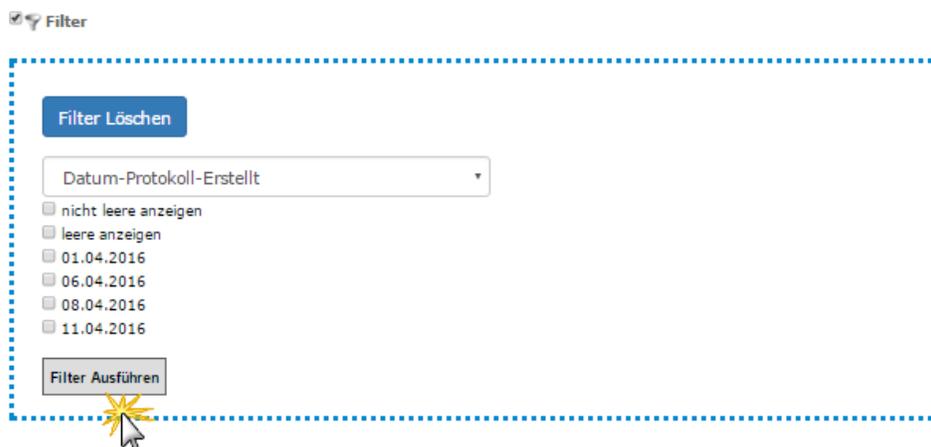

- Das System zeigt nur die Protokolle an, die mit dem Filter übereinstimmen, und zur Erinnerung daran, dass ein Filter aktiv ist, wird das Filter-Icon grün hervorgehoben.



7. Um den Filter zu entfernen, klicken Sie auf das grüne Filter-Icon und dann auf „Filter löschen“.

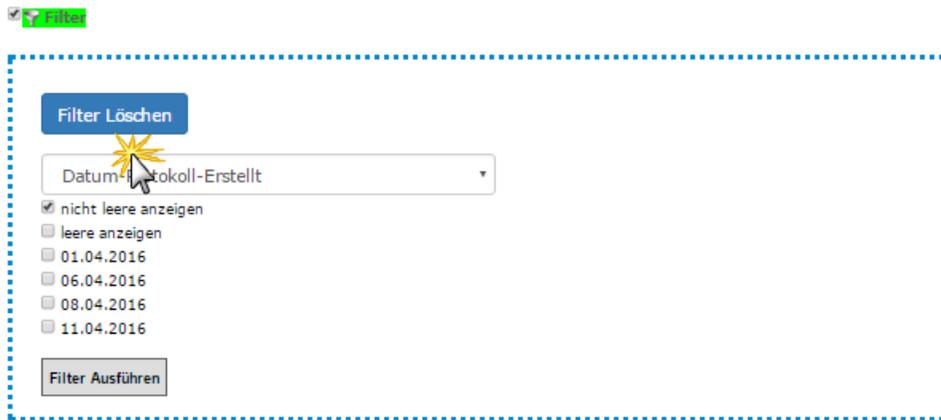

Protokolllisten-Optionen

Aktion wählen	QS	Abrechnung
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Die folgenden Aktionen werden in der Spalte „Aktion wählen“ angezeigt:

- Zeigt eine PDF-Datei des aktuellen Protokolls an, die möglicherweise Änderungen seit dem Original enthalten kann.
- Zeigt eine PDF-Datei des ursprünglichen Protokolls an.
- Zeigt den Inhalt der XML Importdatei an (nur für Rolle Administrators verfügbar)
- Es kann Fälle geben, in denen das System ein Protokoll mit unvollständigen Feldern erhält oder eines, das bearbeitet werden muss. Falls das passiert, können Sie das Protokoll zur Nachbearbeitung markieren. Für mehr Informationen siehe [Nachbearbeitung](#).
- Löscht das Protokoll und verschiebt es in den Papierkorb. Für mehr Informationen siehe [Papierkorb](#).
- Führt zwei Protokolle zusammen – ein manuell erstelltes und eins aus dem Einsatzleitsystem. Benutzer können ein Protokoll manuell erstellen, falls das vom Einsatzleitsystem gesendete Protokoll nicht rechtzeitig auf dem Tablet eintrifft. Wenn das Protokoll vom Einsatzleitsystem später auf dem

Tablet eintrifft, enthält die Protokollliste zwei Protokolle für den gleichen Vorfall. Um die Dopplung der Protokolle zu beheben, können Sie die zwei Protokolle zu einem zusammenführen.


Um zwei Protokolle zusammenzuführen:

- In der Zeile jedes betroffenen Protokolls wählen Sie das Feld „Protokoll zusammenführen“ (letztes Auswahlfeld) in der Spalte „Bitte auswählen“.
- Wenn Sie zwei Protokolle gewählt haben, wird der Button „Protokolle zusammenführen“ aktiviert. Klicken Sie auf den Button „Protokoll zusammenführen“.
- Beide Protokolle werden aus der Liste entfernt, während das System im Hintergrund an der Zusammenführung arbeitet. Das Zusammenführen von Protokollen kann bis zu 15 Minuten dauern.
- Nach Abschluss zeigt das System das zusammengeführte Protokoll in der Liste an.



Anmerkung: Um Protokolle zusammenzuführen, muss ein Benutzer ein Protokoll manuell erstellen und das Einsatzleitsystem das andere. Im zusammengeführten Protokoll benutzt das System falls verfügbar den allgemeinen Schlüssel, die Einsatznummer, das Einsatzdatum und die Zeitfelder aus dem Einsatzsystem. Das System benutzt falls verfügbar alle anderen Felder aus dem manuell erstellen Protokoll.

Papierkorb

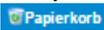Wenn ein Benutzer ein Protokoll aus der Protokollliste entfernt, verschiebt das System es in den Papierkorb. Sie können das Protokoll im Papierkorb ansehen, indem Sie auf  in der Werkzeugleiste der Protokollliste klicken.

Aktion wählen	QS	Abrechnung	Nachbearbeitung Datum	Datum-Protokoll-Erstell	Zeit-Anruf	Zeit-Beschwerde-Beginn	Zeit-Alarmiert	Zeit-Angenommen	Zeit-Entreffen-Einsatzort
				06.04.16					
				01.04.16			13:14:12		

-  Anklicken, um das Protokoll in der aktiven Liste wiederherzustellen.
-  Blendet das Protokoll aus der Ansicht aus. In diesem Zustand hat nur der Systemadministrator die Möglichkeit, das Protokoll zu reaktivieren.

Klicken Sie auf , um zur aktiven Protokollliste zurückzukehren.

Nachbearbeitung

Falls das Protokoll Änderungen benötigt:

1. Setzen Sie einen Haken im Kasten Nachbearbeitung des entsprechenden Protokolls.
2. Klicken Sie auf **Bitte auswählen** unten auf der Seite und wählen Sie den Namen des Benutzers aus, der das Protokoll in AmbulancePad ändern muss.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Das System fügt den Namen, dem Sie das Protokoll zugewiesen haben, in die Spalte Nachbearbeitungsname und das Datum, an dem Sie das Protokoll abgesendet haben, in die Spalte Nachbearbeitungsdatum ein. Nachdem Sie ein Protokoll zur Nachbearbeitung markieren, sendet das System das Protokoll zum von Ihnen angegebenen AmbulancePad-Benutzer. Er wird die folgenden Schritte ausführen, um das Protokoll zu ändern und es dann an das Administrations-Tool zurückzusenden.



3/15/2016 | 9:49:23 AM

Driver: Whannel. John Paramedic: Demo. Stefan Station: Demo Station 1 Type: ALS

PCR No.	Lastname	Incident Location	Destination	Alarm	Date
12588					3/7/2016
4444					3/9/2016
5555					3/15/2016

Buttons: New PCR, Edit PCR, Print PCR, Update, Options, Logoff

3/15/2016 | 9:57:35 AM

Driver: Whannel. John Paramedic: Demo. Stefan Station: Demo Station 1 Type: ALS

PCR No.	Lastname	Incident Location	Destination	Alarm	Date
5555					3/7/2016

Buttons: New PCR, Edit PCR, Print PCR, Update, Options, Logoff

Nach der Änderung des Protokolls durch den Benutzer wird das System es automatisch auf den Server und das Web-Portal hochladen.

Anmerkung: Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis das Protokoll auf AmbulancePad Administration Tool > Protokollliste erscheint.

Einstellungen

Benutzen Sie die Einstellungen, um konfigurierte Konten anzusehen, bestehende Konten zu ändern/löschen, benutzerdefinierte Übersetzungstexte hinzuzufügen (Reiter Übersetzung) und den Anmeldeverlauf zu sehen (Reiter Info).

Wenn Sie auf **Einstellungen** im Navigationsbalken klicken, zeigt das System Informationen über alle konfigurierten Konten an.

Aktion wählen	Organisation	Benutzername	Passwort	Vorname	Nachname	E-mail Adresse	Account gesperrt	Account abgelaufen	Berechtigung	Accountgültigkeit bis
	Feuerwehr Essen	testtest		Werner	Ahnhorn		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wachenleiter	
		sysadmin					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	System Admin	
		siegen					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Administrator	
		admin					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Administrator	

Auf dieser Seite können Sie ein neues Konto hinzufügen, ein bestehendes Konto ändern und löschen.

Konto hinzufügen/löschen

1. Um
 - a. **ein Konto hinzuzufügen:** Klicken Sie auf
 - b. **ein Konto zu ändern:** Klicken Sie auf

Das Fenster „Einstellungen hinzufügen/ändern“ wird über der Kontoliste angezeigt. Wenn Sie ein Konto ändern, wird das System die Felder mit den Kontoinformationen füllen. Bei einem neuen Konto sind die Felder wie unten gezeigt leer.

Organisation:	Bitte Auswählen
Benutzername:	
Passwort:	
Vorname:	
Nachname:	
E-mail Adresse:	
Account gesperrt :	<input type="checkbox"/>
Account abgelaufen :	<input type="checkbox"/>
Berechtigung:	Protokoll Admin
Accountgültigkeit bis:	
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

2. **Service-ID (erforderlich):** Klicken Sie das Feld an, um einen Unternehmensnamen zu wählen.
3. **Benutzername (erforderlich):** Geben Sie den Namen ein, mit dem sich der Benutzer am System anmelden wird.
4. **Passwort (erforderlich):** Geben Sie das Passwort des Benutzers ein.
5. **Vorname:** Geben Sie den Vornamen des Benutzers ein.
6. **Nachname:** Geben Sie den Nachnamen des Benutzers ein.
7. **E-Mail-Adresse:** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
8. **Konto gesperrt:** Ankreuzen, wenn Sie das Konto konfigurieren möchten, der Benutzer es aber derzeit nicht benutzen soll.
9. **Konto abgelaufen:** Ankreuzen, falls dieses Konto nicht mehr gültig ist.
10. **Zugang (erforderlich):** Wählen Sie die Genehmigungsstufe des Benutzers aus- siehe die folgende Tabelle für Rollen und Rollenfähigkeiten.
11. **Konto gültig bis:** Wählen Sie das Datum aus dem Kalender. Das Konto wird bis zum von Ihnen gewählten Tag gültig sein. An diesem Tag wird das System das Konto deaktivieren (sperrern).
12. Um das Konto zu erstellen oder zu ändern, klicken Sie auf **Speichern**.



Anmerkung: Von der Seite Stammdaten können Sie schnell auf Fenster „Einstellungen hinzufügen/ändern“ zugreifen, indem Sie die Personalliste auswählen und  in der Zeile der Person, die Sie ändern möchten, anklicken. Das ist die bevorzugte Methode, um ein Konto zu erstellen, da dadurch das Anmeldekonto mit dem Benutzerkonto verbunden wird.

	Anmeldekonten hinzufügen	Zugang	Protokoll-PDF erstellen	Protokoll löschen	Statistikeinstellungen bearbeiten	Stammdaten	Statistiken für alle Protokolle erstellen	Protokoll Nachbearbeitung empfangen	Protokoll zur Nachbearbeitung senden	Patientenname im Protokoll sehen	Upload	Qualitätskontrolle und Abrechnung
System-Admin	✓ Administrator Protokoll-Admin Stammdaten-Admin Qualitäts-Admin Qualitäts-Service Mitarbeiter Wachenleiter	✓ Alle Protokolle Dashboard Seite Anmelde-Info	✓	✓	✓	✓ Bearbeiten für System-Konfiguration Alle bearbeiten Beendete Listen löschen CSV-Datei hochladen	✓		✓		✓ Statistik-Excel-Datei Übersetzungsdateien	
Admin	✓ Administrator Protokoll-Admin Stammdaten-Admin Qualitäts-Admin Qualitäts-Service Mitarbeiter Wachenleiter	✓ Alle Protokolle Dashboard Seite Anmelde-Info	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓ Statistik-Excel-Datei	
Protokoll-Admin		✓ Alle Protokolle	✓	✓			✓			✓		
Stammdaten-Admin						✓ Alle bearbeiten						
Protokolle- und Stammdaten-Admin		✓ Alle Protokolle	✓	✓	✓	✓ Alle bearbeiten						

	Anmeldkonten hinzufügen	Zugang	Protokoll-PDF erstellen	Protokoll löschen	Statistikeinstellungen bearbeiten	Stammdaten	Statistiken für alle Protokolle erstellen	Protokoll Nachbearbeitung empfangen	Protokoll zur Nachbearbeitung senden	Patientenname im Protokoll sehen	Upload	Qualitätskontrolle und Abrechnung
Qualitäts-Admin		✓ Alle Protokolle Nur lesen	✓									✓ Status Qualitätsprüfung zurücksetzen
Qualitäts-Service		✓ Protokolle von eigenem Dienst Nur lesen	✓							✓		✓ Status Qualitätsprüfung festlegen/ zurücksetzen
Mitarbeiter		✓ Eigene Protokolle	✓ Eigene Protokolle für Nachbearbeitung	✓						✓		
Wachenteiler	✓ Stammdaten-Admin Mitarbeiter Wachenteiler	✓ Dashboard Protokolle von eigenem Dienst	✓	✓		✓ Auswahl- listen von eigenem Dienst bearbeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Besatzungsmitglieder • Fahrzeug • Basis • Geräte 	✓	✓	✓	✓		✓ Abrechnungsstatus zurücksetzen Status Qualitätsprüfung zurücksetzen Status Qualitätsprüfung festlegen Status Abrechnung festlegen

Konto löschen

1. In der Zeile, die die Service-ID des Kontos enthält, klicken Sie auf .
2. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt, die fragt, ob Sie das Konto löschen möchten. Wenn Sie sicher sind, klicken Sie auf **OK**.

Statistiken

Lassen Sie verschiedene statistische Berichte innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens ablaufen. Die verfügbaren Berichte werden angezeigt, wenn Sie auf das Feld Statistiken klicken.

Bericht erstellen

1. Klicken Sie auf das Feld Statistiken und wählen Sie den Namen des Berichts.



2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Start- und Endzeit eines Berichts auswählen können.
3. Klicken Sie auf **Berechnen und archivieren**.



Anmerkung: Wenn Sie auf „Berechnen und archivieren“ klicken, zeigt das System die Nachricht „Berechnung gestartet. Das Ergebnis wird im Archiv aufgeführt.“ Um den Bericht im Archiv anzusehen, aktualisieren Sie Ihren Browser. Der Bericht wird im Archivbereich unter den Datumfeldern angezeigt.

4. Das System erzeugt den Bericht mit Microsoft Excel und zeigt ihn in der Liste an.



Anmerkung: Da das System den Bericht im Hintergrund erzeugt, können Sie das System weiter benutzen. Sie müssen nicht abwarten, bis das System den Bericht aufgebaut hat.

5. Klicken Sie auf , um den Bericht auf Ihren Computer herunterzuladen.

Aktion wählen	Beschreibung	Erstellt
	2016-02-01_2016-04-12_EMSRescue.xlsx	11.04.2016 22:32

- Nachdem Sie den Bericht heruntergeladen haben, können Sie ihn entweder in der Liste lassen oder ihn durch einen Klick auf das rote **X** löschen.

Aktion wählen	Beschreibung	Erstellt
 	2016-02-01_2016-04-12_EMSRescue.xlsx	11.04.2016 22:32



Statistikeinstellungen (nur Administrator)

Benutzen Sie den Bereich Statistikeinstellungen, um Werte für Berichte anzuzeigen, hinzuzufügen, zu ändern und zu löschen.

- Klicken Sie auf den Reiter Statistikeinstellungen.
- Klicken Sie auf das Feld Statistikeinstellungen. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste. Eine Liste von konfigurierten Werten wird angezeigt.

Klicken Sie auf

- , um einen Wert zu ändern.
 - , um einen Wert zu löschen.
 - , um einen neuen Wert hinzuzufügen.
- Wenn Sie einen Wert ändern oder hinzufügen, erscheint ein Fenster, das es Ihnen ermöglicht, den Wert festzulegen und eine Beschreibung hinzuzufügen.

Bereich von:	<input type="text" value="0"/>
Bereich bis:	<input type="text" value="0"/>
Beschreibung:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

- Nachdem Sie den Wert hinzugefügt/geändert haben, klicken Sie auf **Speichern**. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Excel-Bericht aussehen wird, nachdem Sie den Wert hinzufügen/ändern.

DN	DO	DP	DQ
EinheitBenachrichtigtAnEinheitZurückInDienst-Kategorie	Altersgruppe	GCS-Gruppe	Sauerstoff-Gruppe
15-20 Minuten	30-49 Jahre	schwer	1-5 Liter
45-60 Minuten	2-6 Jahre	leicht	1-5 Liter

Hilfe Bereiche

Es besteht die Möglichkeit, jedem Bereich in AmbulancePad eine individuelle Hilfe Datei im PDF Format zuzuordnen. Diese Hilfe Datei kann durch Drücken des  Knopfes innerhalb des jeweiligen Bereiches aufgerufen werden. Somit kann jede Organisation ihren Mitarbeitern individuelle Anweisungen zu den jeweiligen Bereichen in AmbulancePad zur Verfügung stellen. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an die Supportabteilung.

Technischer Support

Unser Hilfspersonal steht bereit, um Ihnen Fragen zu folgenden Bereichen zum AmbulancePad und zur Software zu beantworten:

- Eigenschaften und Funktionen
- Integration für spezifische Umgebungen und Anforderungen
- Installation und Wartung
- Störungen oder Systemausfall – Unser Team bemüht sich, das Problem schnellstmöglich zu beheben

Kontaktinformationen Support

Deutschland und Österreich

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

9:00 Uhr – 17:00 Uhr MEZ

Telefon: +49 6441 38331 111

E-Mail: zoll-support@crs-medical.com

Schweiz

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

9:00 Uhr – 17:00 Uhr MEZ

08001838456

E-Mail: zoll-support@crs-medical.com