

Аксессуары и учебные
принадлежности для AED Pro®

ZOLL®



Электроды



CPR-D-padz®

Уникальные электроды CPR-D-padz для взрослых выполнены в виде единой электродной наклейки, что обеспечивает быстрое и правильное наложение электродов на грудь пациента. Эти электроды измеряют глубину и частоту компрессий грудной клетки и передают эти данные на дефибриллятор ZOLL AED Pro®. Срок хранения электродов CPR-D-padz составляет 5 лет — это самый продолжительный срок хранения одноразовых электродов.

Каталожный № 8900-0800



Pedi-padz® II

Дефибриллятор AED Pro оснащен уникальным педиатрическим алгоритмом распознавания жизнеугрожающих аритмий сердца у детей. Электроды Pedi-padz II предназначены для пациентов младше 8 лет или весом менее 25 кг. AED Pro распознает педиатрические электроды в момент их подключения и переключается со взрослого на педиатрический алгоритм анализа ЭКГ. Срок хранения электродов Pedi-padz II составляет два года.

Каталожный № 8900-0810



CPR Stat-padz®

Два отдельных электрода с функцией контроля качества компрессий Real CPR Help®. Срок хранения 24 мес.

Каталожный № 8900-0400 (8 шт. в упаковке)

Каталожный № 8900-0402 (1 шт. в упаковке)



ЭКГ-электроды

Коробка, содержащая 200 пакетов.
(По 3 электрода для ЭКГ в пакете)

Каталожный № 8900-0003



ЭКГ-кабель пациента для AED Pro, стандарт IEC

Для мониторинга II-го отведения ЭКГ,
3-х жильный.

Каталожный № 8000-0839

Принадлежности



Аккумуляторная батарея SurePower®

Аккумуляторная батарея SurePower представляет собой перезаряжаемый источник питания на литий-ионных батареях, обеспечивающих надежное питание как при нечастом применении изделия, так и при регулярном использовании специалистами по оказанию первой помощи. Модуль батареи оснащен функцией самопроверки, сохраняет в памяти историю использования и перезарядки, а также снабжен индикатором заряда, указывающим остающееся время работы. Все это позволяет убедиться, что дефибриллятор AED Pro имеет надежное энергообеспечение. Зарядное устройство не включено в комплект поставки.

Каталожный № 8019-0535



Зарядное устройство SurePower

Зарядное устройство SurePower позволяет одновременно проверять, калибровать и перезаряжать батареи SurePower. Эта система максимально увеличивает срок службы и надежность перезаряжаемых батарей ZOLL. Совместима с батареями SurePower и всеми ранее выпускавшимися перезаряжаемыми батареями ZOLL. Также совместима с батареей SurePower II (необходим адаптер для зарядного отсека, продаваемый отдельно). Батареи не включены в комплект поставки.

Каталожный № 8050-0030

Зарядное устройство SurePower с отсеком для одной батареи

Предназначено для проверки, рекалибровки и перезарядки одной батареи ZOLL SurePower или SurePower II. Не совместимо с никель-кадмиевыми или свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Батареи не включены в комплект поставки.

Каталожный № 8200-000100



Неперезаряжаемая литий-ионная батарея для AED Pro

Максимальный срок эксплуатации 5 лет. Не подлежит перезарядке.

Каталожный № 8000-0860



Мягкая сумка для транспортировки AED Pro

Каталожный № 8000-0810



Литой виниловый кейс для AED Pro

Снабжен отсеком для запасной батареи.


Каталожный № 8000-0832



Жесткий кейс для AED Pro

Особо прочный кейс с ячейками из вспененного материала.

Каталожный № 8000-0875

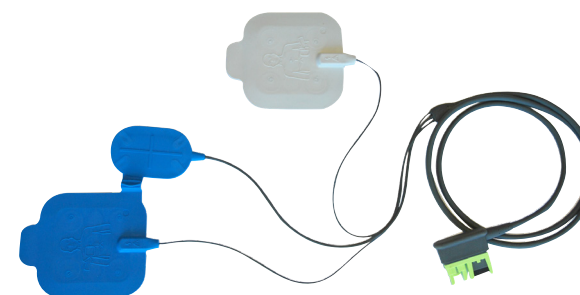

CPR-Dura-padz®

Многоразовые электроды для мониторинга ЭКГ, дефибрилляции и кардиостимуляции. В комплекте с АНД Pro обеспечивает условия для СЛР Real Help®, See Thru CPR® и RapidShock Analysis.

Каталожный № 8900-000310

Dura-padz®

Простые многофункциональные электроды для мониторинга ЭКГ и дефибрилляции. Оптимальное решение для ситуаций, когда СЛР, вероятно, не потребуется.


Каталожный № 8900-0300

Dura-padz® ГЕЛЬ

ГЕЛЬ Dura-padz одноразового пользования хранится в отдельных экономичных упаковках и не растекается.

Каталожный № 8900-0325


Аксессуары для обучения

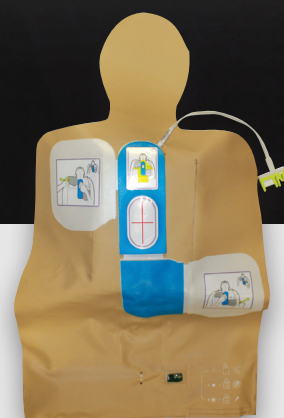

Переносной тренажер ZOLL

Этот облегченный переносной учебный тренажер включает плоский манекен-силуэт со встроенным симулятором сердечного ритма и электродом CPR-D-Demo для демонстрации работы AED Pro. Легко складывается и помещается в небольшую сумку для переноски, поставляемую для удобства вместе с комплектом.

Каталожный № 8008-0006

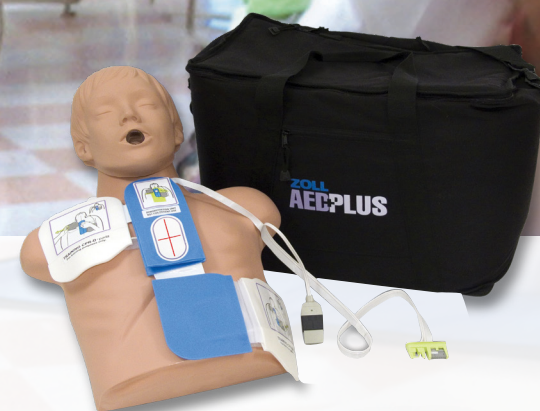

Демонстрационный комплект AED Plus

Также идеально подходящий для демонстрации Real CPR Help® с AED Pro, комплект включает демонстрационный электрод CPR-D-padz и манекен-торс в большой сумке для переноски. (Сам дефибриллятор AED Pro и симулятор не включены)

Каталожный № 8000-0834

Симулятор AED Pro

Симулирует сердечный ритм и ЭКГ по трем отведениям для демонстрации дефибриллятора AED Pro.

Каталожный № 8000-000925



Симулятор See-Thru CPR®

Этот симулятор генерирует наиболее распространенные типы ЭКГ ритмов в трех отведениях в целях обучения и демонстрации, а также симулирует See-Thru CPR® — новейшую технологию фильтрации ЭКГ от механических помех с целью сокращения продолжительности пауз между компрессиями. Также совместим с дефибрилляторами ZOLL X Series® и R Series®.

Каталожный № 8009-0751



Демонстрационные электроды CPR-D-padz

Демонстрационные электроды для использования с дефибрилляторами AED Pro или AED Plus (требуют наличия самого дефибриллятора и симулятора).

Каталожный № 8900-5007



Демонстрационные электроды CPR Stat-padz

Демонстрационные электроды для использования с дефибрилляторами AED Pro или AED Plus (требуют наличия самого дефибриллятора и симулятора).

Каталожный № 8900-0190



Демонстрационный манекен

Голова манекена сделана подвижной для демонстрации восстановления проходимости дыхательных путей.

Каталожный № 8000-0835



Компания ZOLL Medical Corporation, входящая в группу Asahi Kasei Group, занимается разработкой и продажей изделий медицинского назначения и программного обеспечения, помогающих усовершенствовать неотложную медицинскую помощь и позволяющих спасать жизни людей за счет повышения эффективности медицинской помощи и оптимизации работы. Предлагаемая продукция для дефибрилляции и мониторинга, поддержания кровообращения и СЛР, управления данными, инфузионной терапии, терапевтической терморегуляции и искусственной вентиляции легких, компания ZOLL предоставляет широкий набор технологий для медицинского персонала, сотрудников скорой медицинской помощи, пожарных, а также неквалифицированных спасателей, которые оказывают помощь пострадавшим, нуждающимся в реанимации и интенсивной терапии. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.zoll.com.

Группа Asahi Kasei Group является многопрофильной группой компаний под управлением холдинга Asahi Kasei Corp., работающего в отраслях химической и волоконной промышленности, строительства и производства строительных материалов, электроники и сфере производства медицинского оборудования для здравоохранения. Среди изделий медицинского назначения – устройства и системы для интенсивной терапии, диализа, лечебного афереза, переливания крови. Компания также выпускает биотерапевтические и фармацевтические средства, диагностические реактивы и препараты для клинического питания. В группе Asahi Kasei Group работают более 30 000 сотрудников в более чем 100 странах. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/.

ADVANCING RESUSCITATION. TODAY.®

ZOLL Medical Corporation
Всемирная штаб-квартира
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-804-4356
www.zoll.com

Для поиска адресов и номеров факса, а также других филиалов компании по всему миру перейдите по адресу www.zoll.com/contacts.

©2018 ZOLL Medical Corporation. Все права защищены. Advancing Resuscitation. Today., AED Plus, AED Pro, CPR-D-padz, E Series, Pedi-padz, Real CPR Help, R Series, See-Thru CPR, SurePower, X Series и ZOLL являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании ZOLL Medical Corporation в Соединенных Штатах Америки и (или) других странах.

Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.