

Control de la temperatura intravascular IVTM™

ZOLL®




El sistema Thermogard XP®

Monitor fácil de leer:


- Pantalla grande de la temperatura del paciente.
- Presentación a color de la actividad de enfriamiento o calentamiento.

Control total: Modo, temperatura objetivo y ajuste de tasa.

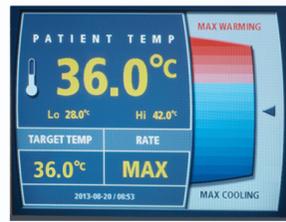

Datos completos del paciente:

Realice un seguimiento de los datos del paciente y del sistema, y transfíeralos electrónicamente al expediente del paciente.

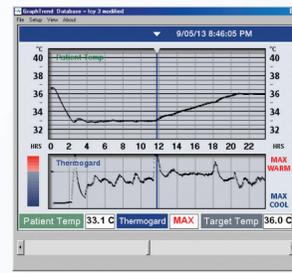

Dos entradas de temperatura:
Para medir la temperatura del paciente

Catéter de enfriamiento y calentamiento

Lúmenes de infusión del catéter venoso central (CVC) estándar

Los catéteres IVTM cuentan con:

- Funciones de catéter venoso central (CVC) de triple lumen, que incluyen el suministro de medicamentos, la extracción de sangre y el monitoreo de la presión venosa central.
- Kits de catéteres, que incluyen los accesorios necesarios para su colocación.
- Revestimiento hidrofílico con heparina.
- Cuerpo, punta y banda marcadora radiopacos para garantizar su colocación correcta en el vaso.

Todos los catéteres IVTM son:

- Compatibles con RM

Lugares de inserción:

- Yugular interna (YI)
- Subclavia (S)
- Femoral (F)



CATÉTERES PARA LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO		
Nombre del catéter	Solex 7™	Cool Line®
Tiempo de permanencia	7 y 4 días*	7 días
Capacidad de enfriamiento (vatios) con TGXP	144	74
Capacidad de calentamiento (vatios) con TGXP	38	21
Lugar de inserción	Subclavia Yugular interna	Subclavia Yugular interna
Diámetro externo (DE) en el lugar de inserción	9,3 F	9,3 F
Longitud	26 cm	22 cm

*Solex 7 está autorizado para permanecer 7 días para el control de fiebre y 4 días en el caso de indicaciones cardíacas y neuroquirúrgicas.

CATÉTERES PARA LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO			
Nombre del catéter	Quattro®	Icy®	Cool Line®
Tiempo de permanencia	4 días	4 días	7 días
Capacidad de enfriamiento (vatios) con TGXP	173	139	74
Capacidad de calentamiento (vatios) con TGXP	48	38	21
Lugar de inserción	Femoral	Femoral	Femoral
Diámetro externo (DE) en el lugar de inserción	9,3 F	9,3 F	9,3 F
Longitud	45 cm	38 cm	22 cm

Próxima cita de servicio

Fecha	Hora	Lugar
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Contacto del representante de ZOLL: _____

Para asistencia técnica llamar al: (877) 225-7487 ext. 3